

GuSha5

KOSMETISCHES GERÄT ZUR STRAFFUNG DER HALS- UND GESICHTSHAUT

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

Inhalt



Inhalt 1
 Technische Spezifikationen 2
 Beschreibung der Teile 2/3
 Funktion 3
 Indikation 4/5
 Wie benutzt man 5/6
 Sicherheitshinweis 6/7
 FAQ 8
 Schaltplan 9

Technische Spezifikationent

| C. | Artikel | Einheit | Spezifikationen |
|----|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | Betriebsspannung | V | 3,7V |
| 2 | Nennleistung | W | 5W |
| 3 | Betriebszeit für jeden Modus | min | 6 Minuten |
| 4 | Batterietyp | / | 500 mAh Lithiumbatterie 3,7 V |
| 5 | Wasserbeständigkeit | / | IPX5 |
| 6 | Ladezeit | H | <4H |

Beschreibung der Teile

- ① Magnetabdeckung
- ② 4t Massagekugeln
- ③ Gebogener Massagekopf
- ④ LED-Licht
- ⑤ Licht im ANTI-AGING-Modus
- ⑥ Leuchtanzeige des BRIGHTEN-Modus
- ⑦ Betriebsanzeige
- ⑧ Ein/Aus/Modus-Taste
- ⑨ DC-Ladeanschluss
- ⑩ Silikonhülle
- ⑪ Reinigungstuch
- ⑫ DC-USB-Kabel
- ⑬ Fall
- ⑭ Nadel

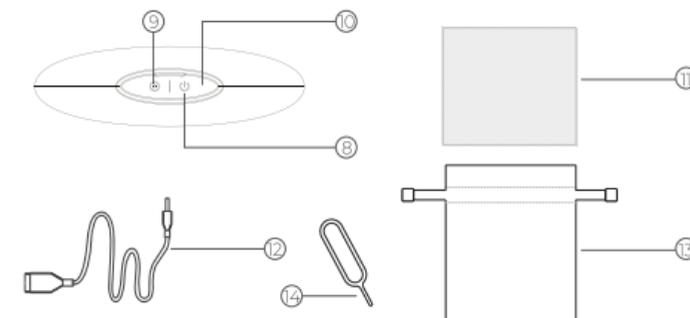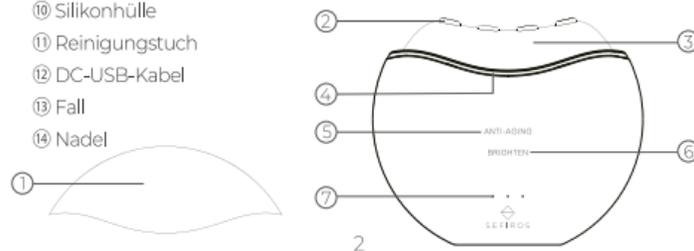

HINWEIS: Das Gerät verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie, die mit Gleichstrom betrieben wird
 Laden Sie nur mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten).

Funktion

Das RF-Hautstraffungsgerät **GuSha5** kombiniert RF (Radio Frequenz), EMS, rotes LED-Licht und Multifrequenz-Vibrationstechnologie, mit 4 Massagekugeln und einem speziell gebogenen Massagekopf. Einzigartiger Hall-Magnetschalter. Das Produkt wirkt auf Gesicht und Hals und verbessert die Mikrozirkulation der Haut, indem es das Kollagen tief stärkt, um Lichtlinien zu reduzieren, Konturen zu straffen und die Haut aufzuhellen. *Sanfter/starker ANTI-AGING-Modus HF- und hochfrequente Vibrationen helfen, Kollagen zu aktivieren, die Durchblutung zu verbessern und Falten zu glätten. *HELLIG Weicher/starker Modus RF, EMS und rotes LED-Licht mit hochfrequenten Vibrationen helfen, die Konturen von Gesicht und Hals zu straffen und gleichzeitig Kollagen zu regenerieren.

Indikation

| C. | Artikel | Indikation |
|----|--------------------------|---|
| 1 | ON | 1. Sanfter ANTI-AGING-Modus: Entfernen Sie die magnetische Abdeckung oder drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 1 Sekunde. Mit einem Piepton beginnt der sanfte ANTI-AGING-Modus mit niederfrequenter Vibration und RF zu arbeiten, und das weiße Licht schaltet sich ein. 2. ANTI-AGING Strong-Modus: Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Modus umzuschalten. Der ANTI-AGING Strong Mode beginnt mit hochfrequenten Vibrationen und RF zu arbeiten und das orangefarbene Licht leuchtet auf. 3. Aufhellen Sanfter Modus: Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Modus umzuschalten. Der BRIGHTEN Gentle Mode beginnt mit niederfrequenter Vibration und rotem LED-Licht, EMS an 2 Massagepunkten und RF an 2 Massagepunkten und der weißen Anzeigeluchte. 4. Aufhellen Starker Modus: Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Modus umzuschalten. Der BRIGHTEN Strong-Modus beginnt mit hochfrequenter Vibration und rotem LED-Licht, EMS an 2 Massagepunkten und RF an 2 Massagepunkten und orangefarbener Anzeige leuchtet. |
| 2 | OFF | Setzen Sie die magnetische Abdeckung auf oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde in allen Modi, das Gerät schaltet sich mit einem Piepton aus. |
| 3 | Niedriger Batteriestatus | 1. Wenn das Gerät funktioniert und die Stromversorgung ausreichend ist, leuchten 3 Lichter. 2. Wenn der Akkustand weniger als 10 % beträgt, blinken die Lichter kontinuierlich von links nach rechts. 3. Wenn die Batterie schwach ist, blinken die 3 Lichter 2 Mal und erlöschen dann. |



Notfall: Kosmetisches Gerät zur Straffung der Hals- und Gesichtshaut
 Model: GuSha5
 Maße: 90.4 x 86.35x 26.4mm (L x W x H)
 Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim, Czech Republic



| | | |
|---|-----------------|---|
| 4 | Ladent | 3 Lichter blinken kontinuierlich von links nach rechts. |
| 5 | Voll aufgeladen | 3 Power-Lämpchen leuchten. |

► Wie benutzt man

Im Folgenden finden Sie das Beispielverfahren (Bild und Text unten). Sie können jeden Modus auswählen, den Sie gemäß "Funktionen" verwenden möchten.



1. Tragen Sie die richtige Menge Gel auf Gesicht und Hals auf.



3. Legen Sie die Massagekugeln auf die Haut von Gesicht und Hals und bewegen Sie sich langsam mit konstanter Geschwindigkeit nach oben.

5



2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den Modus ANTI-AGING oder BRIGHTEN



4. Alle 1 Minute ertönt ein Piepton, um Sie an den Gebietswechsel zu erinnern. Und das Gerät schaltet sich in 6 Minuten aus.

► Notiz

Kontraindikation

1. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
2. Personen mit elektronischen menschlichen Organen ist die Verwendung des Geräts untersagt.
3. Personen mit Hautschwellungen, nach Operationen, Sonnenbrand oder anderen Hautsymptomen dürfen das Gerät nicht verwenden.
4. Personen mit Hautentzündungen wie Striemen, Psoriasis, Ekzemen, Hautausschlag, wiederkehrendem Herpes simplex, Narbenbildung, Schäden und Elektrosensibilität, schwangere Frauen, stillende Frauen, hämorrhagische Hämophilie
5. Nicht für längere Zeit am selben Ort verwenden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie innerhalb eines Monats eine Hautoperation oder eine schwere Verbrennung hatten.
7. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie sich einer plastischen Operation unterzogen haben.
8. Es wird nicht empfohlen, es zu verwenden, wenn Sie Metallprothesen haben.
9. Verwenden Sie den Massageball nicht, LED-Licht direkt auf dem Augapfel.
10. Uhren, Brillen, falsche Wimpern oder andere Metallgegenstände müssen vor dem Betrieb abgelegt werden.

6



5. Wischen Sie die Massagekugeln ab und setzen Sie dann die Abdeckung zur Aufbewahrung auf.

Tipy:

1. Über die Speicherfunktion des Geräts stellt es den zuletzt verwendeten Modus wieder her.
2. Die Werkseinstellung ist der ANTI-AGING Sanftmodus

| | |
|--|--|
| <p>⊘ Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.</p> | <p>⊘ Bitte verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.</p> |
| <p>⊘ Zerlegen Sie dieses Gerät nicht selbst.</p> | <p>⊘ Wenn das Gerät beschädigt oder fallen gelassen wurde, überprüfen Sie es vor der Verwendung.</p> |
| <p>⊘ Verwenden Sie es nicht, wenn das Gerät oder das USB-Kabel beschädigt ist.</p> | <p>ⓘ Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern</p> |

7

Reinigung

Wischen Sie die Massagerperle nach Gebrauch mit einem weichen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Lagerung


Bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Schützen Sie es vor ätzenden Flüssigkeiten. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

► FAQ

| Q | A | Lösung |
|---|--|---|
| Einschalten fehlgeschlagen oder Licht ist aus. | <ol style="list-style-type: none"> ① Das Gerät ist entladen ② Die Lichter sind defekt oder das Programm ist beschädigt. | <ol style="list-style-type: none"> ① Laden Sie das Gerät 4 Stunden lang auf und versuchen Sie es erneut. ② Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten. |
| Gerät funktioniert nach dem Aufladen nicht | <ol style="list-style-type: none"> ① Das USB-Kabel/der Adapter ist nicht richtig angeschlossen. ② Das Gerät ist nicht ausreichend aufgeladen. ③ Die Batterie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. | <ol style="list-style-type: none"> ① Überprüfen Sie den Kontakt zwischen dem Gerät und dem Ladegerät (das Licht blinkt während des Ladevorgangs). ② Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. |
| Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde (≥ 6 Monate), laden Sie das Gerät zuerst vollständig auf. | | |

8

► Schaltplan

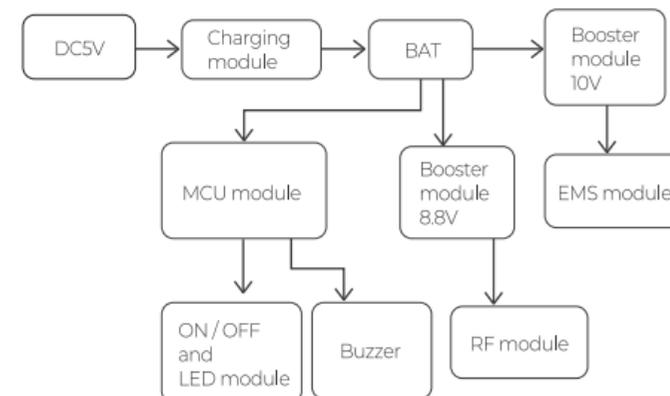

Der Schaltplan dient NUR als Referenz.

Erklärung: Der Inhalt dieses Dokuments wurde geprüft. Produkttechnologie- oder Software-Upgrades werden in einer neuen Version des Handbuchs zusammengestellt. Wenn sich Aussehen, Farbe und Leistung ändern, überprüfen Sie die aktuelle Version.

9