

SEFIROS  
your pure beauty.



GuSha5

KOZMETIKAI ESZKÖZ A NYAK ÉS AZ ARC  
BŐRÉNEK FESZESÍTÉSÉRE

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## Tartalom



Tartalom	1
Műszaki adatok	2
Az alkatrészek leírása	2/3
Funkciók	3
Ajánlás	4/5
Hogyan kell használni	5/6
Biztonsági figyelmeztetés	6/7
FAQ	8
Áramköri rajz	9

## Műszaki adatok

Sz.	Tétel	Mértékegység	Műszaki adatok
1	Üzemi feszültség	V	3,7V
2	Névleges teljesítmény	W	5W
3	Működési idő minden üzemmódhoz	min	6 perc
4	Elemtípus	/	500 mAh lítium akkumulátor 3,7V
5	Vízállóság	/	IPX5
6	Töltés ideje:	H	<4 óra

## Az alkatrészek leírása

- ① Mágneses burkolat ② 4 masszázsgolyó ③ Hajlított masszázsfej  
④ LED lámpa ⑤ ANTI-AGING üzemmód lámpa  
⑥ A BRIGHTEN mód jelzőfénye ⑦ Tápellátás jelzőfénye  
⑧ On/Off/Mode gomb ⑨ DC töltőport  
⑩ Szilikon burkolat  
⑪ Tisztító kendő  
⑫ DC USB-kábel  
⑬ Tok  
⑭ Tű

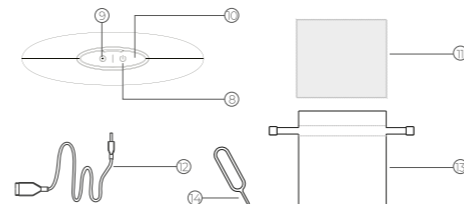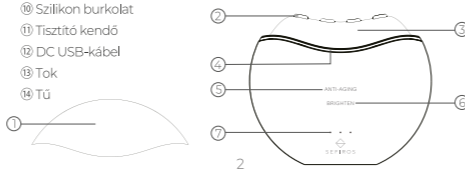

MEGJEGYZÉS: A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, amely egyenárammal működik. Csak a töltőkábellel töltsé (a csomag része).

## Funkciók

Az GuSha5 RF bőrfeszítő készülék egyesíti az RF-et (Radio Frekvencia), EMS, piros LED fény és többfrekvenciás vibrációs technológia, 4 masszázsgolyóval és speciális ívelt masszázsféjjel.

Egyedi Hall mágneses kapcsoló. A termék az arcon és a nyakon fejti ki hatását, és javítja a bőr mikrokeringését a kollagén mélyen erősítésével, a világos vonalakat csökkentő, a kontúrokat emelő és a bőr ragyogását jelentő hatás elérése érdekében.

\*Kíméletes/erős ANTI-AGING mód

Az RF és a magas frekvenciájú rezgések elősegítik a kollagén aktiválását, javítják a vérkeringést és kisimítják a ráncokat.

\*BRIGHTEN Lágy/erős mód

Az RF, az EMS és a piros LED-fény magas frekvenciájú rezgéssel segíti az arc és a nyak kontúrjának kiemelését, miközben regenerálja a kollagént.

## Ajánlás

C.	Tétel	Ajánlás
1	ON	<p>① Kíméletes ANTI-AGING mód: Távolítsa el a mágneses fedelet, vagy nyomja meg az ON/OFF gombot 1 másodpercig. Hangjelzéssel a gyengéd ANTI-AGING üzemmód alacsony frekvenciájú rezgéssel és rádiófrekvenciával kezd működni, és kigyullad a fehér fény.</p> <p>② ANTI-AGING erős mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. I-AGING Strong Mode üzemmód magas frekvenciájú rezgéssel és rádiófrekvenciával kezd működni, és a narancssárga fény világít.</p> <p>③ BRIGHTEN - Gyengéd mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. A BRIGHTEN Gentle Mode alacsony frekvenciájú rezgéssel és piros LED fényel, EMS-sel 2 masszázsponton és RF-vel 2 masszázsponton és fehér jelzőfényel kezd működni.</p> <p>④ BRIGHTEN Erős mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. A BRIGHTEN Strong mód magas frekvenciájú rezgéssel és piros LED fényel kezd működni, 2 masszázsponton EMS, 2 masszázsponton RF és narancssárga jelzőfény világít.</p>
2	OFF	Helyezze fel a mágneses fedelet, vagy tartsa lenyomva az On/OFF gombot 1 mp-ig minden üzemmódban, a készülék szipolással kikapcsol.
3	Alacsony akkumulátor	<p>1. Ha a készülék működik és a tápellátás elegendő, 3 lámpa világít.</p> <p>2. Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 10%, a jelzőfények folyamatosan villognak balról jobbra.</p> <p>3. Ha az akkumulátor lemerült, a 3 jelzőfény 2-szer felvillan, majd kialszik.</p>

SEFIROS  
your pure beauty.

Név: Kosmetikai eszköz a nyak és az arc bőrének feszesítésére

Model: GuSha5

Méret: 90,4 x 86,35 x 26,4 mm (L x W x H)

Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim, Czech Republic

RoHS

4	Töltés	3 lámpa folyamatosan villog balról jobbra.
5	Teljesen feltöltve	3 tápfeszültség jelzőfény világít.

## ► Hogyan kell használni

A következő minta eljárás (kép és szöveg lent), a „Funkciók” részben kiválaszthatja a használni kívánt módot.



1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű gélt az arcra és a nyakra.



3. Helyezze a masszázsgolyókat az arc és a nyak bőrére, lassan, állandó sebességgel felfelé haladva.



2. Kapcsolja be a készüléket, és válassza az ANTI-AGING vagy a BRIGHTEN módot



4. 1 percenként sípoló hang hallatszik, hogy emlékeztesse a területváltásra. És a készülék 6 percen belül kikapcsol.

5



5. Törölje le a masszázsgolyókat, majd helyezze rá a huzatot tároláshoz.

## ► Értesítés

Ellenjavallat

1. Gyermekeknek tilos a készülék használata.
2. Elektronikus emberi szervevel rendelkező személyeknek tilos a készülék használata.
3. Tilos a készülék használata azoknak, akik bőrduzzanattal, műtét után, napégéssel vagy egyéb bőrtünetekkel rendelkeznek.
4. Bőrgyulladásban szenvedők, pl. duzzanat, pikkelysömör, ekcéma, kiütés, visszatérő herpes simplex, hegesezés, sérülés és elektromágneses érzékenység, terhes nők, szoptató nők, vérséhes hemofília betegség, bőr jellemzői dermatitis használata tilos.
5. Ne használja hosszú ideig ugyanazon a helyen.
6. Ne használja a készüléket, ha egy hónapon belül bőrműtéten esett át vagy súlyos égési sérülést szenvedett.
7. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával, ha plasztikai műtéten esett át.
8. Használata nem javasolt, ha fém fogsora van.
9. Ne használja a masszázsgolyót, a LED-lámpát közvetlenül a szemgolyón.
10. Az órákat, szemüvegeket, műszempillákat vagy egyéb fémtárgyakat használat előtt el kell távolítani.

6

Tipppek:

1. A készülék memória funkciójával visszaállítja az utoljára használt módot.
2. A gyári beállítás ANTI-AGING Gentle Mode-ban van

<p>⊘ Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.</p>	<p>⊘ Kérjük, ne használja a készüléket töltés közben.</p>
<p>⊘ Ne szerelje szét ezt a készüléket saját maga.</p>	<p>⊘ Ha a készülék sérült vagy leesett, használat előtt ellenőrizze.</p>
<p>⊘ Ne használja, ha a készülék vagy az USB-kábel megsérült.</p>	<p>⚠ Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.</p>

7

## Tisztítás

Használat után törölje le a masszázsgolyókat puha ruhával. Ne merítse vízbe a készüléket.

## Tárolás


Tárolja száraz és pormentes helyen. Óvja a korrozív folyadéktól. Tartsa távol a gyermekektől.

## ► FAQ

Q	A	Megoldás
Nem sikerült bekapcsolni, vagy a lámpa nem világít.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Das Gerät ist entladen</li> <li>② Die Lichter sind defekt oder das Programm ist beschädigt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Töltse a készüléket 4 órán keresztül, majd próbálja újra.</li> <li>② Ha továbbra sem működik, kérjük, forduljon a vevőszolgálati csapathoz segítségért.</li> </ol>
A készülék töltés után nem működik	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Az USB-kábel/adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.</li> <li>② A készülék nincs eléggé feltöltve.</li> <li>③ Az akkumulátor elérte élettartama végét.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Ellenőrizze az érintkezést a készülék és a töltő között (töltés közben a jelzőfény villog).</li> <li>② Ha továbbra sem működik, forduljon a vevőszolgálati csapathoz.</li> </ol>
Ha a készüléket hosszabb ideig (≥ 6 hónapig) nem használta, először töltse fel teljesen.		

8

## ► Áramköri rajz

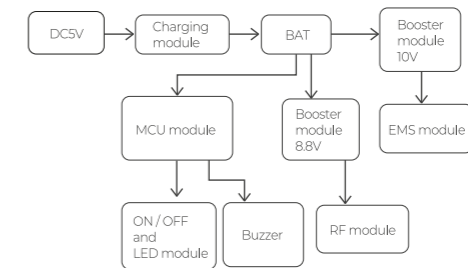

A bekapcsolási rajz CSAK tájékoztató jellegű.

Nyilatkozat: A dokumentum tartalmát ellenőriztük. A terméktechnológiákat vagy a szoftverfrissítéseket a kézikönyv egy új verziójába állítják össze. Ha a megjelenés, a szín és a teljesítmény megváltozik, ellenőrizze az aktuális verziót.

9