



ITALIANO



GuSha5

DISPOSITIVO COSMETICO PER IL RASSODAMENTO DELLA PELLE DEL COLLO E VISO

Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima dell'uso

► **Contenuto**



Contenuto .....	1
Specifiche tecniche .....	2
Descrizione delle parti .....	2/3
Funzione .....	3
Indicazione .....	4/5
Modo d'uso .....	5/6
Avviso di sicurezza .....	6/7
FAQ .....	8
Schema elettrico .....	9

► **Specifiche tecniche**

N.	Item	Unità	Specifiche
1	Tensione di esercizio	V	3,7V
2	Potenza nominale	W	5W
3	Tempo di funzionamento per ciascuna modalità	min	6 minuti
4	Tipo di batteria	/	Batteria al Litio da 500 mAh 3,7V
5	Resistenza all'acqua	/	IPX5
6	Tempo di carica	H	<4H

► **Descrizione delle parti**

- ① Copertura magnetica
- ② 4 sfere massaggianti
- ③ Testina massaggiante curva
- ④ Spia LED
- ⑤ Spia modalità ANTI-AGING
- ⑥ Indicatore luminoso della modalità BRIGHTEN
- ⑦ Indicatore di alimentazione
- ⑧ Pulsante On/Off/Modalità
- ⑨ Porta di ricarica CC
- ⑩ Copertura in silicone
- ⑪ Panno per la pulizia
- ⑫ Cavo USB DC
- ⑬ Caso
- ⑭ Ago

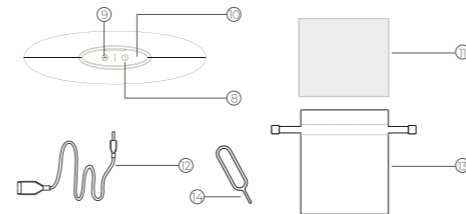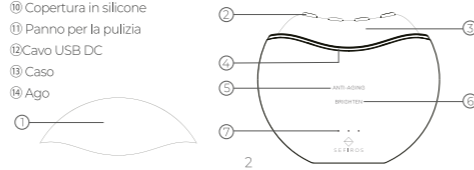

NOTA: Il dispositivo ha una batteria al litio integrata alimentata a corrente continua. Ricarica solo con il cavo di ricarica (incluso nella confezione).

► **Funzione**

Il dispositivo per stringere la pelle **GuSha5** combina RF (Radio Frequenza), EMS, luce LED rossa e tecnologia di vibrazione multifrequenza, con 4 sfere massaggianti e una speciale testina massaggiante curva. Interruttore magnetico Hall unico. Il prodotto agisce su viso e collo e migliora la microcircolazione cutanea rafforzando in profondità il collagene, per ottenere l'effetto di ridurre le rughe, sollevare i contorni e illuminare la pelle. \*Modalità ANTI-ETA' fine/forte RF e vibrazioni ad alta frequenza aiutano ad attivare il collagene, migliorare la circolazione sanguigna e levigare le rughe. \*LUMINOSO Modalità morbida/forte RF, EMS e luce LED rossa con vibrazioni ad alta frequenza aiutano a sollevare i contorni del viso e del collo rigenerando il collagene.

► **Indicazione**

N.	Item	Indicazione
1	ON	① Modalità ANTI-ETA' fine: Rimuovere il coperchio magnetico o premere il pulsante ON/OFF per 1 s. Con un segnale acustico, la modalità ANTI-AGING delicata inizia a funzionare con vibrazioni a bassa frequenza e RF e la luce bianca si accende. ② Modalità ANTI-ETA' forte: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. ANTI-INEVECCHIAMENTO La modalità forte inizierà a funzionare con vibrazioni ad alta frequenza e RF e la luce arancione si accenderà. ③ BRIGHTEN Modalità fine: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. BRIGHTEN La modalità delicata inizierà a funzionare con vibrazione a bassa frequenza e luce LED rossa, EMS su 2 punti di massaggio e RF su 2 punti di massaggio e la spia bianca. ④ BRIGHTEN Modalità forte: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. BRIGHTEN La modalità forte inizierà a funzionare con vibrazione ad alta frequenza e luce LED rossa, EMS su 2 punti di massaggio e RF su 2 punti di massaggio e l'indicatore arancione si accende.
2	OFF	Indossare la cover magnetica o premere il pulsante On/OFF per 1s in tutte le modalità, il dispositivo si spegnerà emettendo un segnale acustico.
3	Batteria scarica	1. Quando il dispositivo è in funzione e l'alimentazione è sufficiente, si accendono 3 spie. 2. Quando la batteria è inferiore al 10%, le luci lampeggiano continuamente da sinistra a destra. 3. Quando la batteria è scarica, le 3 spie lampeggeranno 2 volte e poi si spegneranno.



Nome: Dispositivo cosmetico per il rassodamento della pelle del collo e viso

Modello: GuSha5

Dimensioni: 90.4 x 86.35x 26.4mm (L x W x H)

Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim, Czech Republic



4	Ricarica	3 luci lampeggiano continuamente da sinistra a destra.
5	Completamente carico	3 spie di alimentazione sono accese.

### ► Modo d'usot

Di seguito è riportata la procedura di esempio (immagine e testo sotto), puoi scegliere qualsiasi modalità che desideri utilizzare in base alle "Funzioni"



1. Applicare la giusta quantità di gel sul viso e collo.



2. Accendi il dispositivo e seleziona la modalità ANTI-ETA' o LUMINOSITA'



3. Posizionare le palline massaggianti sulla pelle del viso e del collo, muovendole lentamente verso l'alto a velocità costante.



4. Viene emesso un segnale acustico ogni 1 minuto per ricordare il cambio di area. E il dispositivo si spegne in 6 minuti.

5



5. Pulisci le palline da massaggio e poi rimetti il coperchio per riporle.

### Consigli:

- Utilizzando la funzione di memoria del dispositivo, ripristina l'ultima modalità utilizzata.
- L'impostazione di fabbrica è Modalità delicata ANTI-ETA'

6

### ► Avviso

#### Controindicazione

- Ai bambini è vietato utilizzare il dispositivo.
- Le persone con organi umani elettronici non possono utilizzare il dispositivo.
- Le persone con gonfiore della pelle, dopo un intervento chirurgico, scottature solari o altri sintomi della pelle non possono utilizzare il dispositivo.
- Persone che hanno infiammazioni cutanee come lividi, psoriasi, eczema, eruzioni cutanee, herpes simplex ricorrente, cicatrici, danni e sensibilità elettromagnetica, donne in gravidanza, donne che allattano, emofilia emorragica malattia, caratteristiche della pelle dermatite è vietato l'uso.
- Non utilizzare a lungo nello stesso posto.
- Non utilizzare il dispositivo se hai subito un intervento chirurgico alla pelle o una grave ustione entro un mese.
- Consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo se si è stati sottoposti a interventi di chirurgia plastica.
- Se ne sconsiglia l'uso se si dispone di protesi in metallo.
- Non utilizzare la palla da massaggio, la luce a LED direttamente sul bulbo oculare.
- Orologi, occhiali, ciglia finte o altri oggetti metallici devono essere rimossi prima dell'uso.

<p>⊘ Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.</p>	<p>⊘ Si prega di non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.</p>
<p>⊘ Non smontare questo dispositivo da soli.</p>	<p>⊘ Se il dispositivo è danneggiato o cade, ispezionarlo prima dell'uso.</p>
<p>⊘ Non utilizzarlo se il dispositivo o il cavo USB sono rotti.</p>	<p>⚠ Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate.</p>

7

### Pulizia

Dopo l'uso, pulire il tallone da massaggio con un panno morbido. Non immergere il dispositivo in acqua.

### Magazzinaggio


Conservarlo in un luogo asciutto e privo di polvere. Proteggerlo da liquidi corrosivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### ► FAQ

Q	A	Soluzione
Impossibile accendere o la luce è spenta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il dispositivo è scarico</li> <li>Le luci sono rotte o il programma è danneggiato.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Caricare il dispositivo per 4 ore e riprovare.</li> <li>Se ancora non funziona, contattare il team del servizio post-vendita per assistenza.</li> </ol>
Il dispositivo non funziona dopo la ricarica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il cavo/adattatore USB non è collegato correttamente.</li> <li>Il dispositivo non è sufficientemente carico.</li> <li>La batteria ha raggiunto la fine della sua durata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificare il contatto tra il dispositivo e il caricabatteria (la spia lampeggia durante la carica).</li> <li>Se continua a non funzionare, contattare il team di assistenza post-vendita.</li> </ol>
Se il dispositivo non è stato utilizzato per molto tempo (≥ 6 mesi), caricare prima completamente il dispositivo.		

8

### ► Schema elettrico

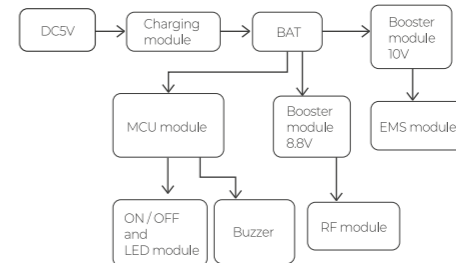

Lo schema elettrico è SOLO per riferimento.

Dichiarazione: Il contenuto di questo documento è stato verificato. La tecnologia del prodotto o gli aggiornamenti software verranno inseriti in una nuova versione del manuale. Se l'aspetto, il colore e le prestazioni cambiano, controlla la versione corrente.

9