



GuSha5

DISPOZITIV COSMETIC PENTRU CONSOLIDAREA
PIELII GÂTULUI ȘI A FEȚEI

Înainte de utilizare vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Cuprins



Cuprins	1
Specificații tehnice	2
Descrierea pieselor	2/3
Funcție	3
Indicații	4/5
Cum se utilizează	5/6
Notă de siguranță	6/7
FAQ	8
Schema circuitului	9

Specificații tehnice

C.	Articol	Unitate	Specificații
1	Tensiune de operare	V	3,7V
2	Putere nominală	w	5W
3	Timp de funcționare pentru fiecare mod	min	6 minut
4	Tipul bateriei	/	Baterie litiu de 500 mAh 3,7 V
5	Rezistența la apă	/	IPX5
6	Timp de încărcare	H	<4H

Descrierea pieselor

- ① Capac magnetic ② 4 bile de masaj ③ Cap de masaj curbat
- ④ Lumină LED ⑤ Indicatorul luminos al modului ANTI-AGING
- ⑥ Indicator luminos al modului BRIGHTEN ⑦ Indicator de alimentare
- ⑧ Buton On/Off/Mode ⑨ Port de încărcare DC
- ⑩ Capac din silicon
- ⑪ Cărpă de curățare
- ⑫ Cablu USB DC
- ⑬ Carcasă
- ⑭ Ac

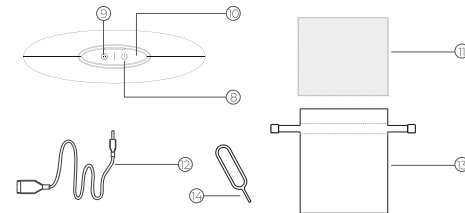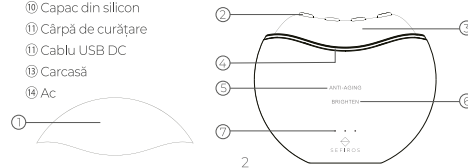

NOTĂ: Dispozitivul are o baterie cu litiu încorporată alimentată de curent continuu. Încărcați numai cu cablul de încărcare (inclus în pachet).

Funcții

Dispozitivul de fortificare a pielii **GuSha5** RF combină RF (Radio Frecvență), EMS, lumină LED roșie și tehnologie de vibrații cu mai multe frecvențe, cu 4 bile de masaj și un cap special curbat de masaj.

Comutator magnetic Hall unic. Produsul acționează pe față și pe gât și îmbunătățește microcirculația pielii prin tratarea profundă a colagenului, pentru a obține efectul de reducere a liniilor de lumină, de lifting a contururilor și de luminozitate a pielii.

*Mod delicat/puternic ANTI-AGING

RF și vibrațiile de înaltă frecvență ajută la activarea colagenului, îmbunătățește circulația sângelui și netezește ridurile.

*BRIGHTEN Mod delicat/puternic

Lumina RF, EMS și LED roșu cu vibrații de înaltă frecvență ajută la ridicarea contururilor feței și gâtului în timp ce regenerează colagenul.

Indicații

C.	Articol	Indicații
1	ON	<p>① Mod delicat ANTI-AGING: Scoateți capacul magnetic sau apăsați butonul ON/OFF timp de 1 secundă. Cu un semnal sonor, începe să funcționeze modul delicat ANTI-AGING cu vibrații de frecvență joasă și RF și se aprinde lumina albă.</p> <p>② Mod puternic ANTI-AGING: Apăsați butonul ON/OFF pentru a comuta modul. Modul puternic ANTI-AGING va începe să funcționeze cu vibrații de înaltă frecvență și RF și se aprinde lumina portocalie.</p> <p>③ BRIGHTEN Mod delicat: Apăsați butonul ON/OFF pentru a comuta modul. BRIGHTEN Gentle Mode va începe să funcționeze cu vibrații de joasă frecvență și lumină LED roșie, EMS pe 2 puncte de masaj și RF pe 2 puncte de masaj și indicator luminos alb.</p> <p>④ BRIGHTEN Modul puternic: Apăsați butonul ON/OFF pentru a comuta modul. Modul BRIGHTEN Strong va începe să funcționeze cu vibrații de înaltă frecvență și lumină LED roșie, EMS pe 2 puncte de masaj și RF pe 2 puncte de masaj și indicatorul portocaliu se aprinde.</p>
2	OFF	Puneți capacul magnetic sau apăsați butonul On/Off timp de 1 secundă în toate modurile, dispozitivul se va opri cu un signal sonor.
3	Baterie descărcată	<p>1. Când dispozitivul funcționează și sursa de alimentare este suficientă, sunt aprinse 3 lumini.</p> <p>2. Când bateria este sub 10%, indicatoarele luminoase vor clipi continuu de la stânga la dreapta.</p> <p>3. Când bateria este descărcată, cele 3 lumini vor clipi de 2 ori și apoi se vor stinge.</p>

4	Încărcare	3 lumini clipec continuu de la stânga la dreapta.
5	Încărcare completă	3 lumini de alimentare sunt aprinse.

Cum se utilizează

Iată un exemplu de procedură (imaginea și textul de mai jos), puteți alege orice mod pe care doriți să îl utilizați în funcție de "Functions"



1. Aplicați cantitatea potrivită de gel pe față și pe gât.



2. Porniți dispozitivul și selectați modul ANTI-AGING sau BRIGHTEN



3. Așezați bilele de masaj pe pielea feței și a gâtului, mișcându-se încet în sus, cu o viteză constantă.



4. La fiecare minut veți auzi un semnal sonor, care vă aminti de schimbarea zonei. Dispozitivul se oprește în 6 minute.

5



5. Ștergeți bilele de masaj și apoi puneți capacul pentru depozitare.

Sfaturi:

- Utilizați funcția de memorie pentru a reseta aparatul la ultimul mod pe care l-ați utilizat.
- Setarea din fabrică este modul ANTI-AGING Gentle Mode

Notă

Contraindicații

- Copiii li se interzice utilizarea dispozitivului.
- Persoanelor cu organe umane electronice li se interzice utilizarea dispozitivului.
- Persoanelor cu umflare a pielii, după o intervenție chirurgicală, arsuri solare sau alte simptome ale pielii le este interzis să folosească dispozitivul.
- Persoanele care au inflamații ale pielii, cum ar fi erupții cutanate, psoriazis, eczeme, erupții cutanate, herpes simplex recurent, cicatrici, leziuni și sensibilitate electromagnetice, femei însărcinate, femei care alăptează, hemofiliile hemoragice caracteristici ale pielii similare dermatitei le este interzisă utilizarea dispozitivului.
- Nu utilizați mult timp în același loc.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați suferit o intervenție chirurgicală pe piele sau o arsură gravă în decurs de o lună.
- Consultați un medic înainte de a utiliza dispozitivul dacă ați suferit o intervenție chirurgicală plastică.
- Nu se recomandă utilizarea dacă aveți proteze dentare metalice.
- Nu folosiți biluța de masaj, lumina LED direct pe globul ocular.
- Ceasurile, ochelarii, genele false sau alte obiecte metalice trebuie îndepărtate înainte de operare.

6

<p>⊘ Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.</p>	<p>⊘ Vă rugăm să nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.</p>
<p>⊘ Nu dezamblați singur acest dispozitiv.</p>	<p>⊘ Dacă dispozitivul este deteriorat sau a căzut, inspectați-l înainte de utilizare.</p>
<p>⊘ Nu îl utilizați dacă dispozitivul sau cablul USB este rupt.</p>	<p>⚠ Țineți dispozitivul departe de temperaturi ridicate</p>

7

Curățarea dispozitivului

După utilizare, ștergeți perla de masaj cu o cârpă moale. Nu scufundați dispozitivul în apă.

Depozitare


Păstrați-l într-un loc uscat și ferit de praf. Protejați-l de lichide corozive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

FAQ

Q	A	Soluția
Nu s-a aprins sau lumina este stinsă.	<ol style="list-style-type: none"> Dispozitivul este descărcat Luminile sunt defecte sau programul deteriorat. 	<ol style="list-style-type: none"> Încărcați dispozitivul timp de 4 ore și încercați din nou. Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare pentru asistență.
Dispozitivul nu funcționează după încărcare	<ol style="list-style-type: none"> Cablul/adaptorul USB nu este conectat corect. Dispozitivul nu este încărcat suficient. Bateria a ajuns la sfârșitul duratei de viață. 	<ol style="list-style-type: none"> Verificați contactul dintre dispozitiv și încărcător (lumina clipește în timpul încărcării). Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare.
Dacă dispozitivul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp (≥ 6 luni), încărcați-l mai întâi complet.		

8

Schema circuitului

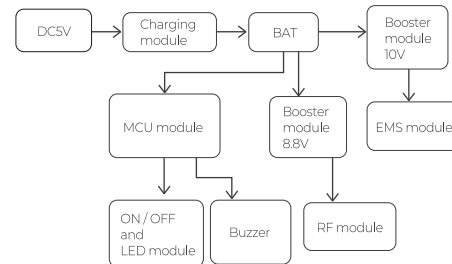

Schema de cablare este NUMAI pentru referință.

Declarație: Conținutul acestui document a fost verificat. Tehnologia produsului sau actualizările software vor fi compilate într-o nouă versiune a manualului. Dacă aspectul, culoarea și performanța se modifică, verificați versiunea curentă.

9