

SEFIROS
your pure beauty.



GuSha5

KOZMETICKÝ PRÍSTROJ NA SPEVNENIE POKOŽKY KRKU A TVÁRE

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte používateľskú príručku

► Obsah



Obsah	1
Technická špecifikácia	2
Popis dielov	2/3
Funkcie	3
Indikácie	4/5
Ako používať	5/6
Bezpečnostné upozornenia	6/7
FAQ	8
Schéma obvodu	9

► Technická špecifikácia

Č.	Položka	Jednotka	Špecifikácia
1	Prevádzkové napätie	V	3,7 V
2	Menovitý výkon	W	5W
3	Prevádzková doba pre každý režim	min	6 minút
4	Typ batérie	/	500 mAh lítiová batéria 3,7 V
5	Vodoodolnosť	/	IPX5
6	Doba nabíjania	H	<4H

► Popis dielov

- ① Magnetický kryt ② 4 Masážne guľôčky ③ Zakrivená masážna hlava
 ④ LED kontrolka ⑤ Kontrolka režimu ANTI-AGING
 ⑥ Svetelný indikátor režimu BRIGHTEN ⑦ Indikátor napájania
 ⑧ Tlačidlo On/Off/Mode ⑨ Port DC nabíjanie
 ⑩ Silikónový kryt
 ⑪ Čistiaca handrička
 ⑫ DC USB kábel
 ⑬ Puzdro
 ⑭ Ihla

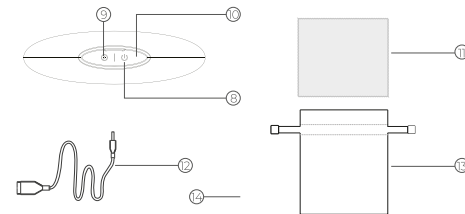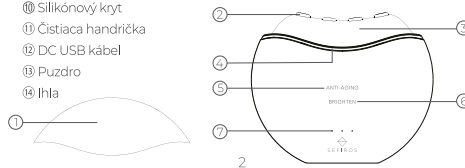

POZNÁMKA: Zariadenie má vstavanú lítiovú batériu napájanú jednosmerným prúdom.

Nabíjajte iba nabíjacím káblom (súčasť balenia).

► Funkcie

GuSha5 RF zariadenie na spevnenie pleti kombinuje RF (Radio Frequency), EMS, červené svetlo LED a multifrekvenčné vibračné technológie so 4 masážnymi guľôčkami a špeciálnou zakrivenou masážnou hlavou.

Unikátny Hallov magnetický spínač. Produkt pôsobí na tvár a krk a zlepšuje mikrocirkuláciu pokožky tým, že hlbkovo posilňuje kolagén, na dosiahnutie efektu stiahnutia svetlých líní, liftingu obrysov a rozjasnenia pleti.

*Jemný/silný režim ANTI-AGING

RF a vysokofrekvenčné vibrácie pomáhajú aktivovať kolagén, zlepšujú krvný obeh a zjemňujú vrásky.

*BRIGHTEN Jemný/silný režim

RF, EMS a červené LED svetlo s vysokofrekvenčnými vibráciami pomáhajú zdvihnúť kontúry tváre a krku a zároveň regenerujú kolagén.

► Indikácie

Č.	položka	Indikácie
1	ON	1. Jemný režim ANTI-AGING: Odoberte magnetický kryt alebo stlačte tlačidlo ON/OFF na 1 s. S pípnutím začne pracovať jemný režim ANTI-AGING s nízkofrekvenčnými vibráciami a RF a rozsvieti sa biela kontrolka. 2. ANTI-AGING Silný režim: Stlačte tlačidlo ON/OFF pre prepnutie režimu. ANTI-AGING Strong Mode začne pracovať s vysokofrekvenčnými vibráciami a RF a rozsvieti sa oranžová kontrolka. 3. BRIGHTEN Jemný režim: Stlačte tlačidlo ON/OFF pre prepnutie režimu. BRIGHTEN Gentle Mode začne pracovať s nízkofrekvenčnými vibráciami a červeným LED svetlom, EMS na 2 masážnych bodoch a RF na 2 masážnych bodoch a rozsvietením bieleho indikátora. 4. BRIGHTEN Silný režim: Stlačte tlačidlo ON/OFF pre prepnutie režimu. BRIGHTEN Strong Mode začne fungovať s vysokofrekvenčnými vibráciami a červeným LED svetlom, EMS na 2 masážnych bodoch a RF na 2 masážnych bodoch a rozsvietením oranžového indikátora.
2	OFF	Nasaďte magnetický kryt alebo stlačte tlačidlo On/OFF na 1s vo všetkých režimoch, zariadenie sa s pípnutím vypne.
3	Slabá batéria	1. Keď zariadenie funguje a napájanie je dostatočné, svietia 3 kontrolky. 2. Keď je batéria nižšia ako 10 %, kontrolky budú nepretržite blikať zľava doprava. 3. Keď je batéria vybitá, 3 kontrolky 2x zablikajú a potom sa vypnú.

SEFIROS
your pure beauty.

Názov: Kozmetický prístroj na spevnenie pokožky krku a tváre

Model No: GuSha5

Rozmery: 90.4 x 86.35x 26.4mm (L x W x H)

Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim,

Czech Republic



4	Nabíjanie	3 kontrolky nepretržite blikajú zľava doprava.
5	Plne nabité	3 kontrolky napájania svietia.

► Ako používať

Nasleduje ukázkový postup (obrázok a text nižšie), môžete si vybrať akýkoľvek režim, ktorý chcete použiť, podľa „funkcií“



1. Naneste správne množstvo gélu na tvár a krk.



2. Zapnite zariadenie a vyberte režim ANTI-AGING alebo BRIGHTEN.



3. Nasadte masážne guľôčky na pokožku tváre a krku, pomaly sa pohybujte nahor konštantnou rýchlosťou.



4. Každú 1 minútu sa ozve pípnutie, ktoré pripomína zmenu oblasti. A zariadenie sa vypne za 6 minút.

5



5. Utrite masážne guľôčky a potom nasadte kryt na uloženie.

Tipy:



1. Pomocou funkcie pamäte zariadenie obnoví režim, ktorý ste použili naposledy.
2. Výrobné nastavenie je ANTI-AGING Gentle Mode

► Upozornenie

Kontraindikácie

1. Deti majú zakázané zariadenie používať.
2. Ľudia s elektronickými ľudskými orgánmi majú zakázané zariadenie používať.
3. Ľudia s opuchmi kože, po operácii, spálení slnkom alebo inými kožnými príznakmi majú zakázané zariadenie používať.
4. Ľudia, ktorí majú zápaly kože, ako sú zapareniny, psoriáza, ekzémy, vyrážka, recidivujúci herpes simplex, zjazvenie, poškodenie a elektromagnetickú citlivosť, tehotné ženy, dojčiacie ženy, hemofíliu, hemoragické ochorenia, kožné charakteristiky dermatitídy, majú zakázané používať.
5. Nepoužívajte po dlhú dobu na rovnakom mieste.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak ste do jedného mesiaca podstúpili operáciu kože alebo ste sa vážne spálili.
7. Pred použitím zariadenia sa poraďte s lekárom, ak ste podstúpili plastickú operáciu.
8. Neodporúča sa používať, pokiaľ máte kovovú zubnú náhradu.
9. Nepoužívajte masážnu guľôčku, LED svetlo priamo na očné bulvy.
10. Hodinky, okuliare, umelé riasy alebo iné kovové predmety musia byť pred prevádzkou odstránené.

6

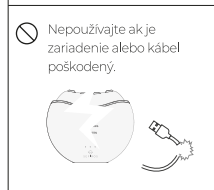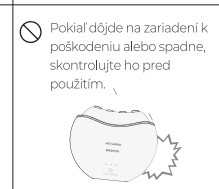

7

Čistenie

Po použití masážnu perličku utrite mäkkou handričkou. Neponárajte zariadenie do vody.

Skladovanie

Uchovávajte ho na suchom a bezprašnom mieste. Chráňte ho pred korozívnou kvapalinou. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

► FAQ

Q	A	Riešenie
Nepodarilo sa zapnúť alebo nesvieti kontrolka.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zariadenie je vybité 2 Svetlá sú rozbité alebo je poškodený program. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nabíjajte zariadenie po dobu 4 hodín a skúste to znova. 2 Ak to stále nefunguje, obráťte sa na tím popredajných služieb so žiadosťou o pomoc.
Po nabití zariadenie nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kábel/adaptér USB nie je správne pripojený. 2 Zariadenie nie je dostatočne nabité. 3 Batéria dosiahla koniec svojej životnosti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Skontrolujte kontakt medzi zariadením a nabíjačkou (kontrolka počas nabíjania bliká). 2 Ak to stále nefunguje, kontaktujte tím popredajných služieb.
Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo (≥ 6 mesiacov), najskôr zariadenie úplne nabite.		

8

► Schéma obvodu

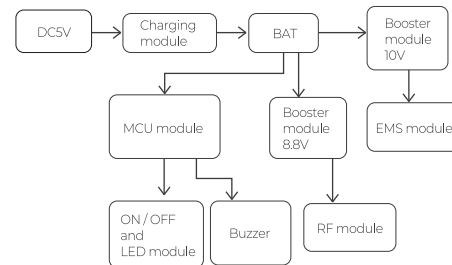


Schéma zapojenia je LEN pre informáciu.

Vyhlasenie: Obsah tohto dokumentu bol overený. Technológie produktu alebo upgrady softvéru budú skompilované do novej verzie manuálu. Pokiaľ sa vzhľad, farba a výkon zmení, pozrite sa na aktuálnu verziu.

9