

## Tartalom


Tartalom .....	1
Műszaki adatok .....	2
Az alkatrészek leírása .....	2/3
Funkciók .....	3
Ajánlás .....	3/4
Hogyan kell használni .....	5/6
Biztonsági figyelmeztetés .....	7/8
FAQ .....	9
Áramköri rajz .....	10

## Műszaki adatok

Sz.	Tétel	Mértékegység	Műszaki adatok
1	Üzemi feszültség	V	DC 3.7V
2	Üzemi áram	mA	EMS Mode: 115-135mA RF Mode: 170-600mA
3	Működési idő minden üzemmóddhoz	Min	4 perc
4	Elemtípus	/	Litium akkumulátor
5	Vízállóság	/	IPX6
6	A foton hullámhossza	nM	Piros fény: 620-630nM Sárga fény: 585-595nM


## Az alkatrészek leírása

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ① Mágneses porálló burkolat | ② Elektródafej                 |
| ③ LED jelzőfény             | ④ Kapcsológomb és üzemmód gomb |
| ⑤ Működésjelző lámpa        | ⑥ Rejtett DC töltőport         |
| ⑦ Tápfeszültségjelzők       | ⑧ Tárolótáska                  |
| ⑨ Tisztító kendő            | ⑩ DC töltőkábel                |

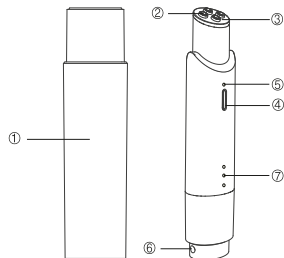

1

2

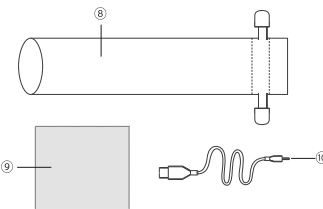

MEGJEGYZÉS: A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, amely egyenárammal működik. Csak a töltőkábellel töltsé (a csomag része).

## Funkciók

Az **EyeSha5** egy RF&EMS fotonterápiás szemkörnyékapóoló készülék, amely integrálja a rádiófrekvenciás (RF) stimulációt, az elektronikus izomstimulációt (EMS) és a foton LED terápiát technológiáit. Segít eltávolítani a finom vonalakat, a szem körüli megereszkedést, halványítani a sötét karikákat és így tovább. A mágneses porálló burkolattal ellátott integrált kialakítás lehetővé teszi, hogy bármikor és bárhol élvezze a kiváló szemkörnyéki ápolást.

## Ajánlás

Sz.	Tétel	Ajánlás
1	Világosító és fiatalító mód	Távolítsa el a mágneses porvédő fedelet nyomja meg röviden a fedelet „Váltógomb”, a készülék egyszer sípol és a visszajelző lámpák kigyulladnak. Piros a fény, az RF, és ezen kívül minden működni kezd, a készülék 4 percen belül automatikusan kikapcsol.

3

2	Revitalizáló kollagén kúrat	Bőrvilágosító & fiatalító módban nyomja meg röviden a „váltó gombot”, a készülék egyszer sípol és a visszajelző lámpák kigyulladnak. A sárga fény és az EMS működésbe lép, és 4 percen belül minden automatikusan kikapcsol.
3	Off	① Kézikönyv: Hosszan nyomja meg "Váltógomb" 1 másodpercig, kapcsolja ki két hangjelzéssel VAGY rögzítse a mágneses fedelet két hangjelzéssel kapcsolja ki. ② Automatikus: Kikapcsolás 4 perc elteltével automatikusan két hangjelzéssel
4	Alacsony akkumulátor	A készülék bekapcsolásakor kétszer sípol. Háromszor sípol és az áramellátás jelzőfényei villognak háromszor, amikor a készülék újra be van kapcsolva.
5	Töltés	A tápellátás jelzőfényei felváltva villognak.
6	Teljesen feltöltve	Minden tápellátás jelzőfény világít.
7	Memória funkció	Visszaállítja a legutóbb használt módot.

## Tipppek

Minden üzemmódban 10 másodpercenként megszólal egy rövid hangjelzés, amely emlékezteti Önt a területváltásra. 2 perc használat után kétszer sípol, emlékeztetve arra, hogy váltson át a másik szemre, és két perc múlva automatikusan kikapcsol. Az egyes módok maximális használati ideje 4 perc, és az időzítő alaphelyzetbe áll, amikor másik üzemmódba vált.

4

## Hogyan kell használni


Világosító és fiatalító mód




1. Tisztítsa meg arcát, majd vigyen fel megfelelő mennyiségű gél a szemkörnyékre.



3. Lassan mozgassa az elektródafejet az alsó szemhéj mentén és körkörös mozdulatokkal a szem körül.

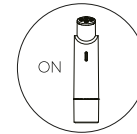

2. Kapcsolja be a Bőrvilágosító & fiatalító módot a vörös fény+RF technológiával.

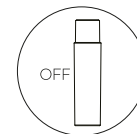

4. A készülék kétszer sípol, hogy emlékeztesse Önt arra, hogy 2 percen belül lépjen át a másik szemkörnyékre, és 4 perc múlva automatikusan kikapcsol.

5


Revitalizáló kollagén kúra




1. Használat előtt tisztítsa meg arcát, majd egyenletesen vigye fel a szemkörnyéki krémeket vagy esszenciákat a szemkörnyékre.



3. Lassan mozgassa az elektródafejet az alsó szemhéj mentén és körkörös mozdulatokkal a szem körül.

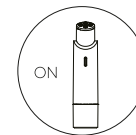

2. Kapcsolja be a Revitalizáló kollagén módot sárga fényrel + EMS technológiával.

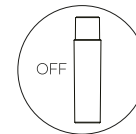

4. A készülék kétszer sípol, hogy emlékeztesse Önt arra, hogy 2 percen belül lépjen át a másik szemkörnyékre, és 4 perc múlva automatikusan kikapcsol.

6

## ► Biztonsági figyelmeztetés

### Figyelmeztetés

- Gyermeknek tilos a készülék használata.
- NE használja a készüléket, ha duzzanat van a bőrön, műtét után, leégési vagy egyéb bőrproblémái vannak.
- Az órákat, szemüvegeket, műszempillákat, kontaktlencsákat és egyéb szilárd tárgyakat használat előtt el kell távolítani.
- Súlyos szemkörnyéki gyulladásban vagy duzzanatban szenvedőknek nem ajánlott.
- Ha a termék sérült, ne használja.
- Ne használja a készüléket közvetlenül a szemgolyón.
- Kerülje a termék megosztását a háztartás többi tagjával.
- Ne használja túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.
- Elektronikus emberi szervekkel rendelkező személyeknek tilos a használata.
- Sérült bőrrel, gennyedéssel, gyulladással, hegekkel és elektromágneses érzékenységgel rendelkezők nem használhatják.
- Ne használja, ha vérbetegsége, tuberkulózisa, zsigeri betegsége, rosszindulatú daganata, magas vérnyomása vagy láza van.
- Ne használja a készüléket, ha terhes, menstruál vagy szoptat.



### Tisztítás

Használat után törölje le a terméket tiszta és puha kendővel.  
Ne merítse a készüléket közvetlenül vízbe.


### Tárolás

Tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen;  
Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől;  
Tartsa távol a készüléket korrozív folyadékoktól.  
Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

## ► FAQ

Q	A	Megoldás
A készülék bekapcsolás után nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 A jelzőfény nem világít (Akkumulátor vagy PCBA hiba)</li> <li>2 Bekapcsolás után villognak a lámpák (alacsony akkumulátor töltöttség).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 1,5 órás töltés után indítsa újra a készüléket.</li> <li>2 Kérjen segítséget a vevőszolgáltatótól.</li> </ol>
Rossz töltés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Hibás USB-kábel</li> <li>2 Hibás USB töltőport</li> <li>3 Hibás akkumulátor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ellenőrizze, hogy a töltőkábel vagy csatlakozó csatlakoztatva van-e, a jelzőfények villognak, ami azt jelenti, hogy "Most töltődik".</li> <li>2 Amennyiben az USB-kábel cseréje után sem működik, forduljon a vevőszolgáltatóhoz.</li> <li>3 Teljesen feltöltött állapotban sem működik, kérje az értékesítés utáni szolgáltatást.</li> </ol>
A készülék működés közben hirtelen leáll.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Alacsony akkumulátor</li> <li>2 Egyéb ismeretlen hibák</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 1,5 órás töltés után indítsa újra a készüléket.</li> <li>2 Kérjen segítséget a vevőszolgáltatótól.</li> </ol>
<p>Értesítés: A készülék két kapcsolóval rendelkezik: ①SWITCH gomb ②Hall effektus érzékelő Mágneses burkolat (Ha a mágneses burkolat nem működik, kérjük, olvassa el az első FAQ- at.) Ha a készüléket hosszabb ideig (≥ 6 hónapig) nem használta, először töltsse fel teljesen.</p>		

## ► Áramköri rajz

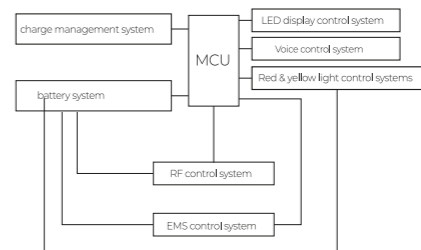

A bekapcsolási rajz CSAK tájékoztató jellegű.



EyeSha5