

## ► Contenuto



Contenuto .....	1
Specifiche tecniche .....	2
Descrizione delle parti .....	2/3
Funzione .....	3
Indicazione .....	3/4
Modo d'uso .....	5/6
Avviso di sicurezza .....	7/8
FAQ .....	9
Schema elettrico .....	10

## ► Specifiche tecniche

N.	Item	Unità	Specifiche
1	Tensione di esercizio	V	DC 3.7V
2	Corrente di funzionamento	mA	Modalità EMS: 115-135mA Modalità RF: 170-600mA
3	Tempo di funzionamento per ciascuna modalità	Min	4 minuti
4	Tipo di batteria	/	Batteria al litio
5	Resistenza all'acqua	/	IPX6
6	La lunghezza d'onda del fotone	nM	Luce rossa: 620-630nM Luce gialla: 585-595nM

## ► Descrizione delle parti

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ① Copertura magnetica antipolvere | ② Testa dell'elettrodo                            |
| ③ Indicatore luminoso a LED       | ④ Pulsante di commutazione e pulsante di modalità |
| ⑤ Spia di funzionamento           | ⑥ Porta di ricarica CC nascosta                   |
| ⑦ Indicatori di alimentazione     | ⑧ Borsa portaoggetti                              |
| ⑨ Panno per la pulizia            | ⑩ Cavo di ricarica DCT                            |

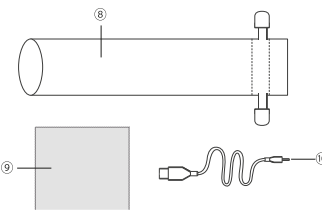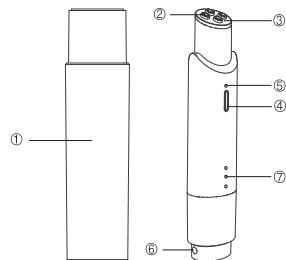

NOTA: Il dispositivo ha una batteria al litio integrata alimentata a corrente continua  
Ricarica solo con il cavo di ricarica (incluso nella confezione).

## ► Funzione

**EyeSha5** è un dispositivo per la cura degli occhi con terapia fotonica RF&EMS che integra le tecnologie di stimolazione a radiofrequenza (RF), stimolazione muscolare elettronica (EMS) e terapia con LED a fotoni. Aiuta a migliorare le linee sottili, il rilassamento intorno agli occhi e schiarire le occhiaie e così via. Il design integrato con copertura magnetica antipolvere ti consente di godere di un'eccellente cura degli occhi sempre e ovunque.

## ► Indicazione

n.	Item	Indicazione
1	Modalità schiarente & ringiovanente	Rimuovere il coperchio antipolvere magnetico coprire o premere brevemente "Pulsante di commutazione", il dispositivo emette un segnale acustico e le spie si accendono. Rosso la luce e RF iniziano a funzionare e tutto si spegne automaticamente dopo 4 minuti.

2	Regime rivitalizzante al collagene	In modalità Brighten & Rejuvenate, premere brevemente il "pulsante di commutazione" il dispositivo emetterà un segnale acustico e le spie si accendono. La luce gialla e l'EMS inizieranno a funzionare e tutto si spegnerà automaticamente in 4 minuti.
3	Off	① Manuale: Premere a lungo "Pulsante di attivazione/disattivazione" per 1 secondo, spegnere con due segnali acustici OPPURE attaccare la copertura magnetica si spegne con due segnali acustici. ② Automaticamente: Spegnimento automaticamente dopo 4 minuti con due segnali acustici
4	Batteria scarica	Quando il dispositivo è acceso, emetterà due segnali acustici. Suona tre volte e le spie di alimentazione lampeggiano tre volte quando il dispositivo è riacceso.
5	Ricarica	Le spie di alimentazione lampeggiano alternativamente.
6	Completamente carico	Tutte le spie di alimentazione sono accese.
7	Funzione memoria	Ripristina la stessa modalità utilizzata l'ultima volta.

### Consigli:


In tutte le modalità, viene emesso un breve segnale acustico ogni 10 secondi per ricordarti di cambiare area. Dopo 2 minuti di lavoro, il cicalino emetterà due segnali acustici per ricordarti di passare all'altro occhio e si spegnerà automaticamente dopo due minuti. Il tempo di utilizzo massimo per ciascuna modalità è di 4 minuti e il timer viene ripristinato quando si passa a un'altra modalità.

## ► Modo d'uso

Modalità schiarente & ringiovanente




1. Detergi il viso e poi applica una quantità adeguata di gel sul contorno occhi.

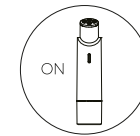

2. Attiva la modalità schiarimento e ringiovanimento con la tecnologia luce rossa Red light+RF.



3. Muovere lentamente la testina dell'elettrodo lungo la palpebra inferiore e con un movimento circolare intorno agli occhi.

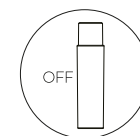


4. Il dispositivo emetterà due segnali acustici per ricordarti di spostarti nell'altra zona degli occhi in 2 minuti e si spegnerà automaticamente in 4 minuti.

Regime rivitalizzante al collagene




1. Prima dell'uso, pulire il viso e poi applicare uniformemente la crema per gli occhi o l'essenza intorno agli occhi.

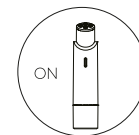

2. Attiva la modalità collagene rivitalizzante con luce gialla + tecnologia EMS.



3. Muovere lentamente la testina dell'elettrodo lungo la palpebra inferiore e con un movimento circolare intorno agli occhi.

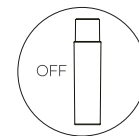

4. Il dispositivo emetterà due segnali acustici per ricordarti di spostarti nell'altra zona degli occhi in 2 minuti e si spegnerà automaticamente in 4 minuti.



SEFIROS  
your pure beauty.

Name: DISPOSITIVO COSMETICO PER IL RASSODAMENTO DELLA PELLE DEL CONTORNO OCCHI

Model: EyeSha5


Importer: VIVANTIS a. s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim, Czech Republic



## ► Avviso di sicurezza

### Avvertimento

- Ai bambini è vietato utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare se si dispone di gonfiore della pelle, interventi chirurgici, scottature solari o altri sintomi della pelle.
- Orologi, occhiali, ciglia finte, lenti a contatto e altri oggetti solidi devono essere rimossi prima dell'uso.
- Non è raccomandato per le persone con grave infiammazione o gonfiore intorno agli occhi.
- Se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo.
- Non utilizzare il dispositivo direttamente sul bulbo oculare.
- Evitare di condividere il prodotto con altri membri della famiglia.
- Non utilizzare sulla stessa area della pelle per troppo tempo.
- Alle persone con organi umani elettronici è vietato utilizzarlo.
- Non deve essere utilizzato da persone con pelle danneggiata, suppurazione, infiammazione, cicatrici e sensibilità elettromagnetica.
- Non usarlo se hai malattie del sangue, tubercolosi, malattie viscerali, tumori maligni, pressione alta o febbre.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di gravidanza, mestruazioni o allattamento.

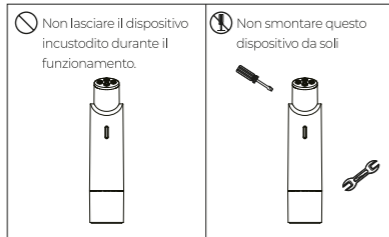

7



### Pulizia

Dopo l'uso, pulire il prodotto con un panno pulito e morbido. Non immergere il dispositivo direttamente in acqua.

### Magazzinaggio

Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere. Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate. Tenere il dispositivo lontano da liquidi corrosivi. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.


8

## ► FAQ

Q	A	Soluzione
Il dispositivo non funziona dopo essere stato acceso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 La spia è spenta (Guasto batteria o PCBA)</li> <li>2 Le luci lampeggiano dopo l'accensione (batteria scarica).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Riavvia il dispositivo dopo averlo caricato per 1,5 ore.</li> <li>2 Richiedi il servizio post-vendita.</li> </ol>
Cattiva ricarica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cavo USB difettoso</li> <li>2 Porta di ricarica USB difettosa</li> <li>3 Batteria difettosa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controlla se il cavo di ricarica o la spina sono collegati, le luci lampeggiano, il che significa "In carica ora".</li> <li>2 Dopo aver sostituito il cavo USB non funziona, contattare il servizio post-vendita.</li> <li>3 Nessuna risposta dopo l'addebito completo, si prega di chiedere il servizio post-vendita</li> </ol>
Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare durante il funzionamento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Batteria scarica</li> <li>2 Altri errori sconosciuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Riavvia il dispositivo dopo averlo caricato per 1,5 ore.</li> <li>2 Richiedi il servizio post-vendita.</li> </ol>
<p>Avviso: Il dispositivo ha due opzioni di commutazione: ① Pulsante SWITCH ② Sensore effetto Hall Copertura magnetica (se la copertura magnetica non funziona, leggere le prime FAQ) Se il dispositivo non è stato utilizzato per molto tempo (≥ 6 mesi), caricare prima completamente il dispositivo.</p>		

9

## ► Schema elettrico

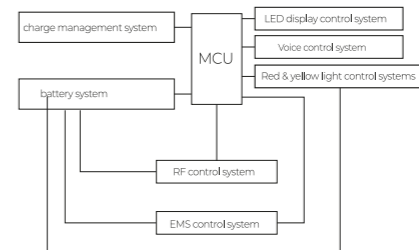

Lo schema elettrico è SOLO per riferimento.

10



SEFIROS  
your pure beauty.



EyeSha5

DISPOSITIVO COSMETICO PER IL RASSODAMENTO DELLA PELLE DEL CONTORNO OCCHI

Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima dell'uso