

## ► Obsah



Obsah .....	1
Technická špecifikácia .....	2
Popis dielov .....	2/3
Funkcie .....	3
Indikácie .....	3/4
Ako používať .....	5/6
Bezpečnostné upozornenia .....	7/8
FAQ .....	9
Schéma obvodu .....	10

## ► Technická špecifikácia

Č.	Položka	Jednotka	Špecifikácia
1	Prevádzkové napätie	V	DC 3.7V
2	Prevádzkový prúd	mA	EMS Mode: 115-135mA RF Mode: 170-600mA
3	Prevádzková doba pre každý režim	Min	4 minúty
4	Typ batérie	/	Litiová batéria
5	Vodoodolnosť	/	IPX6
6	Vlnová dĺžka fotónu	nM	Červené svetlo: 620-630nM Žlté svetlo: 585-595nM

## ► Popis dielov

- |                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ① Magnetický prachotesný kryt  | ② Hlava elektród                        |
| ③ LED kontrolka                | ④ Prepínacie tlačidlo a tlačidlo režimu |
| ⑤ Svetelná kontrolka prevádzky | ⑥ Skrytý DC nabíjací port               |
| ⑦ Kontrolky napájania          | ⑧ Skladovacia taška                     |
| ⑨ Čistiaca handrička           | ⑩ DC nabíjací kábel                     |

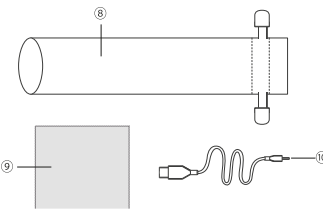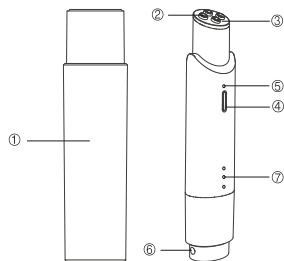

POZNÁMKA: Zariadenie má vstavanú litiovú batériu napájanú jednosmerným prúdom. Nabíjajte iba nabíjacím káblom (súčasť balenia).

## ► Funkcie

**EyeSha5** je zariadenie na starostlivosť o očné okolie s RF&EMS fotónovou terapiou, ktorá integruje technológie rádiofrekvenčnej stimulácie (RF), elektronickej svalovej stimulácie (EMS) a fotónovú LED terapiu. Pomáha zlepšiť jemné linky, ochabnutosť očného okolia a zosvetliť tmavé kruhy a tak ďalej. Integrovaný dizajn s magnetickým prachotesným krytom umožňuje užít si vynikajúcu starostlivosť o oči kedykoľvek a kdekoľvek.

## ► Indikácie

Č.	Položka	Indikácie
1	Režim Rozjasnenie & Omladenie	Odstráňte magnetický prachotesný kryt alebo krátko stlačte „prepínacie tlačidlo“, zariadenie pípne raz a kontrolky sa rozsvietia. Červené svetlo a RF začnú fungovať a všetko sa automaticky vypne za 4 minúty.

2	Revitalizačný kolagénový režim	V režime Rozjasnenie & Omladenie krátko stlačte „prepínacie tlačidlo“, zariadenie pípne raz a kontrolky sa rozsvietia. Žlté svetlo a EMS začnú fungovať a všetko sa automaticky vypne za 4 minúty.
3	Off	① Ručné: Dlhú stlačte „prepínacie tlačidlo“ na 1 sekundu, vypnete dvoma pípnutiami ALEBO nasadíte magnetický kryt vypnúť dvoma pípnutiami. ② Automaticky: Vypnutie automaticky po 4 minútach dvoma pípnutiami.
4	Slabá batéria	Keď je zariadenie zapnuté, dvakrát pípne. Pípne trikrát a kontrolky napájania blikajú trikrát, keď je zariadenie znovu zapnuté.
5	Nabíjanie	Kontrolky napájania striedavo blikajú.
6	Plne nabité	Všetky kontrolky napájania svietia.
7	Funkcia pamäte	Obnoví rovnaký režim ako naposledy použitý.

## Tipy:


Vo všetkých režimoch sa každých 10 sekúnd ozve krátky bzučiak, ktorý vám pripomenie, že máte zmeniť oblasť. Po 2 minútach práce bzučiak dvakrát pípne, aby vám pripomenul, že máte prejsť na druhé oko, a po dvoch minútach sa automaticky vypne. Maximálna doba použitia pre každý režim sú 4 minúty a časovač sa obnoví po prepnutí do iného režimu.

## ► Ako používať

### Režim Rozjasnenie & Omladenie




1. Očistite si tvár a potom naneste primerané množstvo gélu na očné okolie.

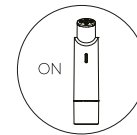

2. Zapnite režim Rozjasnenie & Omladenie s technológiou Red light+RF.



3. Pomaly pohybujte hlavou elektród pozdĺž spodného viečka a krúživým pohybom okolo očí.

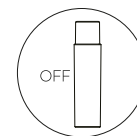


4. Zariadenie dvakrát pípne, aby vám pripomenulo, že sa máte presunúť na oblasť druhého oka za 2 minúty, a automaticky sa vypne za 4 minúty.

### Revitalizačný kolagénový režim




1. Pred použitím si očistite tvár a potom rovnomerne naneste očný krém alebo esenciu okolo očí.

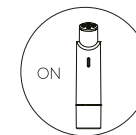

2. Zapnite režim Revitalizačný kolagénový režim s technológiou žltého svetla + EMS.



3. Pomaly pohybujte hlavou elektród pozdĺž spodného viečka a krúživým pohybom okolo očí.

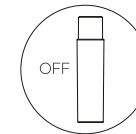


4. Zariadenie dvakrát pípne, aby vám pripomenulo, že sa máte presunúť na oblasť druhého oka za 2 minúty, a automaticky sa vypne za 4 minúty.

## ► Bezpečnostné upozornenie

### Varovanie

- Deti majú zakázané zariadenie používať.
- Nepoužívajte ho, ak máte opuch kože, operáciu, spálenie slnkom alebo iné kožné príznaky.
- Hodinky, okuliare, umelé riasy, kontaktné šošovky a ďalšie pevné predmety musia byť pred použitím odstránené.
- Pre osoby so závažným zápalom alebo opuchy okolo očí sa neodporúča používať.
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
- Nepoužívajte zariadenie priamo na očné buľvu.
- Vyhnite sa zdieľaniu produktu s ďalšími členmi domácnosti.
- Nepoužívajte na rovnakú oblasť kože príliš dlho.
- Ľudia s elektronickými ľudskými orgánmi ho majú zakázané používať.
- Nemali by ho používať ľudia s poškodenou kožou, hnisaním, zápalmi, jazvami a elektromagnetickou citlivosťou.
- Nepoužívajte ho, ak máte ochorenie krvi, tuberkulózu, viscerálne ochorenie, zhubné nádory, vysoký krvný tlak alebo horúčku.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste tehotná, v období menštruácie alebo v období dojčenia.

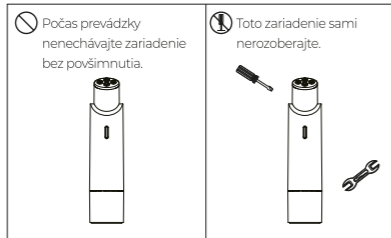

7



### Čistenie

Po použití produkt utrite čistou a mäkkou handričkou.  
Neponárajte zariadenie priamo do vody.

### Skladovanie

Uchovávajte zariadenie na suchom a bezprašnom mieste.  
Udržujte zariadenie mimo dosahu vysokých teplôt.  
Udržujte zariadenie mimo dosahu žieravých kvapalín.  
Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.

8

## ► FAQ

Q	A	Riešenie
Zariadenie po zapnutí nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontrolka nesvieti (porucha batérie alebo PCBA)</li> <li>2 Svetlá po zapnutí blikajú (slabá batéria).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Reštartujte zariadenie po nabití 1,5 hodiny.</li> <li>2 Požiadajte o popredajný servis.</li> </ol>
Zlé t nabíjanie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Chybný kábel USB</li> <li>2 Chybný nabíjací port USB</li> <li>3 Chybná batéria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Skontrolujte, či je pripojený nabíjací kábel alebo zástrčka, kontrolky blikajú, čo znamená „Teraz sa nabíja“.</li> <li>2 Po výmene kábla USB nefunguje, obráťte sa na popredajný servis.</li> <li>3 Žiadna odozva po úplnom nabití, požiadajte o popredajný servis</li> </ol>
Zariadenie počas prevádzky náhle prestane fungovať.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Slabá batéria</li> <li>2 Iné neznáme chyby</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Reštartujte zariadenie po nabití po dobu 1,5 hodiny.</li> <li>2 Požiadajte o popredajný servis.</li> </ol>
<p>Upozornenie: Zariadenie má dve možnosti prepínača: ① Tlačidlo SWITCH ② Snímač Hallovho efektu Magnetický kryt (Ak magnetický kryt nefunguje, prečítajte si prvú FAQ) Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo (≥ 6 mesiacov), najskôr zariadenie úplne nabite.</p>		

9

## ► Schéma obvodu

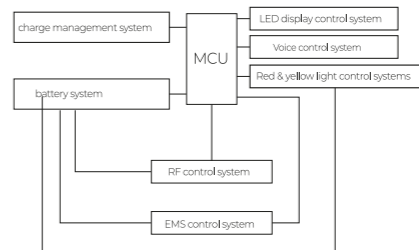


Schéma zapojenia je LEN pre informáciu.

10



EyeSha5

KOZMETICKÝ PRÍSTROJ NA SPEVNIENIE POKOŽKY OČÍ

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte používateľskú príručku.