

NÁVOD K OBSLUZE

Galvanická žehlička
BeautyRelax BR-2040

VIBRASKIN PREMIUM



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
SPECIFIKACE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
GALVANICKÝ PROUD	6
VIBRACE	6
ČERVENÉ SVĚTLO	6
MODRÉ SVĚTLO	6
FIALOVÉ SVĚTLO	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	9
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	10
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	12
NABÍJENÍ BATERIE	13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Galvanická žehlička BeautyRelax Vibraskin Premium je moderní kosmetický přístroj, který kombinuje aktuálně nejpoužívanější technologie ošetření pleti. Napůl galvanická žehlička a napůl silikonový kartáček. Určeno pro hloubkové čištění pleti a zapracování kosmetických přípravků pomocí galvanického proudu. Vaši pleť budou hýčkat Galvanický proud, vibrace, červené a modré fotonové světlo. Luxusní hodnotné provedení. Stylové bezdrátové nabíjení přes kontaktní podložku.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Jakmile dokončíte nabíjení přístroje, vytáhněte napájecí kabel z přístroje.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Galvanická žehlička BeautyRelax BR-2040 VIBRASKIN PREMIUM
- Panel pro bezdrátové nabíjení.
- Nabíjecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



SPECIFIKACE

- Galvanický proud pro zpracování kosmetických krémů a sér
- Využití obou stran aplikační hlavice se specifickými účinky
- Kartáčková strana pro hloubkové čištění kožních pórů
- Skvělé pro zaměření na T-zónu obličeje
- Redukuje mastnotu pleti
- Odumřelá kožní rezidua jsou s vysokou účinností odstraněna
- Pletť je hladká a svěží
- Ideální použití při sprchování nebo koupeli
- Určeno pro rutinní každodenní péči

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence oscilací: až 8000 kmitů za minutu
- Materiál: zdravotně nezávadný silikon
- Aplikační hlavice: nerez ocel
- Vodotěsný ochranný standard: IPX7
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 300mAh
- Nabíjení: kontaktně přes nabíjecí podložku (USB kabel součástí balení)
- Hmotnost: 99g
- Rozměry: 6,3x11x2,7cm

GALVANICKÝ PROUD

Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Záporně nabitá aplikační kovová hlavice představuje při ošetření pleti absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!

VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti. Vysokofrekvenční vibrace v kombinaci se silikonovým kartáčkem přispívají k vysoce intenzivnímu hloubkovému čištění pleti.

ČERVENÉ SVĚTLO

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Příznivý vliv na elastická vlákna
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu

MODRÉ SVĚTLO

- Aktivuje porphyryny
- Chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek
- Prevence proti tvorbě akné
- Bezpečné a efektivní ošetření

FIALOVÉ SVĚTLO


- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti

POPIS PŘÍSTROJE



1. Kartáček s jemnými štětinkami
2. Kontaktní plocha pro nabíjení
3. Tlačítko (-)
4. Tlačítko (+)
5. Tlačítko **ON/OFF**

POPIS PŘÍSTROJE

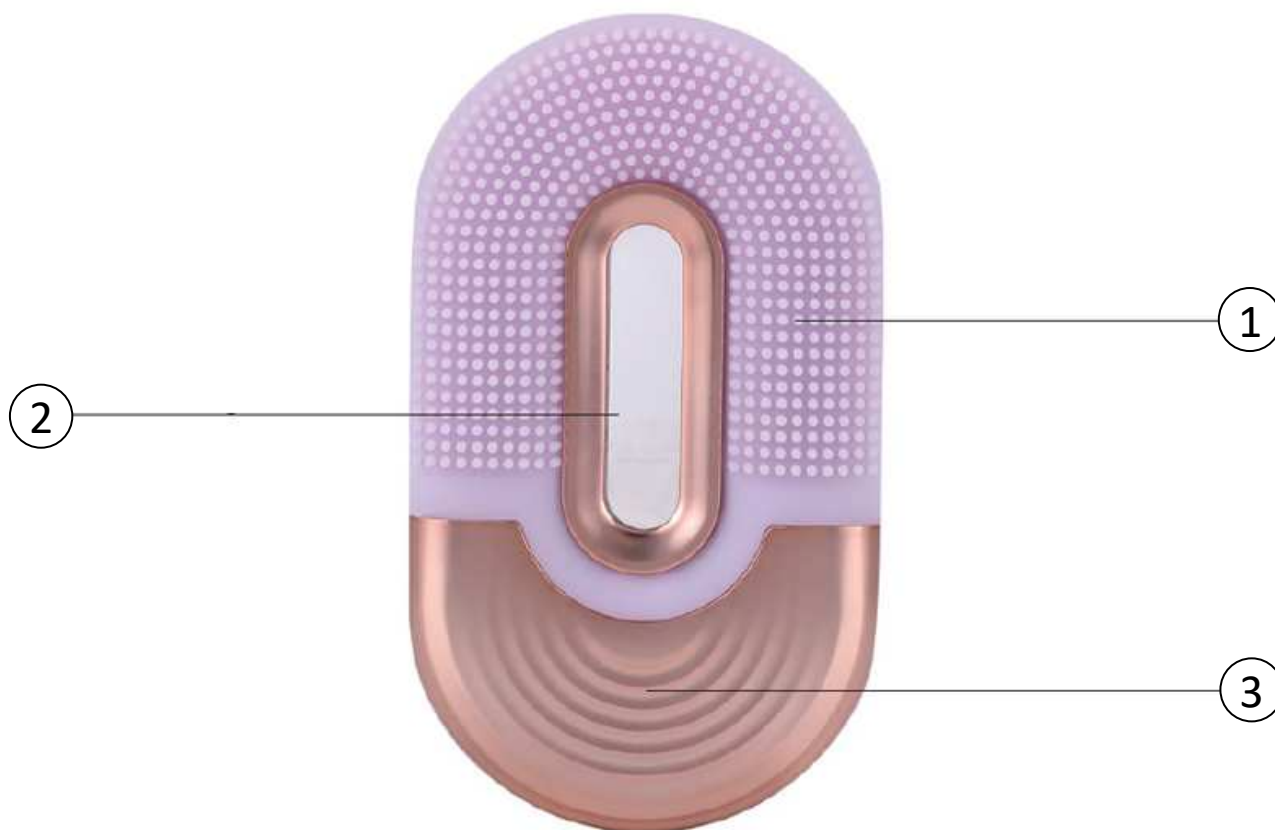

1. Kartáček s většími štětinkami
2. Fotonové LED světlo
3. Kovová aplikační hlavice

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Přístroj aktivuje **PROGRAM 1**.
Pracují následující technologie: **vibrace** (nízká rychlost), **modré světlo** a **galvanický proud**.
2. Krátkým stiskem tlačítka **(+)** aktivujete **PROGRAM 2**.
Pracují následující technologie: **vibrace** (střední rychlost), **fialové světlo** a **galvanický proud**.
3. Krátkým stiskem tlačítka **(+)** aktivujete **PROGRAM 3**:
Pracují následující technologie: **vibrace** (vysoká rychlost), **červené světlo** a **galvanický proud**.
4. Pomocí krátkého stisku tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete vzájemně měnit jednotlivé programy **PROGRAM 1 - PROGRAM 2 - PROGRAM 3**.
5. Stiskem tlačítka **ON/OFF** (v délce 2 sekund) aktivujete **PROGRAM 4**.
Pracuje následující technologie: **modré světlo**.
6. Krátkým stiskem tlačítka **(+)** aktivujete **PROGRAM 5**.
Pracují následující technologie: **fialové světlo**.
7. Krátkým stiskem tlačítka **(+)** aktivujete **PROGRAM 6**.
Pracují následující technologie: **červené světlo**.
8. Stiskem tlačítka **ON/OFF** (v délce 2 sekund) se znovu vrátíte k **PROGRAMU 1**.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem (v délce 3 sekund) tlačítka **ON/OFF**.
10. Přístrojem se pohybujte po pleti dle pasáže v tomto návodu:
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU.
11. V případě potřeby nabíjejte baterii dle pasáže v tomto návodu:
NABÍJENÍ BATERIE.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Optimální délka ošetření pleti by se měla pohybovat v rozsahu od 10 do 15 minut. Přístroj můžete používat každý den.
2. Jednotlivé programy můžete vzájemně kombinovat. Během jednoho ošetření pleti nemusíte použít všechny programy.
3. Doporučené použití je pleť nejprve hloubkově vyčistit pomocí silikonového kartáčku. Pleť osušit, nanést vyživující krém nebo sérum a pomocí kovového aplikátoru zpracovat. Poté nechte přípravek přirozeně vstřebat do pleti.
4. V průběhu čištění pleti se nebojte na pleť přitlačit. Kartáček ze silikonu vaši pleť žádným způsobem neporaní.
5. Pro čištění pleti používejte obě strany silikonového kartáčku. Nejprve můžete začít stranou s většími štětinkami a pokračovat se stranou s jemnými štětinkami. Při čištění pleti je ideální použít jakýkoliv typ tekutého mýdla nebo kosmetického přípravku pro čištění pleti. Nečistoty z pleti se na tekutinu nebo roztok lépe navážou.
6. Přístroj je vodotěsný. Jeho použití je ideální například při sprchování. Teplá voda otevře kožní póry. Čištění pleti je v kombinaci s vysokofrekvenčními vibracemi a silikonovým kartáčkem optimální kombinace.
7. Používejte přístroj každý den jako rutinní péči o pleť. Kombinujte s jakýmkoliv kosmetickými přípravky, které běžně používáte. Pouze pravidelným používáním je možné dosáhnout viditelné zlepšení stavu vaší pleti.
8. Při zpracování kosmetického přípravku doporučujeme použít takový program, aby zahrnoval funkci galvanického proudu a vibrace. Tato kombinace napomůže lépe zpracovat výživové látky z kosmetických přípravků hlouběji do pokožky.
9. Působení záporně nabitě kovové aplikační hlavice vše pokožka pocitovými vjemy nerozpozná. Lidská pokožka není pro vnímání záporné ionizace dostatečně citlivá. V kombinaci s vibracemi můžete na pleti cítit mechanické pulzování povrchu přístroje. Při používání přístroje se snažte, aby byl kovový aplikátor co nejvíce v kontaktu s pletí. Pro zpracování kosmetického přípravku využijte především části s vlnkovitými záhyby na povrchu aplikátoru.

- 10.** Výkon fotonového LED světla je speciálně upraven tak, aby nepoškodil během používání váš zrak. Během používání přístroje můžete mít otevřené oči. Přesto bychom doporučovali vyhnout se dlouhému přímému pohledu do zdroje světla. Zbytečně tím oči zatížíte a unavíte.
- 11.** Přístroj je vhodný pro všechny typy pleti. Pro jeho používání nejsou téměř žádná omezení. Zvýšenou pozornost věnujte pouze v případě, pokud se na povrchu vaší pleti nachází případné kožní útvary, které by mohly být v průběhu používání přístroje mechanicky poraněny (kožní výrůstky, bradavice, velká mateřská znaménka apod.).



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknózní

Použití přístroje je vhodné pro všechny typy pleti

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

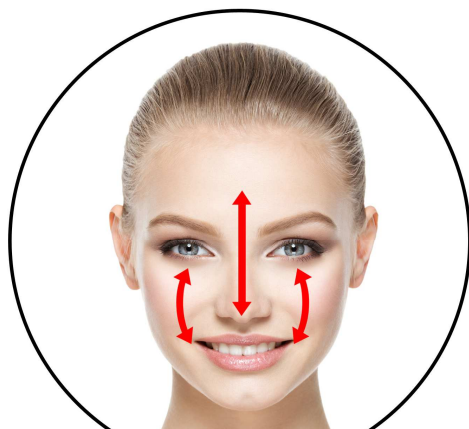

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile přístroj přestane pracovat, baterii nabijte.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně panel pro bezdrátové nabíjení a USB kabel, který je součástí balení.
2. Kabel připojte k panelu pro bezdrátové nabíjení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Přístroj položte na nabíjecí panel. Na boční straně přístroje se nachází symbol nabíjení. Tento symbol musí být umístěn v kruhu nabíjecího panelu.
4. Průběh nabíjení signalizuje pulzující světelná signalizace.
5. Jakmile je baterie plně nabitá, světelná pulzní signalizace ustane.
6. Proces nabíjení baterie může trvat v rozsahu 1 až 3 hodiny v závislosti na kondici baterie.
7. V průběhu nabíjení se přístroj a nabíjecí podložka mírně zahřejí. Jedná se o běžný průvodní jev bezdrátového nabíjení.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Došlo by k trvalému poškození přístroje a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.



Umístění přístroje na nabíjecí panel. Na boční straně přístroje se nachází symbol nabíjení. Tento symbol musí být umístěn v kruhu nabíjecího panelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl kovový aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. V žádném případě nepoužívejte při údržbě kovového aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160