

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj  
**BeautyRelax BR-2160**

**POREMAX ICAM PREMIUM**





## **OBSAH:**

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	7
PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK	8
PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	11
ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ	11
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	11
VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ	12
INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ	13
VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3	14
PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS	15
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	22
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	23
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI	24
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	25
NABÍJENÍ BATERIE	26
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	26
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	27
CERTIFIKACE	27
DOVOZCE	27

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoli nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovějte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **UPOZORNĚNÍ**

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovějte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## HLAVNÍ VÝHODY

- Vytahuje černé tečky a nečistoty z kožních pórů
- Napomáhá zbavit pleti mastnoty
- Stimuluje kolagenní a elastická vlákna
- Zlepšuje prokrvení pleti
- Pleť je svěží, hladší a přirozeně zářivější
- Zvětšení obrazu pleti poskytuje cenné informace pro důkladnou diagnostiku jejího stavu

## SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Nejvýkonnější přístroj pro čištění kožních pórů na trhu
- Zabudovaná kamera 5 Mpx s optickým zoomem
- 20násobné zvětšení
- Nasvícení pleti pomocí 6 LED diod se zvýšenou svítivostí
- Přenos obrazu pomocí WiFi do vašeho telefonu nebo tabletu
- Možnost nastavení 3 úrovní výkonu vakuového nasávání
- 6 vyměnitelných aplikátorů s různými tvary koncovky
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné
- Šetrný k pokožce
- Vhodný pro všechny typy pleti
- Snadné ovládání pomocí tlačítek na těle přístroje
- Kompaktní, malý a lehký
- Bezdrátové používání díky nabíjecí baterii

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- 3 úrovně výkonu vakuového nasávání
- 6 vyměnitelných aplikátorů s různými tvary koncovky
- 5 Mpx kamera s 20násobným optickým zoomem
- Přenos obrazu do telefonu nebo tabletu pomocí WiFi
- Požadavky na aplikaci pro zobrazení zvětšeného obrazu: Android 4.4, IOS 9.0, Windows vista/7/8/10, Mac OS X10.8 a vyšší
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Kapacita baterie: 1800mAh
- Rozměry: 19x4x4cm
- Hmotnost: 490g


## **OBSAH BALENÍ**

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2160 POREMAX ICAM PREMIUM
- 6 vyměnitelných aplikátorů
- Napájecí USB kabel
- Návod k obsluze

## PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax iCam Premium představuje naprosto inovativní přístup ošetření pleti. Čištění pleti je povyšeno na skutečně profesionální úroveň. Nejsilnější stránka přístroje spočívá v nekompromisním výkonu vakuového sání v kombinaci s pokročilou technologií kamery LEICA. Vysoké rozlišení, 20násobné zvětšení při nasvícení 6 LED diod se zvýšenou svítivostí poskytne reálný stav vaši pleti se zobrazením na vašem mobilním telefonu nebo tabletu.


## SYSTÉM VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ

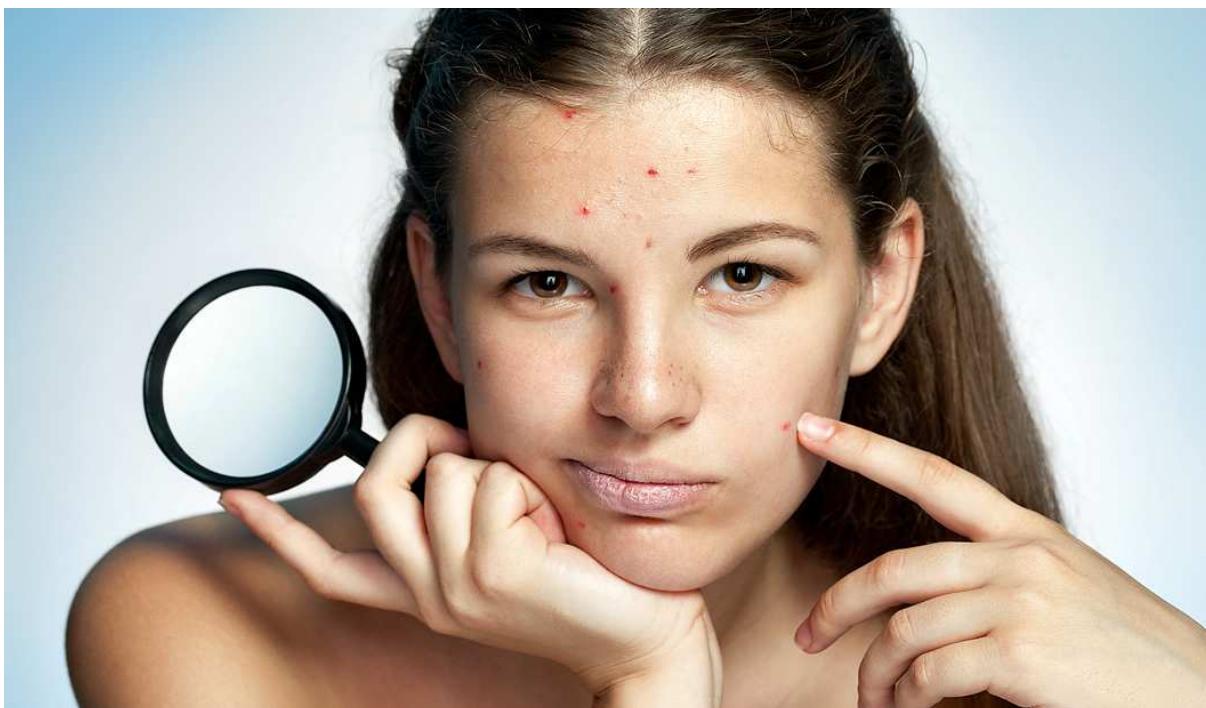

Naše pleť je každý den vystavena celé řadě faktorů, které mají negativní vliv (prach, smog, bakterie, zbylé částečky make-upu, vlhkost). Tvorba mazu v kombinaci s nečistotami a odumřelými kožními buňkami ucpe kožní pór a projeví se vznikem **černých teček** nebo **pupínek s bílými "čepičkami"**. Ideální prostředí pro vznik bakterií a následného zánětu. Hlavním předpokladem pro krásnou a zdravou pleť je pravidelná péče.


Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax ICAM Premium pleť důkladně vycistí. V případě vzniku černých teček a pupínek napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, **černé tečky a nevzhledné bílé čepičky**.

Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Kosmetický přístroj BeautyRelax Poremax ICAM Premium je vysoko účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

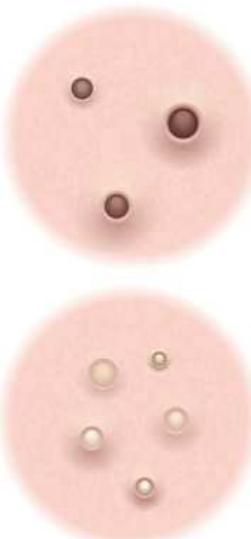


## **PROBLEMATIKA TVORBY ČERNÝCH TEČEK**

Jednou z hlavních příčin vzniku černých teček je ucpání kožních pórů mazem nebo odumřelou pokožkou. Černá barva hlavičky ucpaného póru není nečistota. Jde o výsledek oxidace po vystavení mazu a odumřelých kožních buněk okolnímu prostředí. Kosmetický přístroj s vakuovým sáním patří mezi nejúčinnější metodu odstranění černých teček při co nejmenším podráždění pleti.

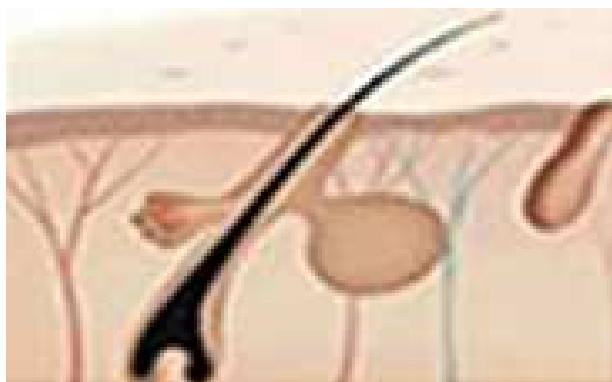


Mastnota z mazových žláz je uvolněna podél vlasových folikulů.

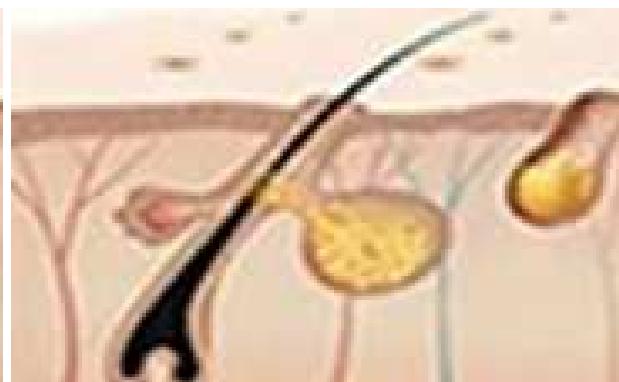

Mazové žlázy uvolňují větší či menší množství mastnoty dle různých faktorů.




Mastnota zbělá.

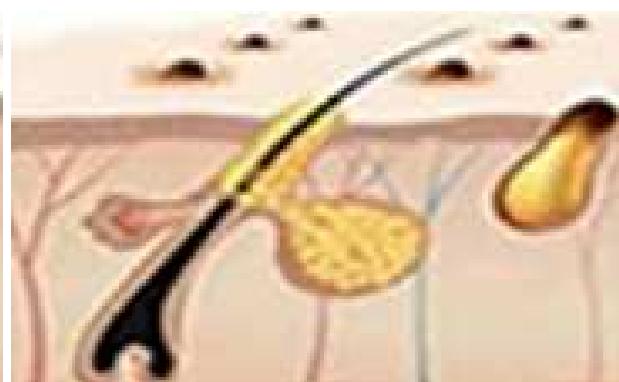

Mastnota je exponována a oxiduje ve vzduchu při vzniku velkého množství černých teček.

## **PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ**

Naše pleť je vystavena celou řadu vnějších faktorů, které různou měrou ovlivňují kvalitu a rychlosť stárnutí naší pleti. Slunce, prach, málo spánku, nesprávná životospráva, nedostatečné pravidelné vycišťení pleti od makeupu.

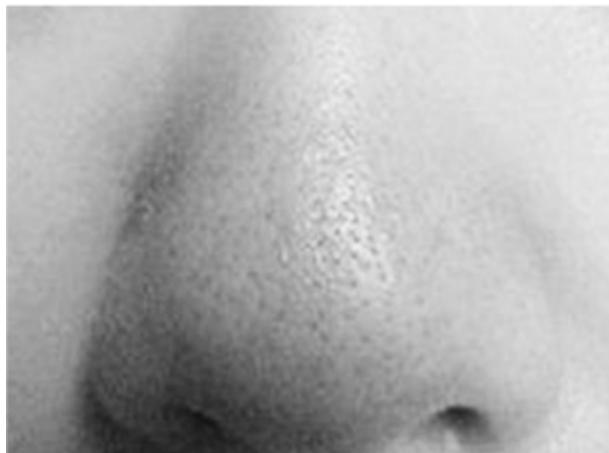

Zvětšené póry, zvýšený výskyt černých teček,  
neefektivní péče o pleť



Zvýšený výskyt bakterií, zvýšená citlivost  
pleti, větší náchylnost k tvorbě akné




Zvýšená produkce mazu, mastná pleť, která  
se velmi špatně čistí



Ucpané póry nečistotami ze zbytků  
make-upu se sníženým účinkem čištění pleti

## **POPIS PŘÍSTROJE**

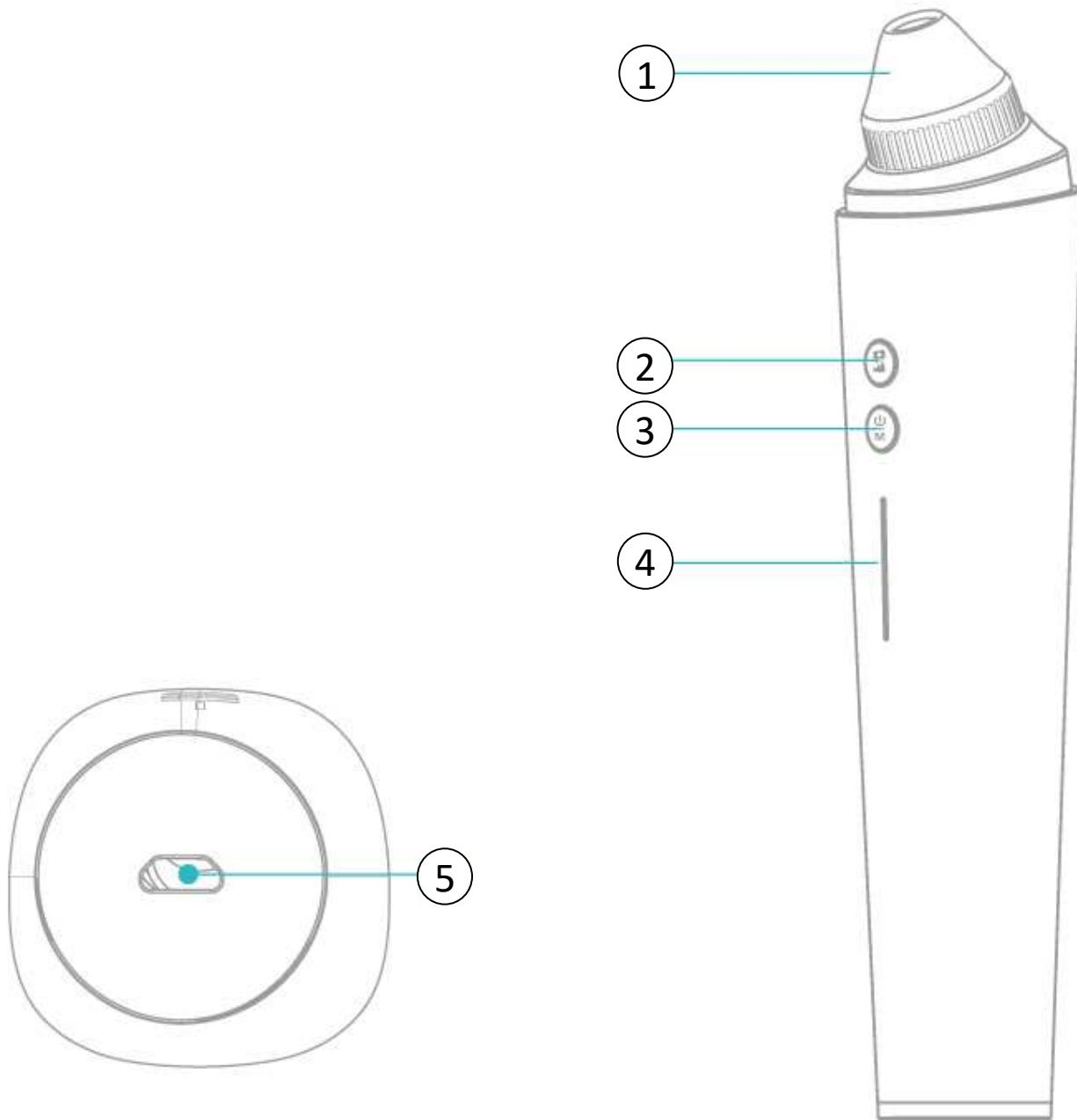

- 1. Aplikační hlavice
- 2. Tlačítko fotoaparát/kamera
- 3. Tlačítko ON/OFF
- 4. Světelná signalizace
- 5. Vstup pro napájecí USB kabel

## **NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT**

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Výčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití vakuového sání nebude pokožka negativně reagovat.

## **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Přístroj nepoužívejte na silně zjizvenou pokožku.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte ekzémy nebo jiným kožním onemocněním.
- Pokud máte citlivou pleť, používejte přístroj se zvýšenou opatrností.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření může být pokožka mírně začervenalá. Jedná se o dočasný efekt, který by měl zmizet během několika desítek minut.
- Po ošetření je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém. Ujistěte se, že používáte krém proti slunci, než vyjdete ven (v případě silného slunečního svitu).
- Po ošetření obličeje můžete po zklidnění pleti téměř ihned aplikovat make-up podle potřeby.

## **ROZLOŽENÍ VÝKONU VAKUOVÉHO SÁNÍ**

Sílu vakuového sání si můžete nastavit individuálně podle vaší potřeby. V případě, že máte velmi citlivou pleť a znečištění není výrazné, použijte nižší výkon. Pokud je vaše pleť odolná a silně znečištěná, využijte vyššího výkonu. Pravidelným používáním si nastavení výkonu velmi rychle osvojíte. Vždy se snažte zvolit vhodný kompromis výkonu, aby bylo ošetření účinné, ale zároveň pro vás komfortní. Počítejte s tím, že při vyšším výkonu bude pleť více podrážděná a zarudlá. Bude tak potřebovat delší čas na rekovalessenci.

## **POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ**

Každý máme jinou velikost obličeje, tvar a jinak citlivou pleť. Rozdíly jsou také v aktuální kondici pleti. Každý z nás je originál. Součástí balení je 6 různých aplikátorů, aby bylo použití kosmetického přístroje co nejvíce univerzální. Instrukce k jednotlivým aplikátorům jsou pouze obecné. V praxi si můžete sami vyzkoušet, která kombinace aplikátorů je pro vás nevhodnější. Může se stát, že z dlouhodobého časového horizontu některé vůbec nevyužijete.


Aplikátory jsou zakončeny otvorem různého průměru. Čím je otvor menší, tím prochází podtlak menším prostorem. V praxi to znamená, že menší otvor koncentruje na menší ploše větší tah podtlaku. Výkon vakuového sání si tak můžete upravit nejen pomocí tlačítka na přístroji, ale také vhodnou volbou aplikátoru. Aplikátory s různým průměrem otvoru používejte na vytahování černých teček, podporu lokálního krevního oběhu obličeje nebo masážní lifting jemných mimických vrásek.

## VÝZNAM VYMĚNITELNÝCH APLIKÁTORŮ



### **Aplikátor s malým otvorem**

Přes malý otvor se koncentruje zvýšená úroveň podtlaku. Ideální pro použití na místech, kde jsou kožní póry více ucpané a hůře odstranitelné.

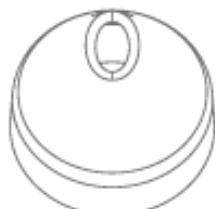

### **Aplikátor s oválným otvorem**

Určeno pro velmi malé oblasti ošetření s větším počtem záhybů. Ideální pro hloubkové čištění citlivé pleti nebo částí obličeje s výskytem černých teček.



### **Aplikátor s eliptickým otvorem**

Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé pro eliminaci jemných mimických vrásek.



### **Aplikátor se zaobleným otvorem**

Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé jemnou mechanickou mikromasáž obličeje.



### **Aplikátor se středním otvorem**


Optimální pro rty, nos a zejména záhyby nosu. Lze použít na čištění pleti. Skvělé pro eliminaci jemných mimických vrásek.



### **Aplikátor s velkým průměrem kruhové koncovky**

Vhodné pro čelo nebo nos. Ideální pro použití na vytažení černých teček. Můžete použít na ošetření obličeje nebo dekoltu.

## INTENZIVNÍ A VYSOCE ŠETRNÉ NASÁVÁNÍ

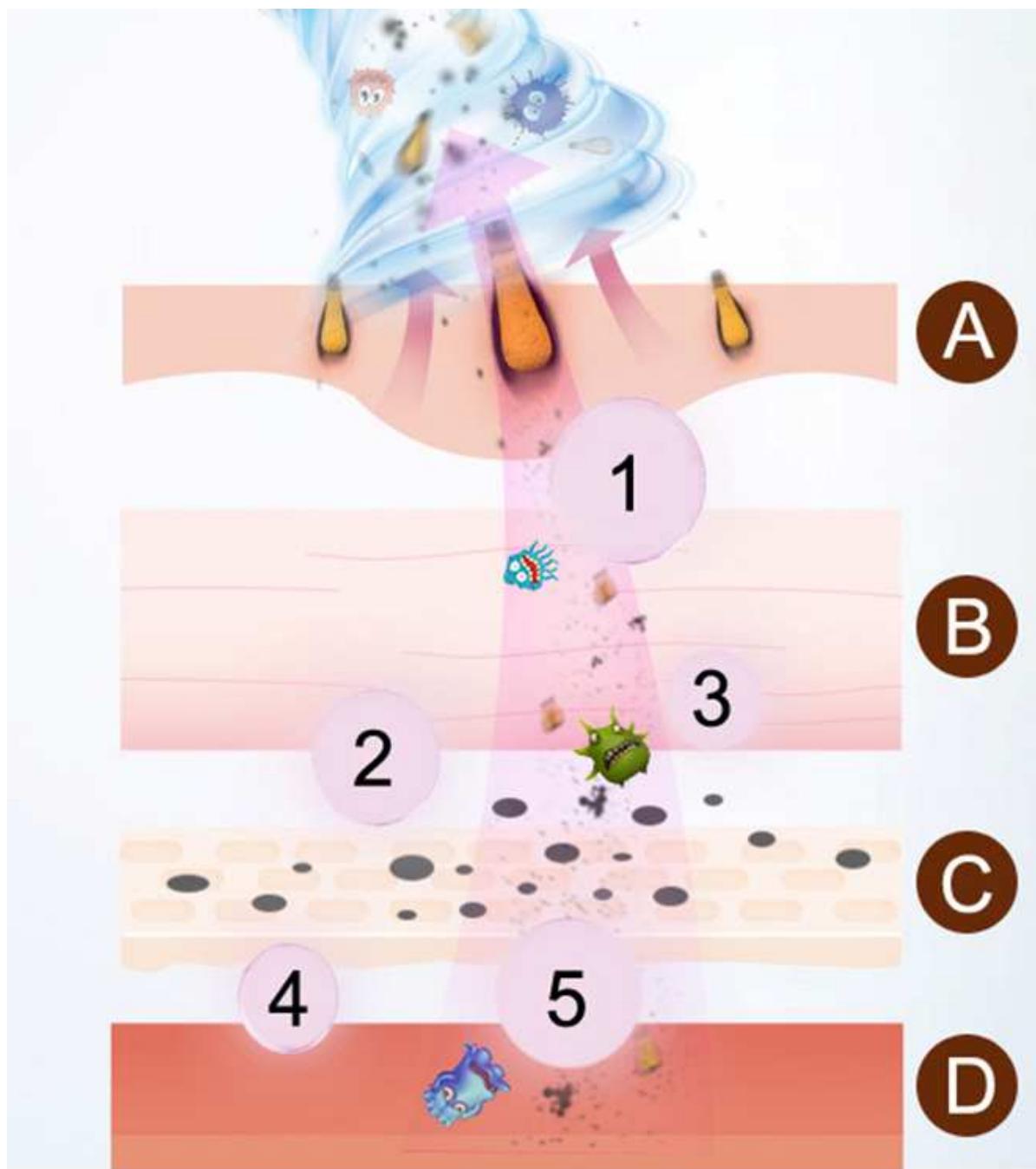

**(1) černé tečky**

**(A) povrch pokožky**

**(2) odumřelá kožní rezidua**

**(B) zdrohovatělá vrstva**

**(3) zbytky make-upu**


**(C) bazální vrstva**

**(4) mastnota**

**(D) dermis vrstva**

**(5) bakterie**

## VAKUOVÉ SÁNÍ 1-2-3

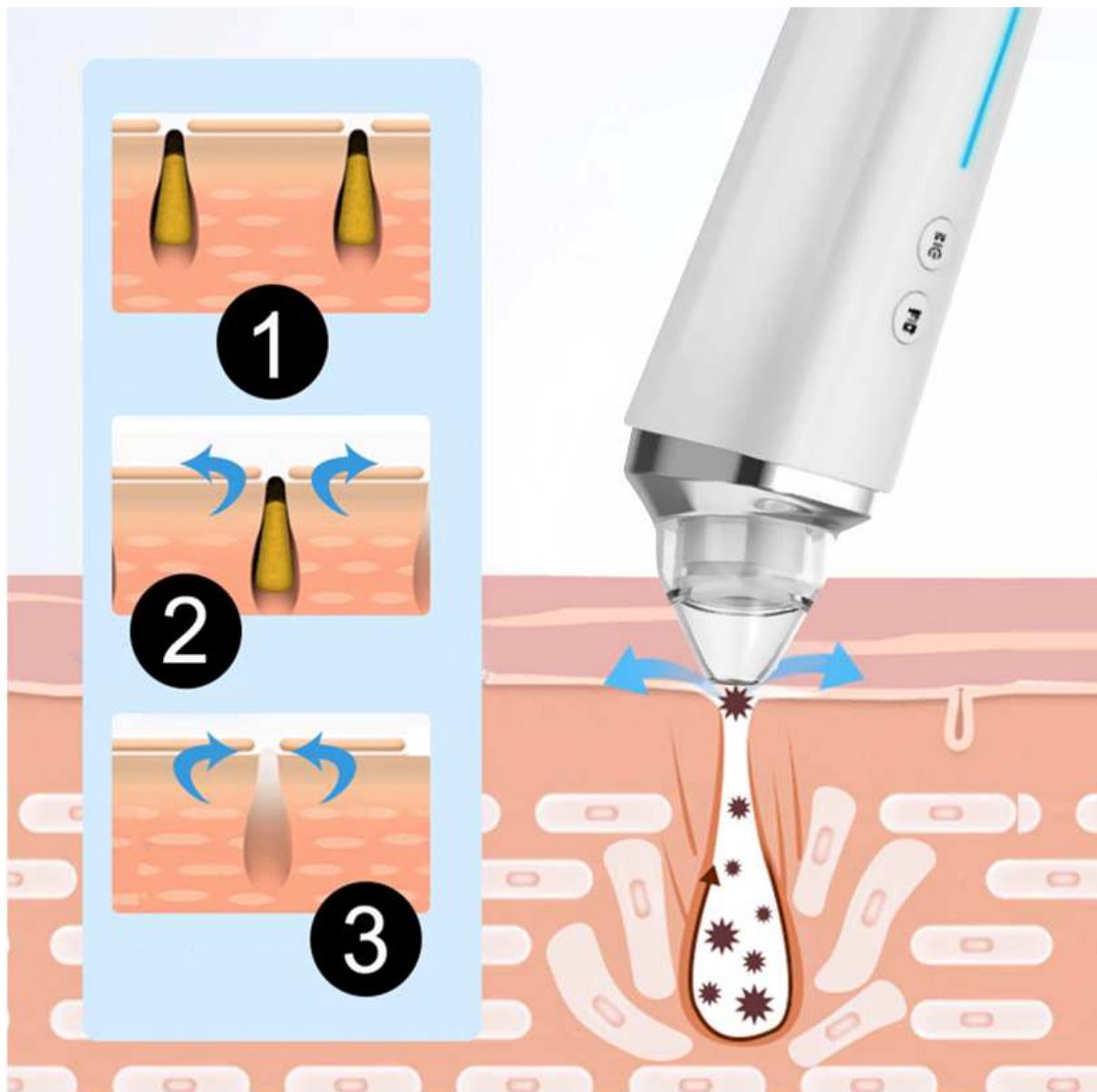


- 1. OTEVŘENÍ:** otevření pórů, černé tečky.
- 2. SÁNÍ:** vysávejte černé tečky a akné.
- 3. SMRŠTĚNÍ:** zmenšuje pory a zklidňuje pokožku.

## PÁROVÁNÍ PŘES WIFI PŘENOS


1. Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu si nainstalujte aplikaci **Time siso**




2. Aplikaci **Time siso** naleznete v **Google Play** nebo **AppStore**. Do pole vyhledávání aplikace zadejte název „time siso“.

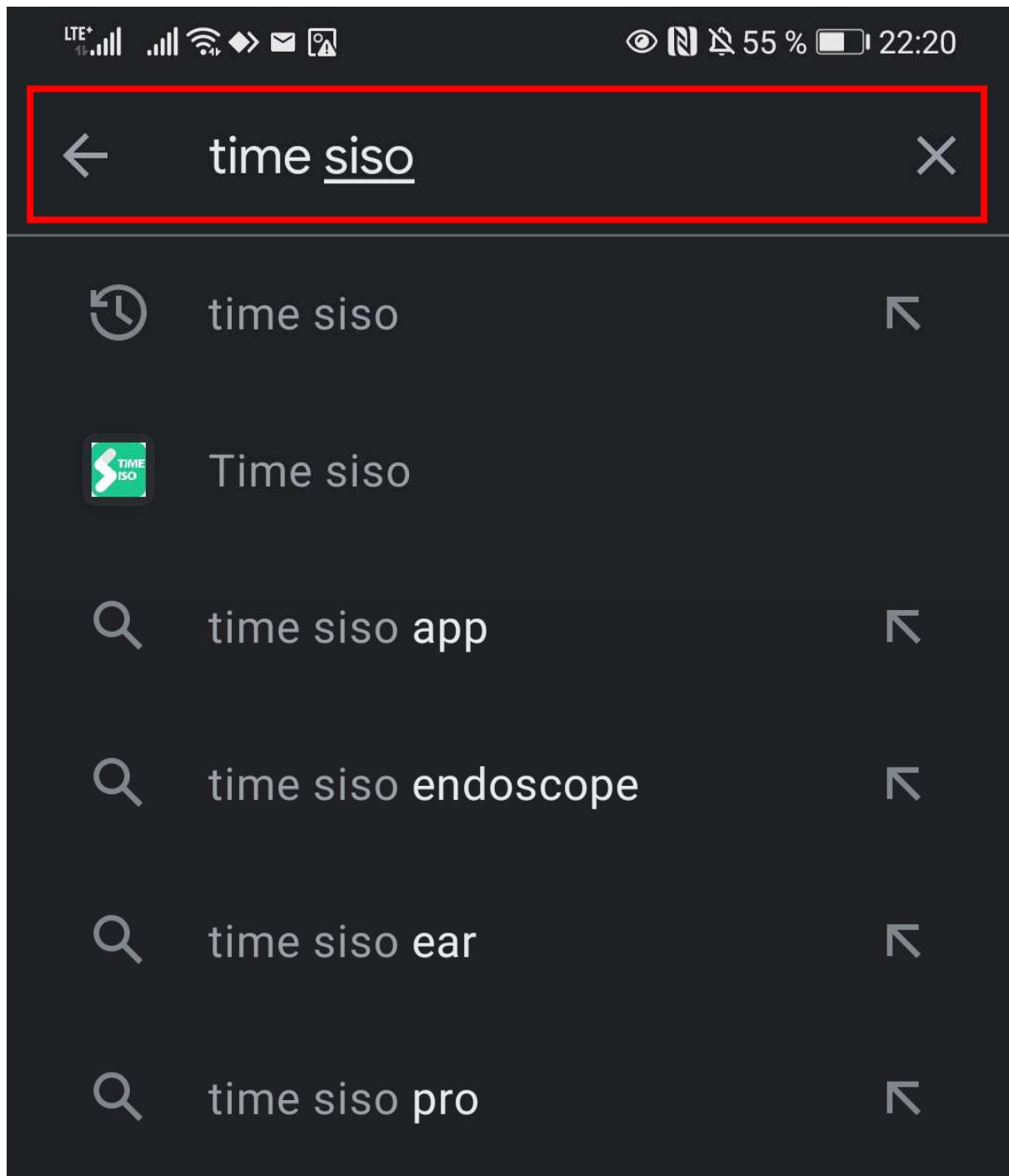

### 3. Zvolte možnost „Instalovat“.

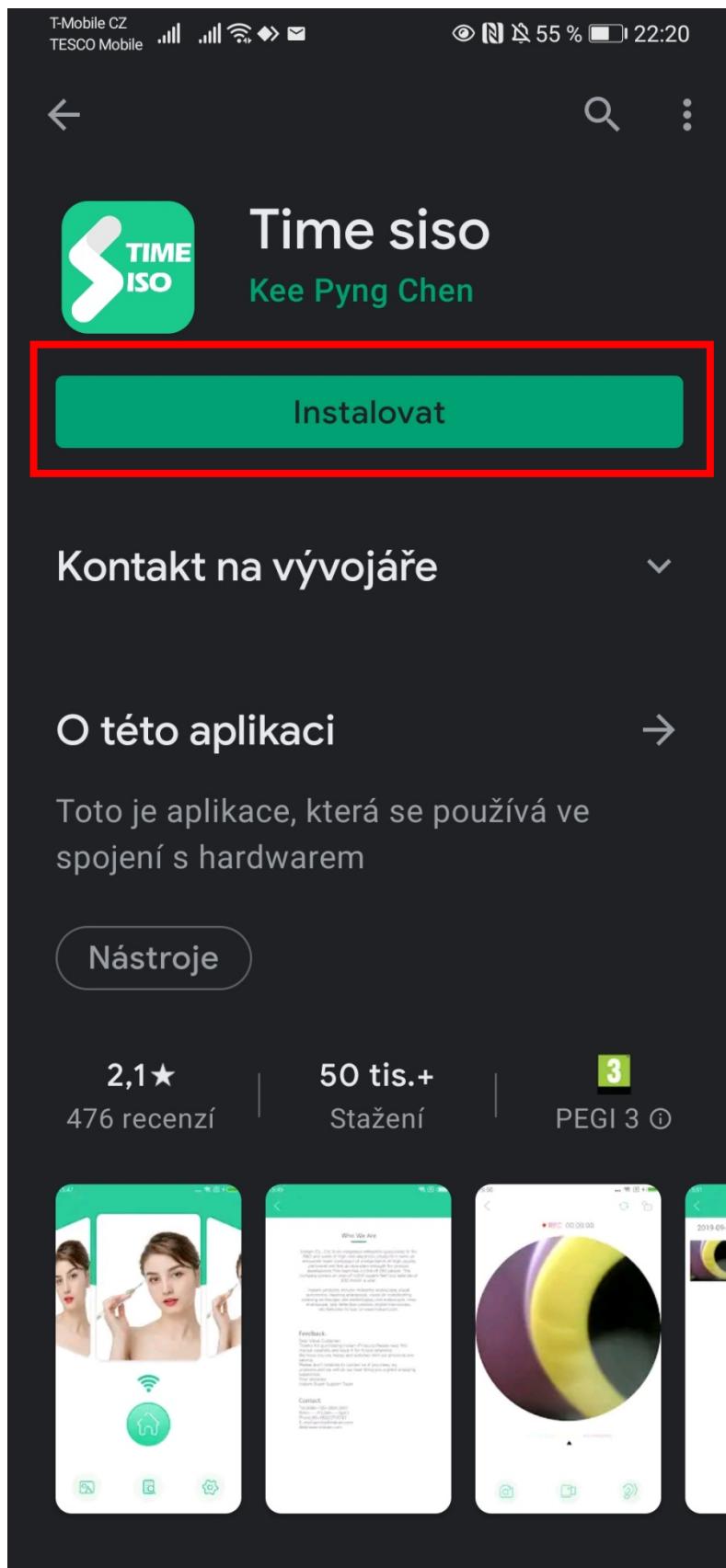


4. Jakmile je instalace aplikace dokončena, je třeba spárovat váš chytrý telefon nebo tablet přes Wifi konektivitu.
5. Stiskněte na kosmetickém přístroji dlouze tlačítko **ON/OFF**. Modrá světelná signalizace bliká. Nyní je kosmetický přístroj připraven na spárování.
6. Nyní je třeba nastavit Wifi připojení ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu. Klikněte na „Go to connect“. Aplikace vás přesměruje do Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

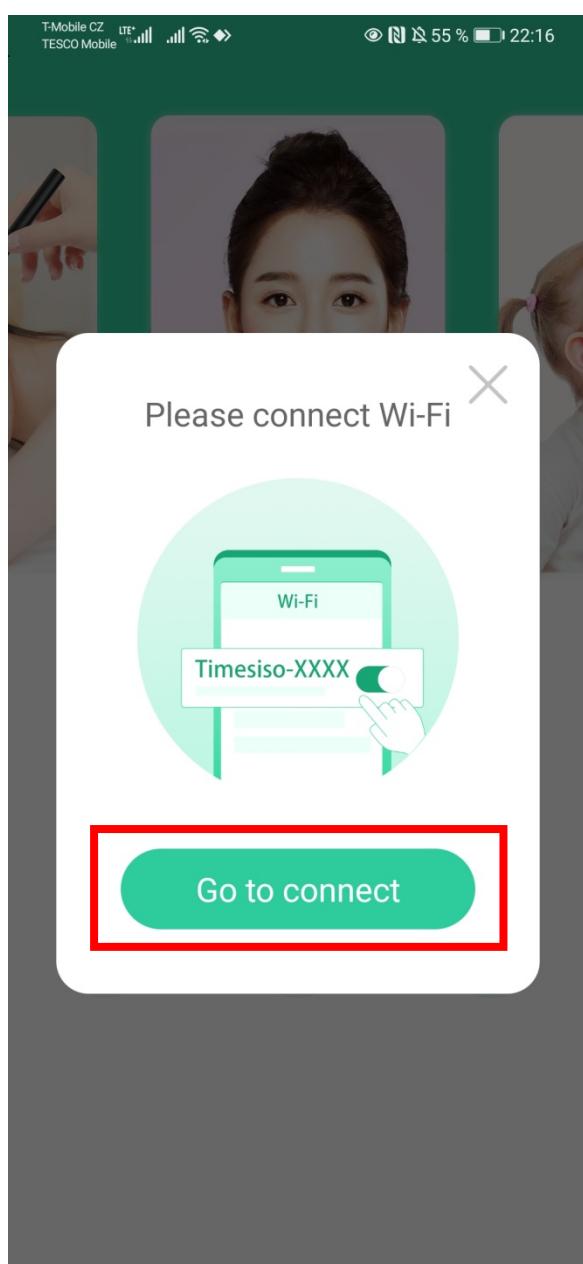


7. Ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu se vám kosmetický přístroj zobrazí jako

„Timesiso-h4540“.

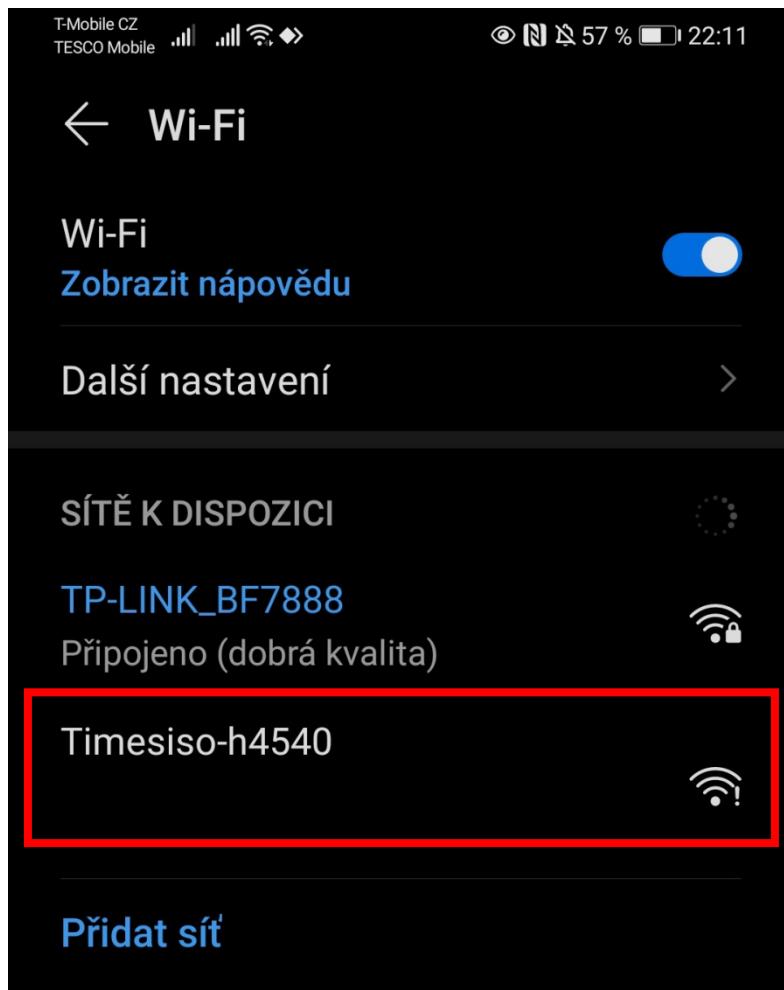


8. Zadejte heslo pro dokončení spárování „12345678“.

9. Úspěšné spárování je potvrzeno notifikací **PŘIPOJENO**.

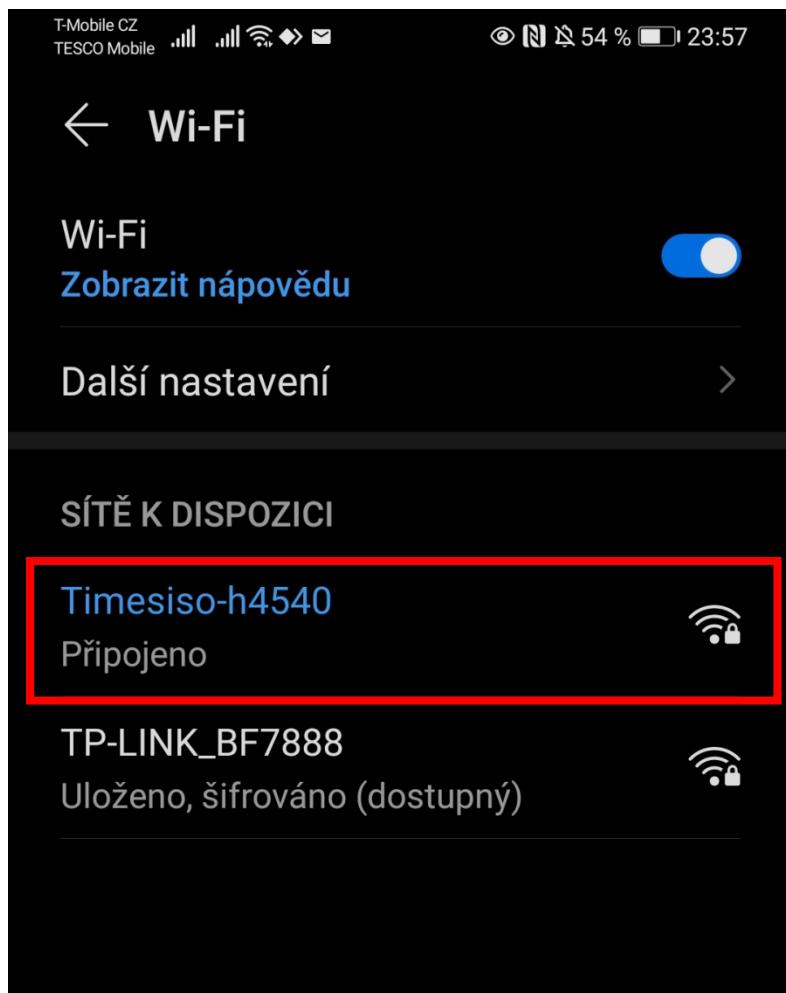

10. Otevřete aplikaci **Time siso**. Stiskněte ikonu s domečkem. Na displeji chytrého telefonu nebo tabletu se vám zobrazí obraz z kamery kosmetického přístroje. **Upozornění:** kamera kosmetického přístroje je přesně zaostřena na vzdálenost při nasazené aplikací hlavici. Pokud aplikací hlavici nenasadíte a přístroj přitisknete k pleti, obraz bude rozostřen.

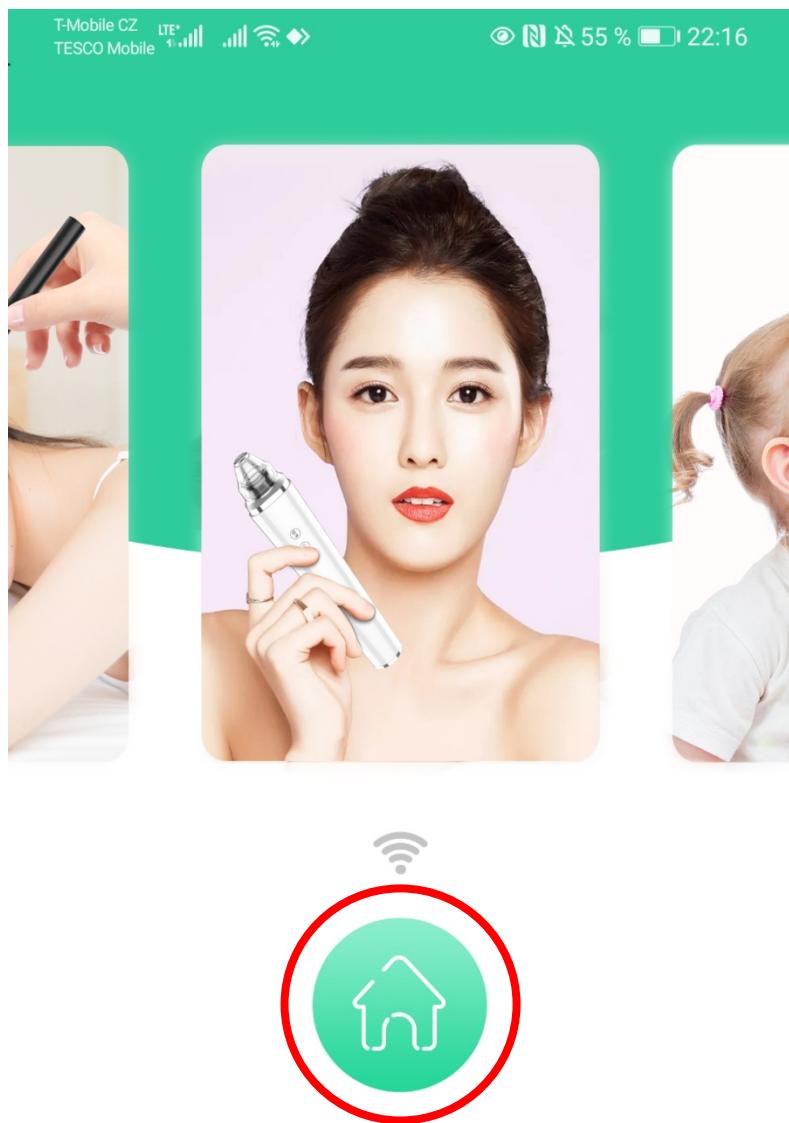

- 11.** Přitiskněte aplikaci hlavici k pleti. Na displeji chytrého telefonu nebo tabletu se vám zobrazí obraz z kamery kosmetického přístroje.



12. V průběhu ošetření můžete kdykoliv vytvořit obrázek nebo video, které se uloží do vašeho telefonu. Pro ukládání obrázku a videa zvolte tlačítka.



## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
2. Jakmile na přístroji bliká modrá světelná signalizace, je třeba ve Wifi nastavení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu potvrdit uživatele „**Timesiso-h4540**“.
3. Jakmile je připojení dokončeno, kosmetický přístroj je v pohotovostním režimu. Modrá světelná signalizace svítí kontinuálně.
4. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete vakuové nasávání – nízká úroveň 1.
5. Dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšte vakuové nasávání – střední úroveň 2.
6. Dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšte vakuové nasávání – vysoká úroveň 3.
7. Aplikační hlavicí pohybujte ve směrech - viz. sekce "**METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**". Aplikátorem se pohybujte po pleti pomalu se zvýšenou pečlivostí. Nikdy nezůstávejte na jednom místě déle než dvě sekundy. Druhou rukou si můžete napomáhat tím, že budete pokožku jemně napínat. Pohyb hlavice bude po povrchu pokožky co nejhladší.
8. Pro uložení obrázku nebo záznamu videa můžete použít tlačítko na přístroji: **Tlačítko fotoaparát/kamera**. Krátkým stiskem vytvoříte záznam obrázku. Dlouhým stiskem spusťte záznam videa. Dalším dlouhým stiskem záznam dokončíte.
9. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

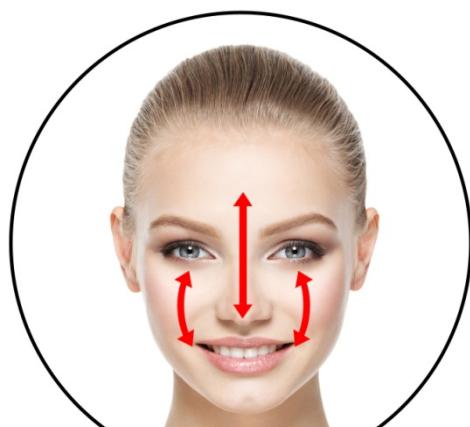

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## **DOSAŽITELNÉ ÚČINKY ČIŠTĚNÍ PLETI**



# **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

## **Jaká je optimální délka individuálního ošetření pleti?**

Pro čištění pleti by se optimální délka měla pohybovat v rozsahu od 15 do 30 minut. Záleží, jak pečlivě se budete věnovat všem částem obličeje, popřípadě podbradku či dekoltu. Začínejte s kratší dobou ošetření a postupně prodlužujte podle toho, jak bude vaše pleť na přístroj reagovat. Ne vždy platí cím déle tím lépe. Pokud máte citlivější pleť, začínejte s kratší délkou ošetření. Při dalším použití přístroje můžete délku ošetření postupně prodlužovat.

## **Představuje ošetření pleti následné omezení?**

Po dokončení čištění pleti může pokožka mírně zarudnout. Jedná se o naprosto přirozený efekt. Podpoří se krevní oběh a lymfatický systém obličeje. Zbarvení by mělo opadnout v řádech desítek minut. Pokožka se dostane zpět do normálu.

## **Je používání přístroje bolestivé?**


Přestože je čištění založeno na principu odsávání svrchní vrstvičky odumřelé pokožky, nebudete cítit žádné nepříjemné pocity. Díky vakuovému sání budete čištění pleti vnímat jako příjemnou uvolňující masáž. Pokud máte velmi citlivou pleť, nastavte si menší výkon vakuového nasávání. Výkon si upravujte pocitově podle toho, jak bude vaše pleť reagovat.

## **Proč někdy bývá tento způsob ošetření pleti nazýván jako rejuvenace?**

Rejuvenace nastartuje růst nových, zdravých a elastických kožních buněk, odolných vůči vnějším vlivům. Vrátí tak biologický čas pokožky zpět a zpomalí její další stárnutí.

## **Je přístroj vhodný i pro moji pleť?**

Čištění je vhodné pro všechny typy pleti. Omezení se vztahuje pouze na případy, kdy je pleť zasažena výrazným kožním onemocněním. Zvýšenou pozornost při používání musí dbát osoby, které mají na dotyk vysoce citlivou tenkou pleť. Důležitou úlohu hraje také reliéf pleti. Pokud se na vaší pleti vyskytuje větší počet jizviček nebo nestandardních nerovností (bradavice, kožní výrůstky), ošetření to může komplikovat. Je doporučeno se těmto místům aplikátorem vyhnout.

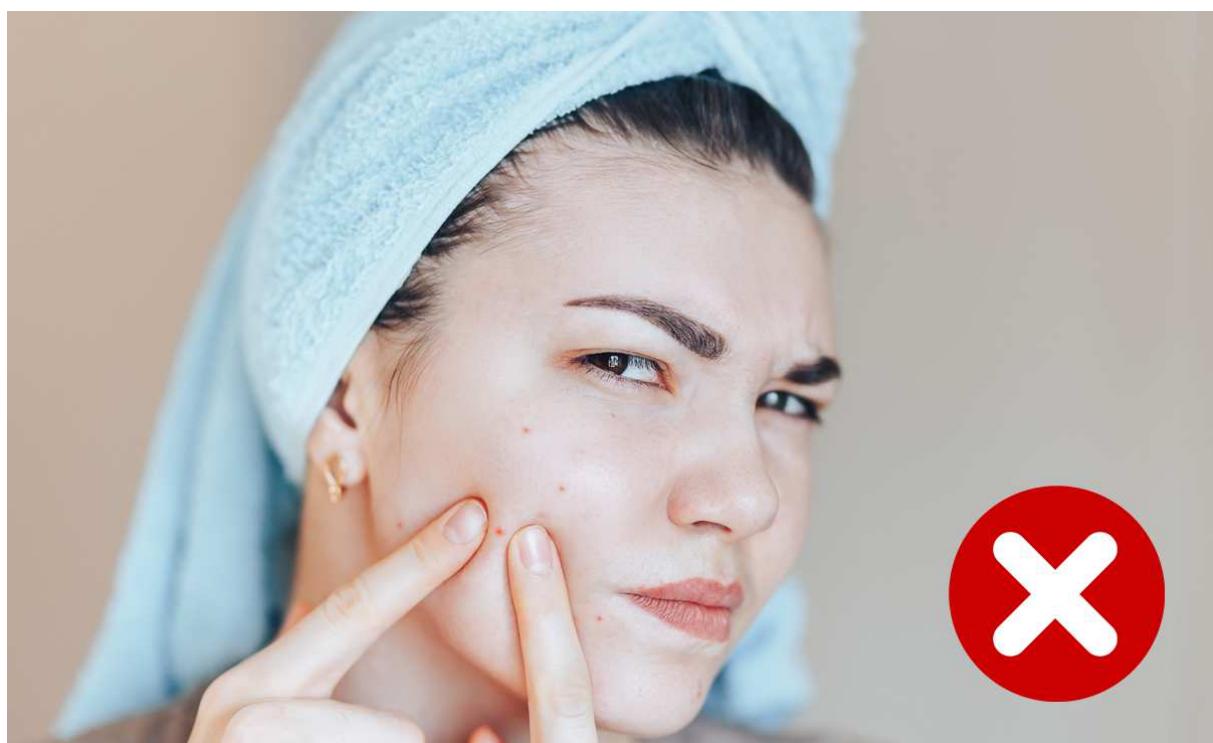

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení.

**Upozornění:** Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

### **Postup nabíjení:**

1. Nízký stav baterie indikuje červená světelná signalizace.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje.
3. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení indikuje blikající červená světelná signalizace.
5. Jakmile je baterie plně nabita, modrá signalizace svítí kontinuálně.
6. Napájecí kabel odpojte od přístroje.
7. Délka nabíjení se odvíjí od aktuální kondice baterie.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Před čištěním aplikátoru jej odpojte od přístroje. Samotný aplikátor můžete omýt pomocí proudu vlažné vody. Pro čištění úzkých prostor aplikátoru je ideální použít vatovou tyčinku pro čištění uší. K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátorů nebo přístroje žádné ostré předměty, které by je mohly poškodit.



## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **CERTIFIKACE**



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## **DOVOZCE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**