

# MANUALE UTENTE

Massaggiatore Corporale  
**BeautyRelax BR-2220**

**CELLUFORM OPTIMAL**



# BR-2220

## Celluform Optimal



## CONTENUTI:

PREMESSA	4
AVVISO	5
UTILIZZO DI SONOGEL	5
CONTROINDICAZIONI	6
PARTI NON IDONEE AL TRATTAMENTO	6
PARTI IDONEE AL TRATTAMENTO	6
LINFONODI	7
INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DEL DISPOSITIVO	10
CAVITAZIONE ULTRASONICA	10
RADIOFREQUENZA	10
LUCE ROSSA	10
LUCE BLU	11
EMS	11
VANTAGGI PRINCIPALI	11
COSA ASPETTARTI	11
PARAMETRI TECNICI	12
CONTENUTI ALL'INTERNO	12
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	13
DESCRIZIONE DELLA TESTA	15
PULSANTI DI CONTROLLO	16
REGOLAZIONE DELL'INTENSITA'	17
MODALITA' CORPO/VISO	18
SCHEMA TECNOLOGIE DELL'APPLICATIVO	19
DURATA DEL TRATTAMENTO	19
TEST DERMATOLOGICO	20
COME USARE IL DISPOSITIVO	20
TRATTAMENTO IN MODALITA' CORPO	21
TRATTAMENTO FACCIALE IN MODALITA' VISO	26
RICARICA DELLA BATTERIA	27
PULIZIA E MANUTENZIONE	27
RISOLVERE I POSSIBILI PROBLEMI	28
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI	29
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE	31
CERTIFICAZIONE	31
IMPORTATORE	31
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	32

## **PREMESSA**

Gentile cliente, grazie per la sua fiducia nell'acquisto del nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni dettagliate nelle istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo. Presti particolare attenzione alle avvertenze e agli avvisi di sicurezza. Utilizzi il dispositivo esattamente come indicato nelle istruzioni. Tutti questi passi contribuiranno al massimo utilizzo di tutte le funzioni del dispositivo e alla protezione di tutta la salute. In queste istruzioni per l'uso, cercheremo di avvicinarvi il più possibile alle tecnologie utilizzate e a come utilizzare al meglio il dispositivo

Si prega di non prendere alla leggera tutte le istruzioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Il dispositivo estetico per il trattamento non invasivo di parti selezionate del corpo funziona con una tecnologia indolore e sicura. Il dispositivo ha subito un lungo sviluppo e la sicurezza soddisfa i requisiti di soddisfare tutti gli standard di sicurezza. Per stimolare efficacemente il tessuto adiposo sottocutaneo, il dispositivo funziona con una certa potenza. Se non segui le istruzioni, non rispetti le avvertenze e l'elenco delle controindicazioni, puoi, in casi estremi, influenzare negativamente la tua salute. D'altra parte, non preoccupatevi di usare il dispositivo. La costruzione, le proprietà e le tecnologie sono adattate per l'uso a casa senza la supervisione di una persona erudita del settore sanitario.

### Informazioni introduttive importanti relative al dispositivo e al suo utilizzo:

- Il dispositivo estetico BeautyRelax rientra nella categoria dei dispositivi di massaggio/estetici. Non è un dispositivo medico. Non è usato per trattare l'obesità o altre limitazioni correlate. Offre tecnologie che, se utilizzate in condizioni specifiche, aiutano a ridurre il grasso sottocutaneo.
- Il dispositivo estetico BeautyRelax fornisce un trattamento non invasivo. In pratica, ciò significa che nessuna delle parti della testa di applicazione penetra fisicamente sotto la pelle.
- L'uso non invasivo è un prerequisito fondamentale per l'utilizzo del dispositivo a casa da parte di un utente normale. Il controllo del dispositivo non richiede la supervisione di un addetto erudito nel campo della sanità o dell'estetica cosmetica.
- Il dispositivo estetico BeautyRelax è certificato e soddisfa tutti gli standard stabiliti per un dispositivo di tipo simile. La sicurezza dell'adattatore e di tutti i componenti elettronici è garantita.
- Il trattamento è sempre combinato con un gel conduttivo chiaro (sonogel). Può essere acquistato in qualsiasi farmacia o negozio di assistenza sanitaria. Costa poche decine di corone. Sicuramente abbastanza è il più economico. Più è costoso, meglio è. Lo scopo principale dell'applicazione di un sottile strato di gel sulla pelle è quello di aumentare la conduttività. Gli ultrasuoni acquisiscono una migliore capacità di penetrare lo strato del derma, dove la struttura del collagene e delle fibre elastiche è
- Sicuramente, più frequente è l'uso del dispositivo, più veloci sono i risultati. Date al vostro corpo abbastanza tempo per elaborare l'energia che viene rilasciata dall'uso del dispositivo. Questo contribuirà significativamente alla protezione della vostra salute.
- Se non sapete cosa fare con qualcosa, non siete sicuri in qualsiasi fase di utilizzo del dispositivo, non esitate a contattarci. Telefono: 737196160 o email: mh@santadria.cz Il nostro manager dei prodotti Martin Hrbek è a vostra disposizione, che risponderà a tutte le vostre possibili domande o ambiguità.

### **Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per riferimenti futuri.**

Ci auguriamo che il dispositivo vi serva bene e soddisfi le aspettative che avevate prima di acquistarlo.

Il team di BeautyRelax.cz

## **AVVISO**

- Prima di usarlo per la prima volta, leggere queste istruzioni per l'uso, vedere tutte le illustrazioni e conservarle per riferimenti futuri.
- Se la sua pelle è affetta da una grave patologia cutanea, non usi l'apparecchio. Se non è sicuro che la sua condizione sia conforme alle condizioni di utilizzo dell'apparecchio, consulti il suo medico di base circa l'idoneità all'uso.
- Il dispositivo è destinato principalmente al vostro uso personale. Non condividerlo con familiari o amici. Se il dispositivo viene utilizzato da più di una persona, prestare particolare attenzione ai principi di igiene. Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato, non funziona correttamente o è caduto in acqua.
- Per evitare scosse elettriche, non toccare l'interno dell'unità se è rotto.
- Se l'unità viene fatta cadere, potrebbe essere danneggiata. In questo caso, non continuare ad usare il dispositivo e contattare il servizio di assistenza del rivenditore.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o in luoghi con elevata umidità (bagno, doccia, piscina, ecc.). The device is not washable. It must not be immersed in water or under running water.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito. Spegnerne sempre accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Se l'unità è stata spostata da un ambiente molto freddo a uno molto caldo, aspettate almeno 3 ore prima di usarla.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o di persone le cui condizioni fisiche o mentali non permettono un uso sicuro dell'apparecchio.
- Non posizionare o utilizzare l'apparecchio su fonti di calore caldo (radiatore, stufa, fuoco, ecc.)
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da soli.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da soli. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Il distributore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio e contrario alle indicazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Non è responsabile delle conseguenze causate dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
- Il distributore non è responsabile di eventuali danni alla salute o alla proprietà causati da altri usi.



## **UTILIZZO DI SONOGEL**

L'uso è sempre associato a un gel conduttivo chiaro (non incluso). È possibile acquistare il gel di applicazione, il cosiddetto SONOGEL, in qualsiasi negozio di forniture mediche (può anche essere acquistato in una farmacia). Il gel è molto importante per l'uso del dispositivo. Crea lo strato di legame necessario tra l'applicatore e la pelle. È fatto a base d'acqua. Non può danneggiare la testa di applicazione. L'uso di un gel di applicazione è essenziale. Onde ultrasoniche, radio frequenze ed EMS riescono a penetrare meglio la superficie. Non usare altri cosmetici.



## CONTROINDICAZIONI

In **nessun caso** il dispositivo può essere utilizzato da persone che sono affette da una delle seguenti condizioni:

- Cancro, epilessia, diabete, malattie virali
- In caso di febbre alta
- Malattie gravi a fegato o reni
- Colesterolo alto
- Malattie della pelle
- Sindrome da fatica
- Malattie cardiovascolare, pacemaker, ipertensione
- Impianti metallici nel corpo
- Disturbi cardiovascolari o arteriosclerosi
- Gravidanza
- Mestruazioni
- Persone che assumono anticoagulanti
- Pazienti che si sono sottoposti a operazioni di trapianto
- Persone che necessitano di una supervisione costante possono utilizzare il dispositivo solo dopo una visita medica



## PARTI NON IDONEE AL TRATTAMENTO

- Testa
- Zona della tiroide
- Zona intorno al cuore
- Ascelle
- Gomiti
- Polsi
- Ginocchio
- Anche
- Palmi
- Piedi
- Intorno alle ginocchia
- Spina Dorsale



## PARTI IDONEE AL TRATTAMENTO


- Avambraccio (modalità **BODY**)
- Braccia (modalità **BODY**)
- Pancia (modalità **BODY**)
- Cosce (modalità **BODY**)
- Natiche (modalità **BODY**)
- Polpaccio (modalità **BODY**)
- Faccia e zigomi (modalità **FACE**)



**Avviso:** l'area accoppiata del corpo è presa come una parte

## LINFONODI


Evitare queste zone dei linfonodi quando si usa il dispositivo Beautyrelax. I movimenti della testa del dispositivo con gli ultrasuoni **sono severamente vietati** in queste aree. Le aree del corpo coperte dal divieto sono indicate da **grandi punti verdi**:

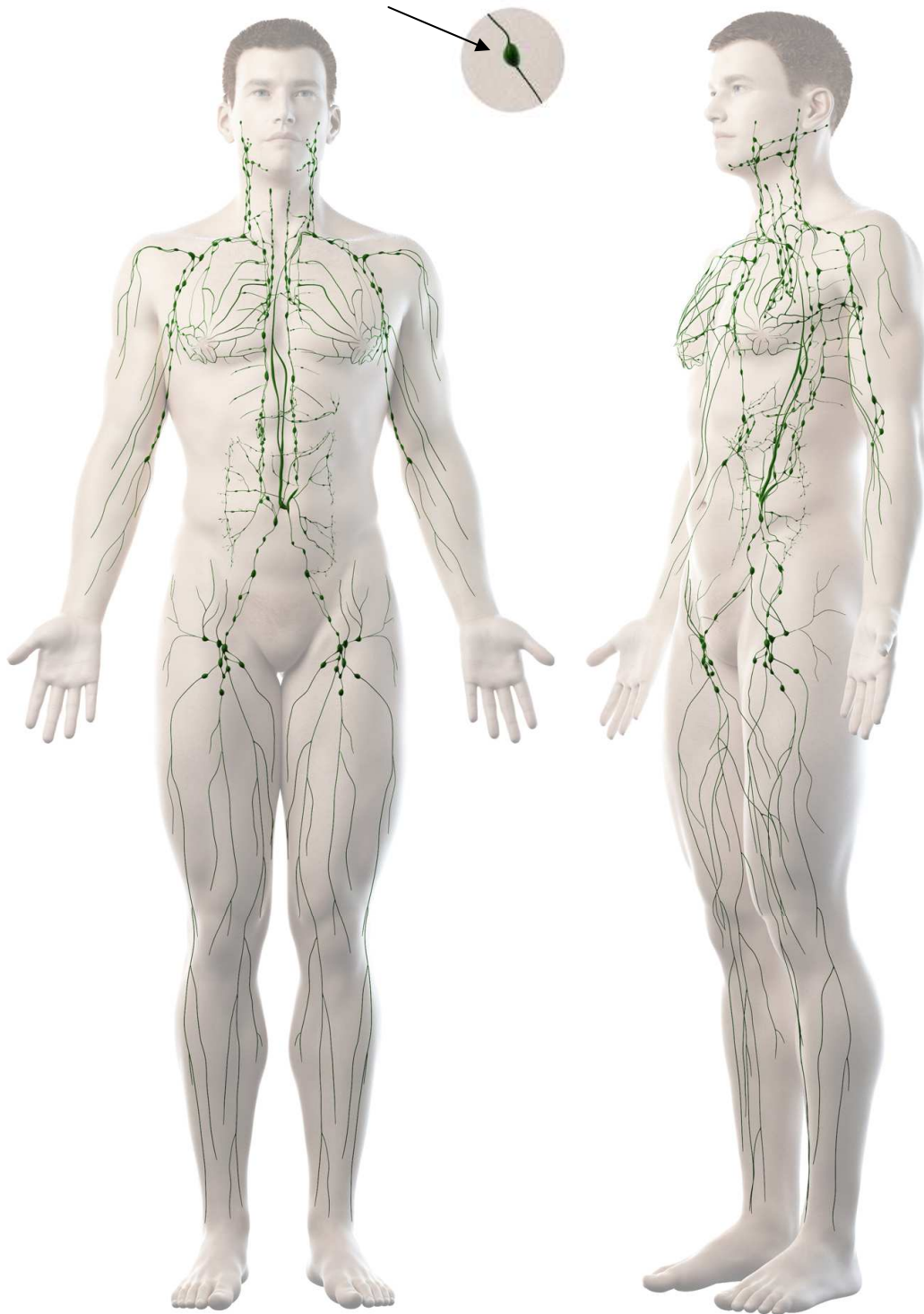



## LINFONODI

Evitare queste zone dei linfonodi quando si usa il dispositivo Beautyrelax. I movimenti della testa del dispositivo con gli ultrasuoni **sono severamente vietati** in queste aree. Le aree del corpo coperte dal divieto sono indicate da **grandi punti verdi**:

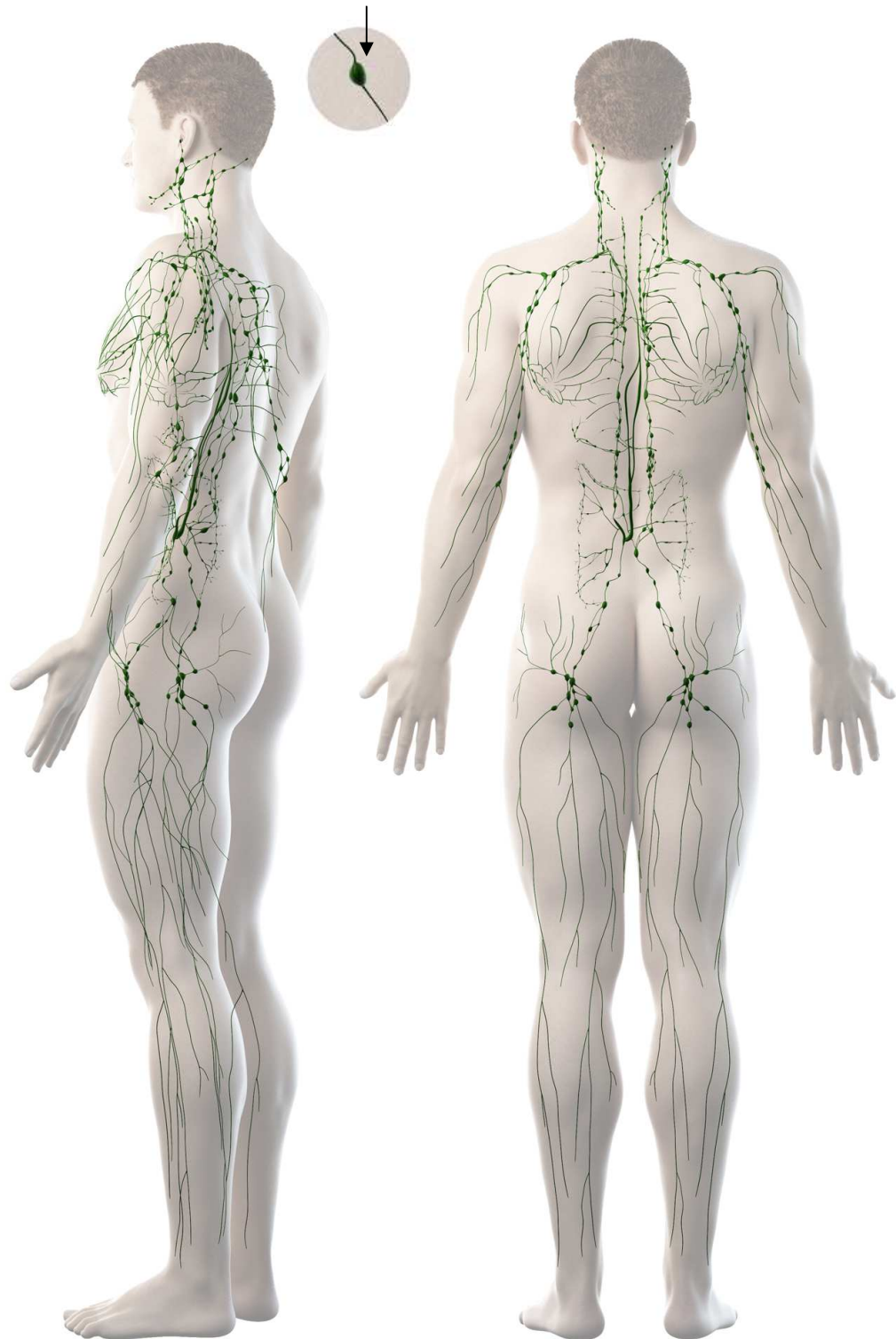



## LINFONODI

Evitare queste zone dei linfonodi quando si usa il dispositivo Beautyrelax. I movimenti della testa del dispositivo con gli ultrasuoni **sono severamente vietati** in queste aree. Le aree del corpo coperte dal divieto sono indicate da **grandi punti verdi**:



## **INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE DEL DISPOSITIVO**

BeautyRelax Celluform Optimal è un dispositivo estetico di nuova generazione per un efficace modellamento del corpo. La costruzione e le tecnologie utilizzate sono basate sulla strumentazione di studi estetici professionali. Riduzione del grasso sottocutaneo, rassodamento della pelle cadente, attenuazione dei sintomi della cellulite. I principali effetti delle tecnologie altamente efficienti: ultrasuoni, radiofrequenza, EMS e luce fotonica. Progettato per il trattamento del corpo. Assolutamente sicuro da usare a casa. BeautyRelax Celluform Optimal è la soluzione ottimale per il tuo corpo!

### **CAVITAZIONE ULTRASONICA**

La testa di applicazione genera onde ultrasoniche ad alta frequenza che penetrano il tessuto sottocutaneo ad una frequenza di 500.000 oscillazioni al secondo. I tessuti assorbono poi l'energia così generata. L'integrità della cellula di grasso viene distrutta e il grasso viene rilasciato. Il grasso rilasciato viene scomposto in glicerolo e acidi grassi liberi. Il glicerolo serve come fonte di energia, mentre gli acidi grassi vengono trasferiti al fegato, dove vengono elaborati come i normali acidi grassi del cibo ed espulsi dal corpo in modo naturale. Il grasso rimosso non ritorna nel tessuto. La cavitazione ultrasonica è un metodo indolore, non invasivo, delicato, efficace e soprattutto permanente per la riduzione del grasso nelle aree più problematiche.




### **RADIOFREQUENZA**

Quando viene applicato alla zona trattata, l'applicatore rilascia energia con una potenza e una frequenza molto specifiche. Le onde di radiofrequenza sono ottimizzate per causare un gradiente termico che influisce significativamente sui processi nello strato del derma. L'energia fornita attiva il rimodellamento delle fibre di collagene e dell'elastina. Il massimo targeting energetico possibile anche in località con uno strato di grasso più pronunciato e la conseguente eccitazione dei processi metabolici ha un effetto significativo sulla levigatura molto efficace dei contorni cadenti e deformati.



### **LUCE ROSSA**

- Supporta la produzione naturale di collagene
- Aumenta l'efficacia di assorbimento delle sostanze attive di cosmetici
- Migliora la circolazione sanguigna nel tessuto sottocutaneo
- Previene la formazione di pigmenti

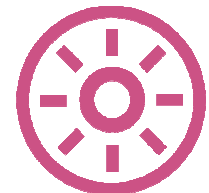

## **LUCE BLU**

- attiva porfirine (danno inizio a una reazione chimica che distrugge batteri dannosi)
- effetto antibatterico ed antiinfiammatorio
- prevenzione di acne
- trattamento sicuro ed efficace

## **EMS**

La testa di applicazione BeautyRelax Celluform Smart trasmette sottili microimpulsi elettrici a contatto con la pelle, che penetrano attraverso la parte superiore della pelle direttamente ai muscoli. La potenza e la frequenza degli impulsi elettrici sono appositamente regolati per consentire un trattamento del viso efficace ma indolore. I muscoli si contraggono e quindi si rafforzano. Il collagene e le fibre elastiche sono stimolate meccanicamente. Migliorerete la struttura della pelle, il suo tono e aumenterete l'elasticità. Sopprime la cellulite. La pelle ha un aspetto ringiovanito e radioso. Tutto questo in modo non invasivo e senza alcuna sensazione sgradevole.



## **VANTAGGI PRINCIPALI**

- Possibilità di usare il dispositivo sul viso e sul corpo
- 4 tecnologie moderne comunemente usate in saloni estetici.
- Risultati facilmente ottenibili in confronto ad altri dispositivi simili.
- Tipologia completamente non invasiva del trattamento.
- Non causa nessun disagio.
- Indolore e completamente sicuro da usare.
- Risparmio di tempo: 1 sessione dura 15 minuti.
- Senza effetti collaterali.

## **COSA ASPETTARTI**

- Stimolazione intensa dello strato di derma per sostenere la naturale produzione di collagene.
- Induzione della tensione nei muscoli facciali per rinforzarli.
- Focus mirato sui tessuti adipose nell'area degli zigomi.
- Risultati visibili ed ottenibili della riduzione sottocutanea di grasso anche in casi dove il grasso cresce attraverso la massa muscolare (specialmente negli uomini o donne praticanti di sport).
- Stimolazione attiva del tessuto adiposo con il focus su parti anatomiche maschili e femminili.
- Formazione di profile significativi sulle mani, piedi e corpo.


## **PARAMETRI TECNICI**

- Frequenza ad ultrasuoni: 1Mhz.
- Luce rossa con lunghezza d'onda di 625nm.
- Luce blu con lunghezza d'onda di 465nm.
- Display LCD.
- Timer.
- Batteria con indicatore.
- Voltaggio operativo: 5V.
- Corrente operativa: 1A.
- Dimensioni: 8.5x8.5x8.5cm.
- Peso: 250g.

## **CONTENUTI ALL'INTERNO**


- Massaggiatore Corporale BeautyRelax BR-2220 Celluform Optimal.
- Cavo di ricarica.
- Adattatore 220V.
- Manuale utente.

## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

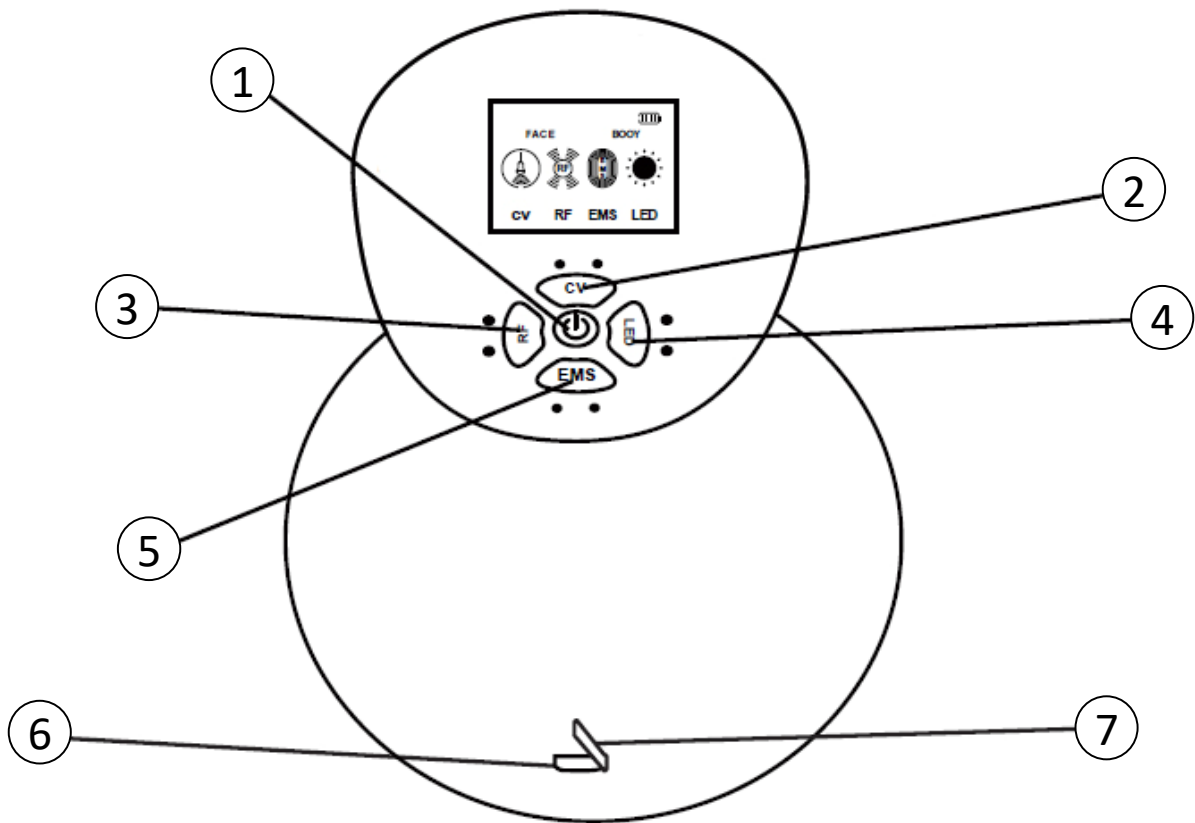

1. Pulsante ON / OFF
2. Pulsante onda ultrasonica CV
3. Pulsante radiofrequenza RF
4. Pulsante di illuminazione LED
5. Pulsante di pulsioni elettriche EMS
6. Ingresso cavo alimentazione


## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

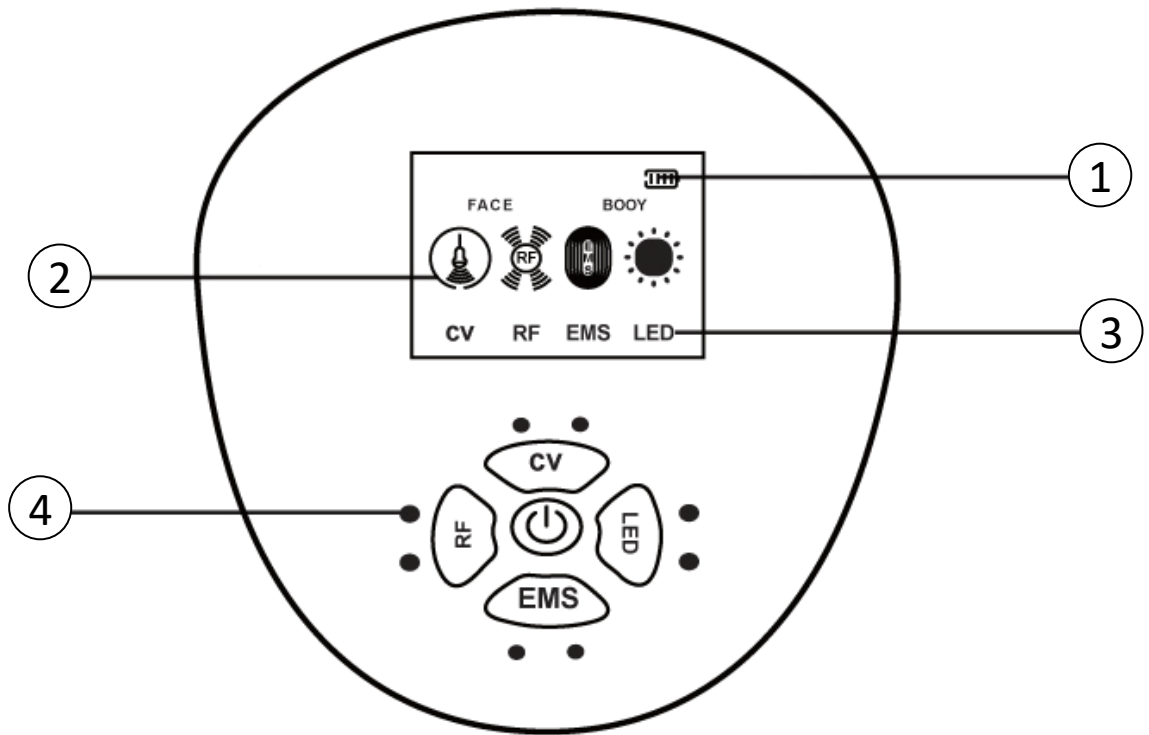

1. Pulsante di stato batteria
2. Mostra la modalità attuale
3. Nome modalità
4. Indicatore livello intensità





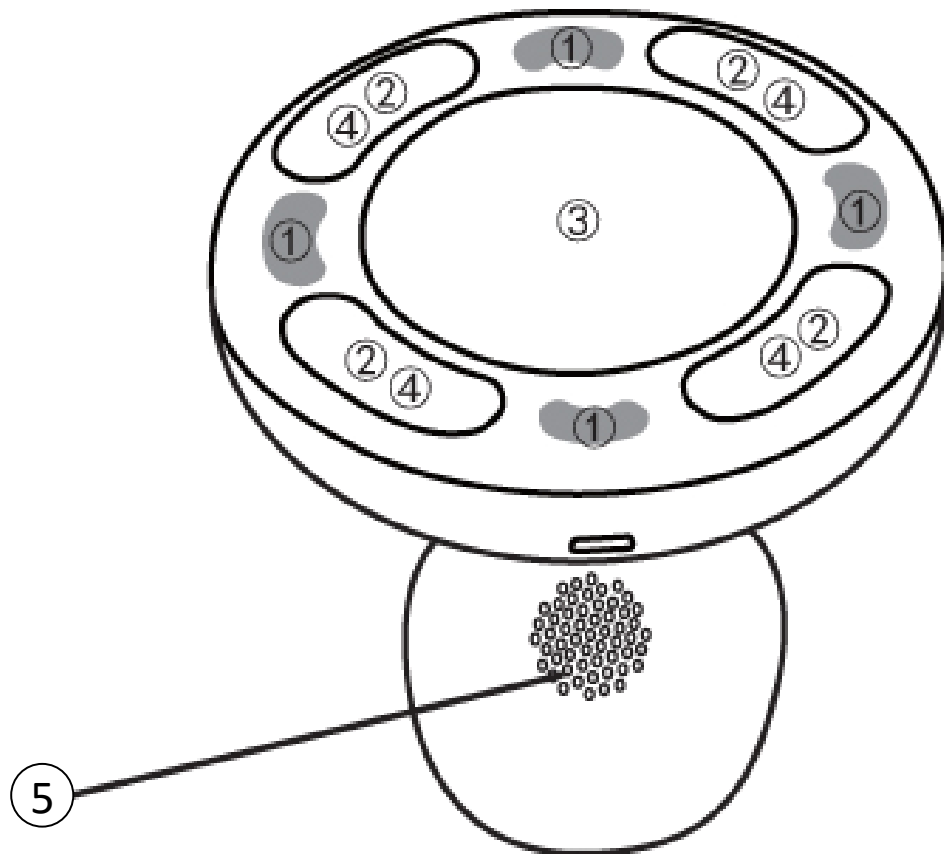



## DESCRIZIONE DELLA TESTA



1. Luce rossa e blu
2. Radio frequenza
3. Onde ultrasoniche
4. Pulsazioni elettriche EMS
5. Ventilazione calda (non coprire)

## PULSANTI DI CONTROLLO

<i>Pulsante</i>	<i>Funzione</i>	<i>Luce di indicazione</i>
	<i>1 secondo – accendi dispositivo 1 secondo – spegni dispositivo</i>	
	<i>Breve pressione – cambia modalità Modalità corpo / Modalità Viso / Selezione modalità manuale</i>	
	<i>2 livelli di intensità</i>	<i>intermittenza sul pulsante LED</i>
	<i>2 livelli di intensità</i>	<i>Intermittenza sul pulsante CV</i>
	<i>Luce rossa / blu</i>	<i>Intermittenza sul pulsante LED</i>
	<i>2 livelli di intensità</i>	<i>Intermittenza sul pulsante LED</i>

## REGOLAZIONE DELL'INTENSITA'


### **Pulsante ON/OFF**

Tenere premuto il pulsante **ON/OFF**. Il dispositivo si accende. Il dispositivo inizia a funzionare in modalità Body. Premere di nuovo brevemente il pulsante **ON/OFF** per passare alla modalità Face. Premere di nuovo per passare alla modalità trattamento libero. È possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento premendo a lungo il pulsante **ON/OFF**.




### **Due livelli di intensità di radiofrequenza RF**

Premere **una** volta il pulsante **RF** = livello basso **1**. Premere **due** volte il pulsante **RF** = livello alto **2**. I singoli livelli sono accompagnati da una segnalazione luminosa.

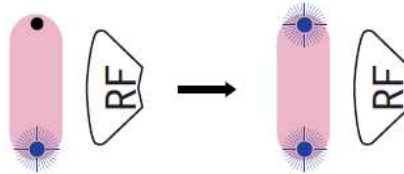


### **Due livelli di intensità degli ultrasuoni CV**

Premere il pulsante **CV** = livello basso **1**. Premere il **pulsante CV** = livello alto **2** volte. I livelli individuali sono accompagnati dalla luce intermittente.

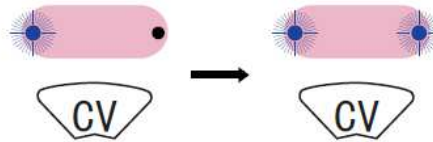


### **Due livelli di intensità degli ultrasuoni CV**

Premere il **pulsante CV** = livello basso **1**. Premere il **pulsante CV** = livello alto **2** volte. I livelli individuali sono accompagnati dalla luce intermittente.

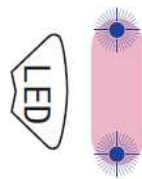

### **Due livelli di pulsazioni elettriche EMS**

Premere il **pulsante EMS** = livello basso **1**. Premere il **pulsante EMS** = livello alto **2** volte. I livelli individuali sono accompagnati dalla luce intermittente

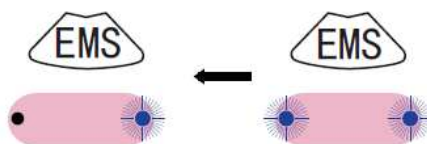



### **Avviso**

Ogni modalità ha un timer automatico di 10 minuti (il tempo non viene resettato se cambia l'intensità). Dopo 10 minuti, il dispositivo passa alla modalità standby. Quindi è possibile utilizzare il pulsante ON / OFF per selezionare una nuova modalità di utilizzo del dispositivo. Il display LCD mostra l'icona appropriata secondo la modalità d'uso impostata del dispositivo.

## **MODALITA' CORPO/VISO**

Il dispositivo di massaggio ha un grande vantaggio rispetto ai dispositivi di tipo simile. Regolando la potenza, può essere applicato al corpo e al viso. Celluform Optimal offre due dispositivi in uno. Il dispositivo offre trattamenti multifunzionali per la pelle in due modalità di base: Corpo, Viso.

### ***Modalità di trattamento del corpo - BODY***

Timer di 10 minuti. Radiofrequenza ad alta frequenza + luce LED rossa (RF + LED 2 indicatori luminosi) funzionano per 2 minuti. Onde ultrasoniche ad alta intensità + luce rossa (CV + LED 2 indicatori luminosi) funzionano per 3 minuti. Alta frequenza RF + radiofrequenza EMS (ogni 10 secondi) + luce LED rossa (2 indicatori luminosi) funzionano per 5 minuti.

### ***Modalità di trattamento del viso - FACE***

Timer di 10 minuti. Radiofrequenza a bassa frequenza + luce LED blu (1 RF + LED 2 indicatori luminosi) funzionano per 3 minuti. Onde ultrasoniche a bassa intensità + luce blu (1 CV + LED 2 indicatori luminosi) funzionano per 2 minuti. Impulsi elettrici EMS a bassa intensità + luce LED blu (1 EMS + 2 indicatori LED) funzionano per 2 minuti. Radiofrequenze a bassa frequenza + EMS alternativamente (ogni funzione 10 secondi) + luce LED blu (1 EMS + 1RF + 2 LED spia) funzionano per 3 minuti.

### ***Funzione di spegnimento automatico***

Dopo 10 minuti, il dispositivo passa automaticamente alla modalità standby. In caso di ulteriore inattività entro 2 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.



### **Avviso**

Prima di prendere piena dimestichezza con l'apparecchio e padroneggiare tutte le sue funzioni e caratteristiche, iniziate con un basso livello di intensità di trattamento. Regola il livello di intensità in modo che ti piaccia usare il dispositivo.

## SCHEMA TECNOLOGIE DELL'APPLICATIVO

<b>Pulsant</b>	<b>Significato</b>	<b>Area di trattamento del corpo</b>	<b>Frequenza d'uso</b>
	soppressione manifestazioni di cellulite / aumento dell'elasticità della	viso + corpo	15 minuti per trattamento / giorno
	riduzione tessuto adiposo	viso + corpo	
	trattamento non invasivo delle	viso + corpo	
	Rafforzamento del tessuto	viso + corpo	

## DURATA DEL TRATTAMENTO

Il tempo di trattamento non dovrebbe superare i 15 minuti. Nel caso di una coppia di parti del corpo, dividere questo tempo a metà. Cioè 7,5 minuti una coscia e 7,5 minuti l'altra coscia.

Si possono trattare al massimo due parti alla volta con una frequenza massima di una volta alla settimana. Lo stesso lotto può essere trattato in 7 giorni al più presto..

### **Esempio di un programma di trattamento del corpo.**

<b>Lunedì</b>	<b>Martedì</b>	<b>Mercoledì</b>	<b>Giovedì</b>	<b>Venerdì</b>	<b>Sabato</b>	<b>Domenica</b>
braccia + polpacci	riposo	riposo	cosce + polpacci	riposo	riposo	riposo

### **Perché i giorni di riposo?**

Quando si tratta il corpo con un dispositivo estetico con la funzione di onde ultrasoniche, è essenziale dare al corpo il tempo di elaborare l'energia rilasciata in modo naturale. Le cellule di grasso vengono scomposte in glicerolo e acidi grassi liberi. Il glicerolo serve come fonte di energia, mentre gli acidi grassi vengono trasferiti al fegato, dove vengono elaborati come normali acidi grassi provenienti dal cibo ed espulsi dal corpo in modo naturale. Dopo aver completato questo processo, è possibile ripetere in modo sicuro il trattamento con il dispositivo.

## **TEST DERMATOLOGICO**


Siamo tutti originali. Ci sono diversi tipi di pelle. Anche se l'uso del dispositivo è completamente sicuro, si raccomanda di eseguire un test cutaneo per assicurarsi che l'uso non causi irritazioni cutanee indesiderate o reazioni allergiche.

1. Applicare uno strato sottile di gel conduttivo sulla pelle
2. Trattare una piccola area della pelle in un movimento circolare alternando le tecnologie RF, CV ed EMS per 3 minuti.
3. Accertarsi di impostare l'intensità più bassa al level 1.
4. Se nessuna scolorazione insolita dovuta ad allergie compare sulla pelle entro 24 ore, si può utilizzare il dispositivo senza alcun problema attenendosi alle istruzioni in questo manual operativo.




## **COME USARE IL DISPOSITIVO**

Quando si usa, assicurarsi sempre che l'area di applicazione sia completamente coperta dalla pelle. In caso contrario, il dispositivo non funzionerà correttamente.

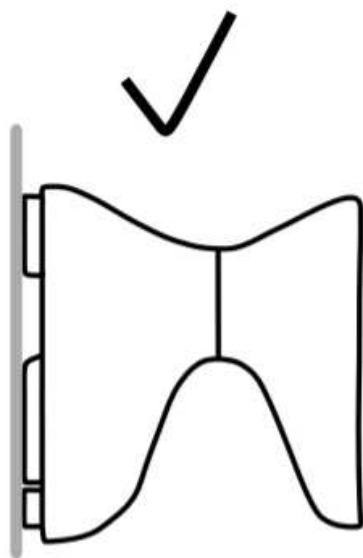

*Uso corretto*

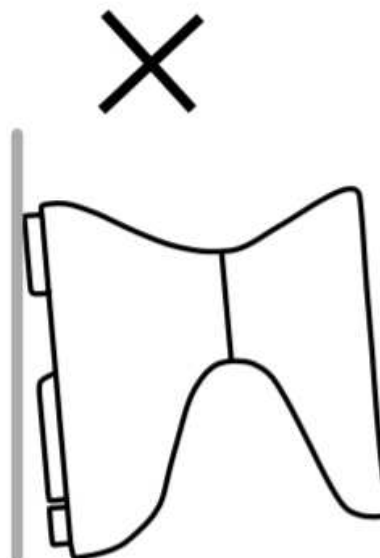


*Uso scorretto*



# TRATTAMENTO IN MODALITA' CORPO

**TECNICA DI MASSAGGIO UNIVERSALE**

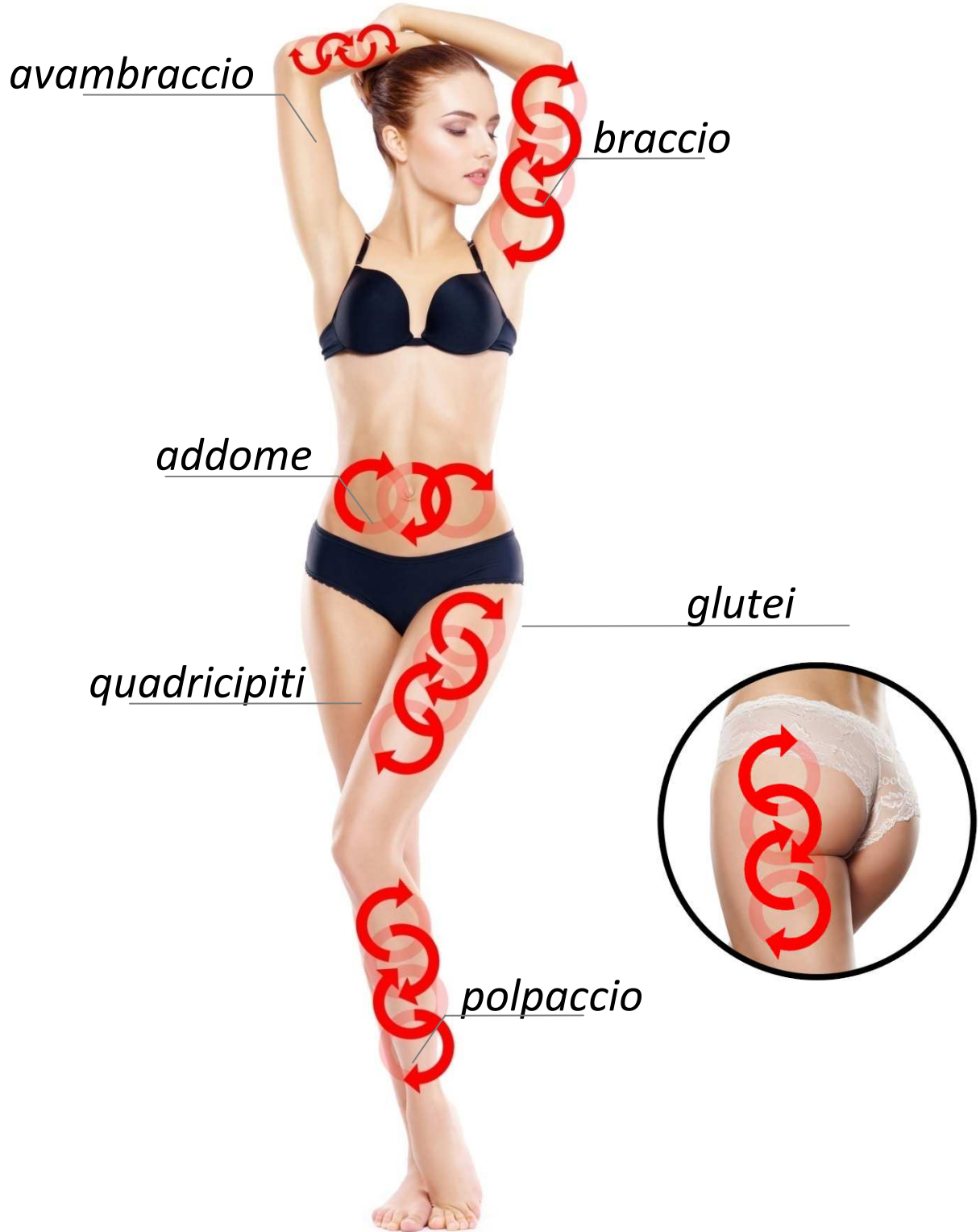

## BRACCIA



*Si metta comodo e rilassi i muscoli delle braccia. Spostare la testa di applicazione del dispositivo verso il braccio. Trattare gradualmente la parte esterna e interna del braccio. Muoviti con brevi movimenti rettilinei come mostrato nell'immagine. Cerchi di concentrarsi su quelle parti del braccio dove c'è più tessuto adiposo.*




*Procedere allo stesso modo del passo precedente. Ora fai dei movimenti circolari di trazione. In questo modo, trattate gradualmente tutto il braccio. Concentrarsi sulla zona di aumento del tessuto adiposo.*



## VITA E PANCIA

*Muovere la testa dell'applicazione con un movimento circolare. Questo tratterà l'intero addome. Cerca sempre di evitare direttamente il punto dell'ombelico. Potete muovervi in senso orario o antiorario.*

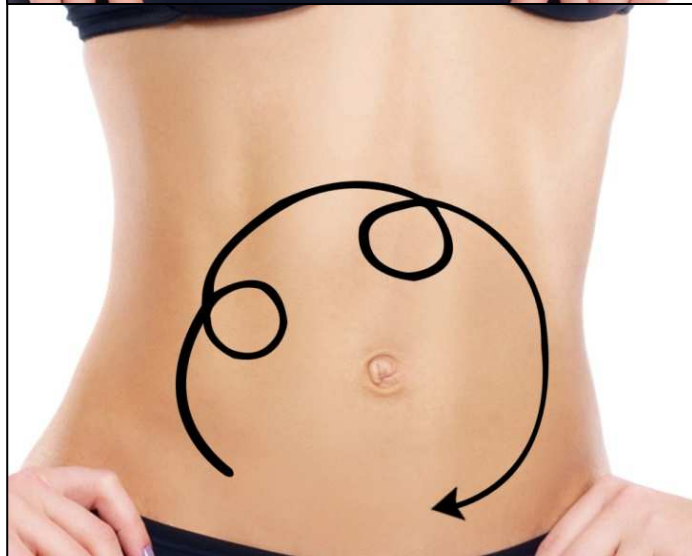

*Muovere la testa dell'applicazione in movimenti lunghi con cerchi più piccoli. Questo tratterà l'intero addome. Cerca sempre di evitare direttamente il punto dell'ombelico. Puoi muoverti in senso orario/antiorario*



*Muovere la testa dell'applicazione in lunghi movimenti circolari. Cercate di concentrarvi sul lato della vita. Procedere dall'alto verso il basso e ripetere questa procedura.*



## GLUTEI


*Muovi la testa dell'applicazione con lunghi movimenti circolari dal centro delle natiche verso l'alto fino alla vita.*



*Muovi la testa di applicazione con lunghi movimenti circolari dal centro delle natiche verso l'alto fino alla vita a forma di U.*



*Muovi la testa dell'applicazione in movimenti lunghi e brevi con un anello nel mezzo del percorso. In questo modo si può trattare tutta la zona dei glutei.*

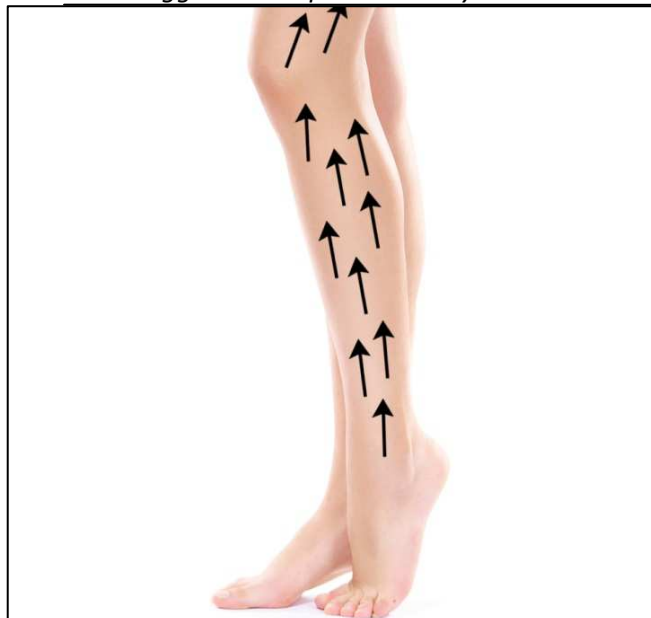

## POLPACCI & STINCHI

*Muovere la testa dell'applicazione con brevi movimenti rettilinei. In modo ottimale dalla parte inferiore a quella superiore.*



*Muovere la testa di applicazione con lunghi movimenti circolari. In modo ottimale dalla parte inferiore dell'arto verso l'alto.*




*Muovi la testa dell'applicazione in un arco. In questo modo, è possibile trattare la parte anteriore e posteriore dell'arto.*



## TRATTAMENTO FACCIALE IN MODALITA' VISO



**FRONTE:** allontanarsi dal centro verso il bordo, coprire gradualmente l'intera area

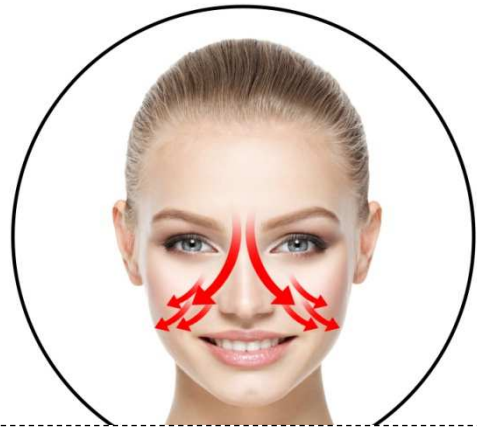


**NASO:** sposta dalla fronte intorno al naso al viso, dall'alto verso il basso



**VISO:** muovi il tuo viso nella direzione dal basso verso l'alto



**MENTO:** muoversi dalla punta del mento lungo i contorni del viso, dal basso verso l'alto

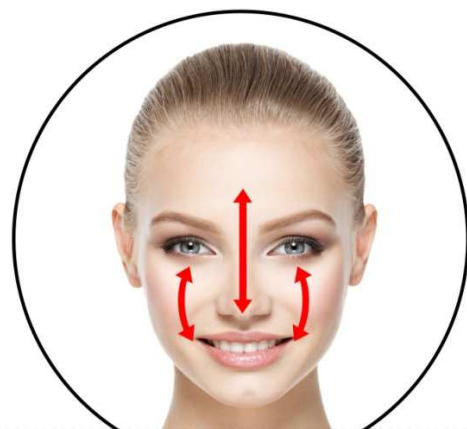

**Zona T:** movimento dalla fronte alla punta del naso e viso, movimento in entrambe le direzioni



**Collo:** muoversi dal mento verso l'orecchio e poi giù fino al collo



## RICARICA DELLA BATTERIA

Il dispositivo ha una batteria ricaricabile incorporata. Non appena la batteria è scarica, il dispositivo si spegne automaticamente. Lo stato della batteria è indicato dall'icona della batteria sul display.

### **Procedura di ricarica:**

1. Inserisci il cavo nell'adattatore AC incluso.
2. Collegare l'altra estremità del cavo all'ingresso sul lato del dispositivo.
3. Il tempo di ricarica dipende dalle condizioni della batteria.
4. Il progresso della carica è indicato dall'icona della batteria sul display.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

L'uso del dispositivo è sempre associato all'applicazione del sonogel. Assicurarsi sempre che la testa di applicazione sia pulita dopo il trattamento. Se il dispositivo viene utilizzato da più di una persona, la superficie della testa di applicazione deve essere disinfettata. Idealmente una soluzione spray alcolica. Non utilizzare detergenti aggressivi. L'umidità non deve MAI entrare nel dispositivo. Dopo la pulizia, asciugare bene la testa d'applicazione. Questo prolungherà notevolmente la sua vita utile.



## RISOLVERE I POSSIBILI PROBLEMI

Problem	Possible cause	Solution
Il dispositivo non può essere acceso	Non hai premuto il pulsante ON / OFF abbastanza a lungo	Tenere premuto il pulsante ON / OFF ancora una volta
	La batteria è scarica	Caricare la batteria
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo alcuni minuti	Batteria scarica	Caricare la batteria
	È necessario un riavvio	Spegnere e riaccendere il dispositivo
Il dispositivo non può essere caricato	Il cavo USB non è collegato correttamente	Ricollegare correttamente il cavo al dispositivo
	La batteria è carica	L'icona della batteria sul display è piena
Non sento gli effetti della radiofrequenza	La pelle è troppo secca	Applicare una quantità maggiore sulla pelle gel di contatto
	Il livello di intensità è basso	Aumentare l'intensità al livello 2
	Muovi la testa dell'applicazione troppo velocemente	Velocità di movimento raccomandata 2-5cm al secondo
	Non ci sono elettrodi di contatto in pieno contatto con la pelle	L'area di contatto del dispositivo deve essere con la pelle in pieno
La radiofrequenza brucia troppo	<b>Rimani con il dispositivo in un posto troppo a lungo</b>	Velocità di movimento raccomandata 2-5cm al secondo
	Gli elettrodi di contatto non sono in pieno contatto con la pelle	L'area di contatto del dispositivo deve essere con la pelle in pieno
	Il livello di intensità è alto	Ridurre l'intensità al livello 1
Non sento gli effetti dello SME	La pelle è troppo secca	Applicare una grande quantità di gel di contatto sulla pelle
	Il livello di intensità è basso	Aumentare l'intensità al livello 2
	Stai muovendo la testa dell'applicazione troppo velocemente	Velocità di movimento raccomandata 2-5cm al secondo
	Non ci sono elettrodi di contatto in pieno contatto con la pelle	L'area di contatto del dispositivo deve essere con la pelle in pieno
Sento troppo gli effetti degli ultrasuoni	Sensazione di vibrazioni e leggero fischio non un malfunzionamento	Questo è un fenomeno di accompagnamento
Il dispositivo genera rumore durante l'uso	Un leggero fischio non è un difetto	Questo è un fenomeno di accompagnamento



## **DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI**

### **Come dovrebbe funzionare correttamente il trattamento in casa?**

Prima di iniziare il trattamento, leggere molto attentamente tutti i dettagli di queste istruzioni per l'uso. Presti particolare attenzione alle controindicazioni. Se non siete sicuri, consultate il vostro medico per l'uso. Studi anche la lista delle parti che sono precisamente definite per il trattamento di cavitazione ultrasonica. Assumere una posizione supina o seduta durante il trattamento. Crei un comfort sufficiente. Indossare qualcosa di più leggero e confortevole.



### **Quali precauzioni devono essere seguite prima e dopo il trattamento?**

Non mangiare cibi pesanti o grassi per almeno 4 ore prima del trattamento. Si consigliano pasti leggeri (ad esempio insalata di verdure, yogurt). Il giorno prima del trattamento, il giorno del trattamento e alcuni giorni dopo il trattamento, aumentare il regime di bere fino a 2-2,5 litri di acqua pulita al giorno. Evitare le acque gassate e zuccherate. Una settimana dopo il trattamento con ultrasuoni, si dovrebbe evitare di consumare alcol, caffeina, nicotina, cibi pesanti e grassi. Tutti questi fattori gravano sul tuo fegato, che è già così appesantito dal filtrare il grasso rilasciato dal tuo corpo. Un ulteriore carico potrebbe portare alla nausea o al deterioramento della salute. Dopo il trattamento, si consiglia un leggero aumento dell'attività fisica. Questo sosterrà significativamente la circolazione del sangue e il metabolismo totale. La stimolazione della circolazione sanguigna e del sistema linfatico sosterrà l'eliminazione dei grassi rilasciati in modo naturale dal corpo.

### **Il trattamento con un apparecchio estetico con funzione di cavitazione ultrasonica fa male?**

Il trattamento è completamente indolore e sicuro se si seguono tutte le istruzioni del manuale d'uso.

### **Come faccio a sapere che la testina di applicazione genera davvero onde ultrasoniche?**

Si può sentire un leggero sibilo durante il trattamento, che emette un ultrasuono. Le persone sensibili possono sentire una leggera sensazione di formicolio. Per verificare la funzionalità delle onde ultrasoniche, applicare una piccola quantità di gocce d'acqua sulla testina di applicazione. Le onde ultrasoniche fanno oscillare le molecole d'acqua.

### **Quali risultati è possibile ottenere?**

Il risultato è significativamente influenzato da diversi fattori. Il grasso rilasciato deve essere elaborato dal corpo. Quanto velocemente viene processato dipende principalmente dal tasso di metabolismo, dal tipo di grasso (se è penetrato nel tessuto muscolare), dalle condizioni del sistema linfatico o dal tuo stile di vita. In condizioni ottimali, può essere una perdita fino a diversi centimetri dopo un trattamento ripetuto mantenendo lo stile di vita di cui sopra. Pensate a un dispositivo estetico con funzione di cavitazione a ultrasuoni come a uno strumento utile per aiutarvi ad avere un aspetto migliore nei vostri sforzi. Per raggiungere gli obiettivi dei sogni, è necessario adattare il suo stile di vita e aumentare il suo movimento (stiamo ancora parlando di attività fisica leggera, niente stress fisico estremo a cui non è abituato). È importante che i processi che il dispositivo estetico nel tuo corpo avvia possano funzionare con successo ed efficienza.

**L'uso di un dispositivo con cavitazione ultrasonica è veramente sicuro?**

Se il dispositivo viene utilizzato sulle parti corrette e gli utenti non incontrano nessuna delle controindicazioni di cui sopra, la cavitazione ultrasonica è completamente sicura. Il grasso rilasciato può essere gradualmente elaborato dall'organismo. La potenza è appositamente regolata in modo da non danneggiare altre cellule e vasi sanguigni. Ricordiamo ancora che il trattamento è sempre associato al sonogel. Le onde ad ultrasuoni possono così aderire sufficientemente alla pelle.

**Quali principi devono essere seguiti per ottenere l'effetto desiderato di perdita di peso?**

Come già detto, è necessario adattare il suo stile di vita e aumentare l'assunzione di liquidi. Può tranquillamente sottoporsi al trattamento con cavitazione ultrasonica dopo 7-10 giorni. Si consiglia di non trattare più di due lotti alla volta. Se si trattano parti più vicine, l'effetto della cavitazione viene moltiplicato. Altrimenti (parti più distanti) l'effetto si divide. Sicuramente cercate sempre di evitare quelle parti del corpo dove ci sono i linfonodi - vedi. visualizzazione grafica in queste istruzioni operative, sezione: **LINFONODI**. Qualsiasi fugace movimento casuale non ha importanza. Tuttavia, la testa dell'applicazione non deve stimolare direttamente queste parti selezionate. Il corretto funzionamento dei linfonodi e la stimolazione a lungo termine con le onde ultrasoniche non sono compatibili.

**Qual è la ragione per la cura della testa di applicazione dopo ogni uso?**

The contact head must be thoroughly cleaned of contact gel. Cleaning will prevent possible penetration into the device and ensure the best possible hygiene of the operation.

**Il dispositivo può essere usato da più di una persona?**

Sì, è possibile, ma a certe condizioni. Prestare particolare attenzione soprattutto alla disinfezione della testa di applicazione. Si eviterà la trasmissione di batteri o malattie della pelle. L'ideale sarebbe usare una soluzione spray di alcool per la disinfezione. Asciugare sempre accuratamente la superficie della testa di applicazione.

**Quanto deve durare un trattamento individuale della pelle?**

La durata raccomandata del trattamento individuale non dovrebbe superare i 15 minuti.

**Il dispositivo è un dispositivo medico?**

Il dispositivo non è un dispositivo medico. Appartiene alla categoria dei dispositivi di massaggio. Il dispositivo non tratta l'obesità o qualsiasi altra malattia. Il dispositivo fornisce tecnologie che aiutano a combattere la riduzione del grasso sottocutaneo.

**Il dispositivo ha qualche certificazione?**

Dispositivo per la certificazione europea standard. Soddisfa tutte le norme che sono poste sui dispositivi di questo tipo. Se necessario, ci contatti all'indirizzo e-mail: mh@santadria.cz Le invieremo la dichiarazione di conformità per via elettronica.

**Dove viene prodotto il dispositivo?**

Facciamo produrre il dispositivo in Cina secondo le nostre esigenze e specifiche. Garantiamo la garanzia standard e il servizio post-garanzia.

**Il dispositivo è impermeabile?**

No non lo è. Nessuna parte dell'apparecchio è destinata al lavaggio sotto l'acqua corrente.

## **SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE**



Questo simbolo sui prodotti o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Per un corretto smaltimento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questi prodotti nei punti di raccolta designati. In alternativa, in alcuni paesi dell'Unione Europea o in altri paesi europei, è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale acquistando un prodotto nuovo equivalente. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a risparmiare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti. Contattare le autorità locali o il punto di raccolta più vicino per maggiori dettagli. Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Per smaltire questo prodotto, chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

## **CERTIFICAZIONE**

**CE** Il prodotto è approvato per l'uso nell'Unione Europea e ha il marchio CE. La dichiarazione di conformità e tutta la documentazione sono disponibili presso l'importatore.

## **IMPORTATORE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 Repubblica Ceca  
ID azienda: 29195454

Se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Firmato qui sotto, in rappresentanza della società

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

dichiara, in qualità di importatore nell'UE, che il prodotto con il nome commerciale sotto riportato

## Massaggiatore corporale

lanciato con il nome del modello: **BeautyRelax Celluform Optimal BR-2220**

EAN: **8594166118980**

appartenente al gruppo BeautyRelax gruppo prodotti **BeautyRelax**

è **conforme** alle seguenti norme europee:

**EN 55014-1: 2017 EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015**

**EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017 EN 62233: 2008**

**EN 60335-2-23: 2003+A1: 2008+A11: 2010+A2:2015**

I dettagli sono rilasciati nei rapporti di prova: **TB191124289 + TB191124288**

**Sulla base della conformità a queste linee guida, il prodotto è stato marcato CE.**

Il prodotto è anche conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE (RoHS). Tutti i materiali non sono dannosi per la salute. Non contengono metalli pesanti, come il cadmio e altre sostanze tossiche.

Per un uso sicuro, è necessario seguire rigorosamente le istruzioni fornite nelle istruzioni per l'uso che sono incluse nella confezione.



.....  
Martin Hrbek, direttore

Luogo di pubblicazione: Brno Data: 1.4.2021