

ISTRUZIONI PER L'USO

Macchina per il vuoto per massaggi
BeautyRelax modello BR-1920

VACUFORM PREMIUM



CONTENUTO:

SCOPO DELL'USO	4
AVVISO	4
CONTROINDICAZIONI	5
AREE DI TRATTAMENTO VIETATE	5
INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA DEL DISPOSITIVO	6
MASSAGGIO A VUOTO LOCALE	6
LIVELLI DI INTENSITÀ DI ASSUNZIONE	7
VANTAGGI PRINCIPALI	7
COSA CI SI PUÒ ASPETTARE UTILIZZANDOLO	7
PARAMETRI TECNICI	7
CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO	7
DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO	8
DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO	10
RICARICA DELLA BATTERIA	11
CONTROLLO DEL DISPOSITIVO	11
COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO	12
AREE DI TRATTAMENTO CONSENTITE	15
DURATA DEL TRATTAMENTO	16
PULIZIA E MANUTENZIONE	16
COLORAZIONE DELLA BANDIERA	16
PAD FILTRO	17
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI	18
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE	20
CERTIFICAZIONE	20
SPEDIZIONE	20

Gentile cliente, grazie per la fiducia accordata all'acquisto del nostro prodotto. Leggere attentamente tutte le informazioni dettagliate contenute nel manuale di istruzioni prima di utilizzarlo per la prima volta. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il dispositivo esattamente come indicato nelle istruzioni. Tutti questi passaggi contribuiranno a massimizzare l'uso di tutte le funzioni dello strumento. In questo manuale cercheremo di fornire un'idea ottimale della tecnologia utilizzata e di come utilizzare lo strumento nel modo migliore.

In caso di incertezze durante la lettura delle istruzioni, non esitate a contattarci al seguente indirizzo e-mail: mh@santadria.cz

Conservare con cura le istruzioni per l'uso per una successiva consultazione.

SCOPO DELL'USO

Il massaggio a vuoto è da tempo uno dei metodi di massaggio più utilizzati e popolari tra i massaggiatori professionisti e i centri di riabilitazione. Ha guadagnato popolarità grazie ai suoi effetti benefici sul sistema linfatico. L'apparecchio per massaggi Vacuform offre il metodo di trattamento del corpo da parte di professionisti nel comfort della propria casa. Il dispositivo Vacuform è progettato per il massaggio locale di parti selezionate del corpo. Il massaggio viene effettuato secondo il principio del vuoto. È possibile regolare autonomamente la forza del vuoto. Il trattamento non è invasivo, sicuro e indolore. L'uso prolungato contribuisce in modo significativo a migliorare la funzione del sistema linfatico. Il Vacuform non è un dispositivo medico. Appartiene alla categoria dei dispositivi di massaggio non invasivo.

AVVISO

- Leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente in cui possono essere presenti fumo, polvere, sporcizia o acqua.
- è vietato utilizzare il dispositivo in bagno
- seguire esattamente la durata e il metodo di trattamento
- non combinare il dispositivo con un dispositivo simile di un altro produttore
- se durante l'uso si avvertono anomalie, spegnere il dispositivo e consultare il medico
- quando non viene utilizzato per lungo tempo, non lasciare il dispositivo collegato al cavo di alimentazione USB
- Non piegare il cavo di alimentazione USB; non appoggiare sul dispositivo oggetti appuntiti, pesanti o bagnati.
- Evitare il contatto con oggetti come candele, sigarette, alcolici durante l'utilizzo del dispositivo.
- Se il dispositivo presenta problemi tecnici, utilizzare il modulo di contatto all'indirizzo www.beautyrelax.cz.
- Non tentare di smontare o riparare l'unità da soli: si rischia di ferirsi e di invalidare la garanzia.
- se si verifica una di queste situazioni, non utilizzare mai il dispositivo:
 - il cavo di alimentazione è danneggiato
 - l'acqua è entrata nel dispositivo
 - un oggetto pesante è caduto sul dispositivo o il dispositivo è caduto a terra da una grande altezza
- non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di altre apparecchiature elettriche
- assicurarsi che il dispositivo e tutti i suoi componenti siano sempre asciutti
- dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo con un panno delicatamente inumidito nella soluzione alcolica e asciugare completamente con un altro panno



CONTROINDICAZIONI

In nessun caso il dispositivo **deve** essere utilizzato da persone affette da una delle seguenti condizioni:

- Cancro, epilessia, diabete, malattie virali
- In uno stato di febbre alta
- Grave malattia renale o epatica
- Colesterolo alto
- Gravi malattie della pelle
- Sindrome da affaticamento
- Malattie cardiache, pacemaker, ipertensione
- Impianti metallici nel corpo
- Disturbi vascolari o arteriosclerosi
- Gravidanza
- Mestruazioni
- Persone che assumono farmaci anti coagulanti
- Pazienti che hanno subito un intervento chirurgico con trapianto
- Le persone che necessitano di una supervisione costante possono utilizzare il dispositivo solo dopo aver consultato un medico.



***Raccomandazione:** il massaggiatore Vacuform agisce sul sistema linfatico e sulla circolazione sanguigna. In caso di diagnosi medica di scarsa funzionalità del sistema linfatico, di malattie cardiache o di pressione alta, consultare il medico per il primo utilizzo della macchina.*

AREE DI TRATTAMENTO VIETATE

- Testa
- Collo (anteriore e posteriore)
- L'area in cui si trova il cuore
- Ascelle
- Gomito
- Polso
- Ginocchia
- Caviglia
- Palme
- Piedi
- Area del ginocchio
- Colonna vertebrale



INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA DEL DISPOSITIVO

Il massaggiatore BeautyRelax Vacuform Premium è una soluzione moderna e veramente funzionale nella lotta contro la cellulite. Il dispositivo definitivo per il massaggio intensivo del corpo sottovuoto. I 6 livelli di calore riscaldano a fondo la superficie della pelle. Trattare le aree problematiche come in un centro massaggi. Il design del dispositivo è identico a quello dei dispositivi di massaggio professionali!



MASSAGGIO A VUOTO LOCALE

Il massaggio linfatico è uno dei metodi più efficaci per ridurre l'aspetto della cellulite. L'impastamento ritmico dei muscoli assicura il corretto flusso della linfa nel corpo. Contribuisce alla rimozione delle impurità dal sangue. Grazie alla vacuum terapia, il corpo può liberarsi di gonfiori indesiderati e dell'antiestetica pelle arancione.



LIVELLI DI INTENSITÀ DI ASSUNZIONE

Il massaggiatore BeautyRelax Vacuform Premium offre 6 livelli di forza di aspirazione. Ogni parte del corpo richiede un applicatore di dimensioni diverse e un'impostazione diversa della potenza di aspirazione. Potenza superiore per un massaggio intensivo davvero profondo. L'aspirazione più delicata è apprezzata sulle parti del corpo più piccole, con una maggiore sensibilità al tatto.



VANTAGGI PRINCIPALI

- Natura completamente non invasiva del trattamento
- Utilizzo sicuro e indolore
- Senza alcun disagio
- Un massaggio a vuoto davvero funzionale

COSA CI SI PUÒ ASPETTARE UTILIZZANDOLO

- Miglioramento immediato della circolazione sanguigna e del metabolismo dell'area trattata
- La pelle è più elastica e morbida al tatto
- Con l'uso regolare e una dieta adeguata, i sintomi della cellulite si attenuano
- Modellamento e rassodamento di cosce, glutei e addome

PARAMETRI TECNICI

- Riscaldamento: 6 livelli
- Aspirazione: 6 livelli
- Tensione di funzionamento: 5 V
- Potenza: 24W
- Ricarica: batteria agli ioni di litio integrata
- Alimentazione: cavo USB (incluso)
- Dimensioni: 34x24x10cm
- Peso: 900 g


CONTENUTO

DELL'IMBALLAGGIO

- 1x Massaggiatore sottovuoto BeautyRelax modello BR-1920 VACUFORM PREMIUM
- 1 cavo di ricarica USB
- 1x Set di pastiglie filtranti di ricambio e tappo in gomma
- 1x Istruzioni per l'uso



DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

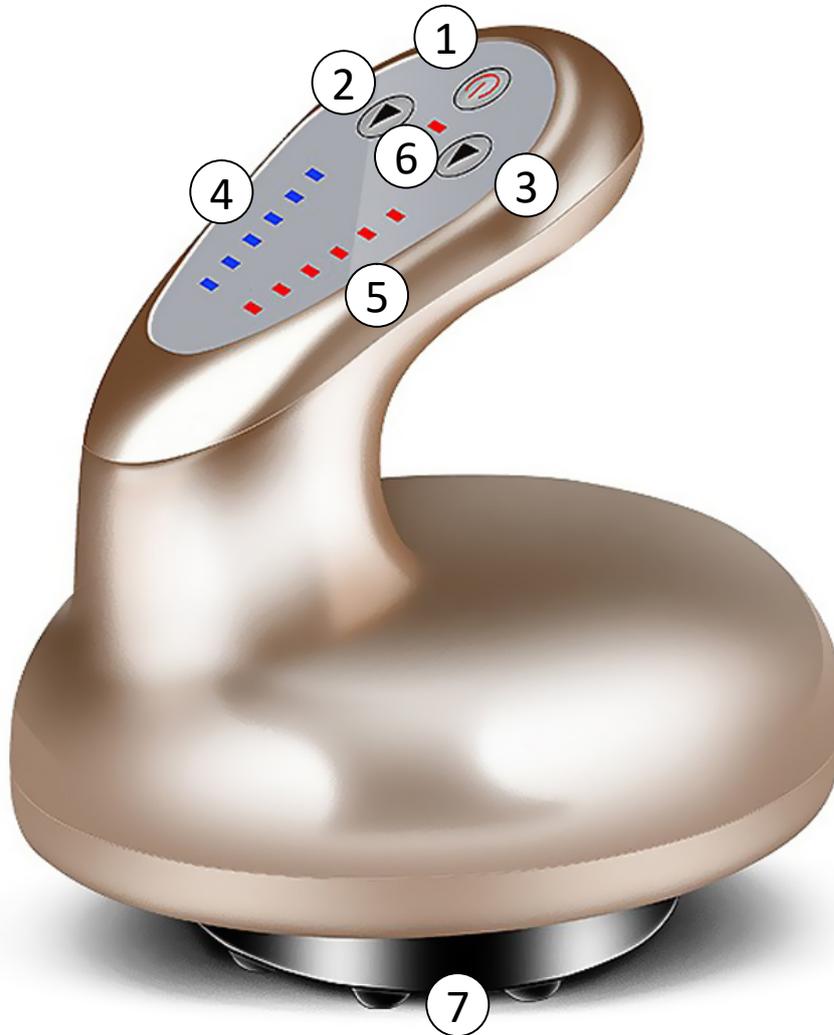


1. Pulsante **ON/OFF**
2. Pulsante di regolazione della forza del vuoto
3. Pulsante di impostazione del riscaldamento
4. Indicatore della forza del vuoto
5. Indicatore del livello di calore
6. Indicatore di funzionamento dello strumento
7. Testa di applicazione (a contatto con la pelle)

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO



- 1. Sporgenze arrotondate di massa*
- 2. Fonte di calore*
- 3. Area di aspirazione del vuoto*

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

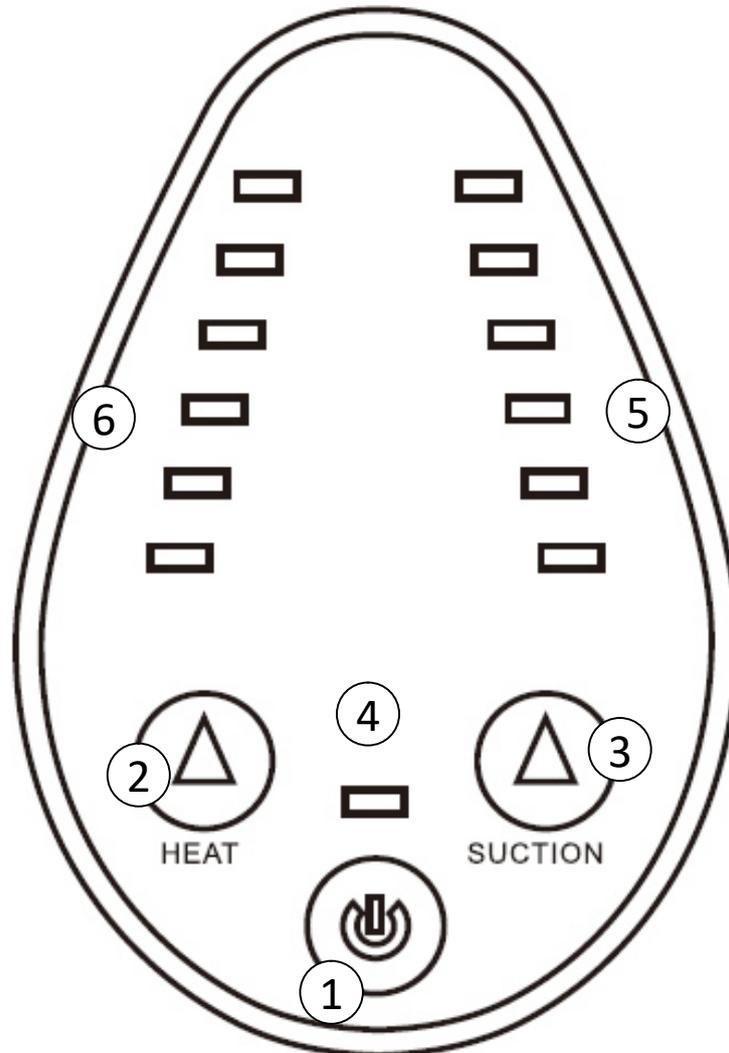

1. Pulsante **ON/OFF**
2. Pulsante **HEAT**
3. Pulsante **SUCTION**
4. Indicatore di funzionamento dello strumento
5. Indicatore del livello di aspirazione del vuoto
6. Indicatore del livello di esposizione al calore

RICARICA DELLA BATTERIA

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata.

Procedura di ricarica:

1. Per la ricarica, utilizzare il cavo di alimentazione incluso nella confezione.
2. Collegare l'altra estremità a una porta USB del computer o del portatile.
3. La durata della carica dipende dalle condizioni attuali della batteria.
4. Il processo di carica della batteria è accompagnato da una luce lampeggiante.
5. Quando la batteria è carica, la luce si spegne.

***Nota:** non collegare il cavo di ricarica a un adattatore di rete da 220V. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e invalidare la garanzia. Utilizzare esclusivamente la porta USB del computer o del portatile come fonte di alimentazione.*

CONTROLLO DEL DISPOSITIVO

1. Accendere il dispositivo con il tasto **ON/OFF**.
2. Utilizzare il pulsante **SUCTION** per attivare l'aspirazione. La forza del vuoto inizia prima al livello 1, il più basso.
3. Premendo ripetutamente il pulsante **SUCTION**, la potenza di aspirazione aumenta gradualmente. La gamma va da 1 (minimo) a 6 (massimo). Se l'indicatore del livello di forza del vuoto non si accende, questa funzione è disattivata.
4. Utilizzare il pulsante **HEAT** per attivare la funzione di riscaldamento. Il riscaldamento inizierà dal livello 1, il più basso.
5. Premendo ripetutamente il tasto **HEAT**, il livello di calore aumenta gradualmente. La gamma va da 1 (minimo) a 6 (massimo). Se l'indicatore del livello di calore non è acceso, questa funzione è disattivata.
6. È possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento utilizzando il pulsante **ON/OFF**.

***Nota:** quando si inizia a utilizzare l'unità, partire dal livello più basso 1 per entrambe le funzioni **SUCTION** e **HEAT**. Lo strumento raggiunge prestazioni davvero elevate ai livelli più alti.*

COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

- La pelle deve essere accuratamente pulita prima di ogni utilizzo. L'ideale è programmare il trattamento dopo un bagno completo.
- Applicare un leggero strato di crema per la pelle, di crema anticellulite o di qualsiasi tipo di **olio essenziale per massaggi** sulla zona da trattare. Il motivo principale è il miglior movimento del bulbo massaggiante sul corpo. Inoltre, durante il massaggio, questi prodotti hanno una migliore capacità di assorbimento nel tessuto sottocutaneo. **NON utilizzare il dispositivo senza una preparazione simile.**


***Attenzione:** fare sempre attenzione a non far assorbire crema o olio dalla macchina. In caso contrario, lo strumento potrebbe subire danni immediati. Utilizzare una quantità che lo strumento non ha alcuna possibilità di assorbire. È sufficiente applicare solo uno strato molto sottile sulla pelle.*

movimento massaggio

Muovete il dispositivo sul corpo con tratti più o meno lunghi - vedi figura. Con la mano libera, distendere la pelle il più possibile. Il movimento sulla pelle sarà molto più semplice. Assicurarsi sempre che la pelle sia **idratata il più possibile** con creme o oli. **Non utilizzare mai il dispositivo per massaggiare a secco.** È importante impostare la **forza di aspirazione al livello più basso possibile** quando si esegue un massaggio di movimento. Se il dispositivo risucchia una parte del corpo troppo forte, non sarà possibile spostarlo.

massaggio puntiforme

Il massaggio dei punti consiste nel trattamento di una parte specifica del corpo - vedi immagine. Accendere il dispositivo e applicare l'applicatore sulla pelle. Selezionare il livello di aspirazione del vuoto al livello più basso e aggiungere gradualmente. Con il massaggio spot, la pelle può arrossarsi dopo il trattamento. Se l'aspirazione è troppo forte, sulla pelle possono comparire lievi gonfiori o lividi, che scompariranno completamente nel giro di pochi giorni. Iniziare sempre con un'intensità di vuoto inferiore e aumentare gradualmente in base alle proprie sensazioni. **Non iniziare subito con l'impostazione più alta!**

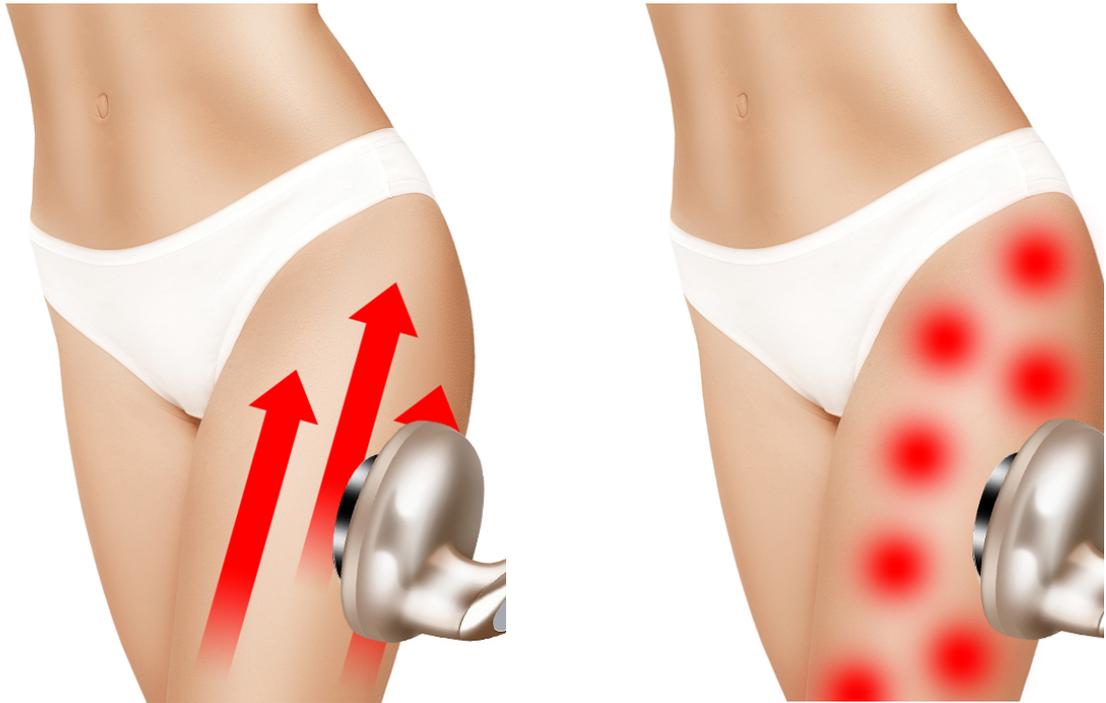

Seguire la visualizzazione grafica sottostante per trattare altre parti del corpo. La differenza tra movimento e massaggio puntuale non sta solo nella diversa tecnica, ma nell'effetto sul corpo. In particolare, il **massaggio di movimento** aiuta a migliorare la funzione linfatica. Il corpo riesce a drenare meglio l'acqua in eccesso dagli arti. Con un **massaggio puntuale** si stimola la circolazione sanguigna locale, che contribuisce a un metabolismo complessivamente più efficiente e all'eliminazione delle sostanze nocive. Ideale per le zone con segni di cellulite (pelle arancione). Il massaggio dei punti viene utilizzato anche per il massaggio del seno.




movimento massaggio



massaggio puntiforme

AREE DI TRATTAMENTO CONSENTITE

- avambracci
- armi
- pancia
- cosce
- culo
- vitelli

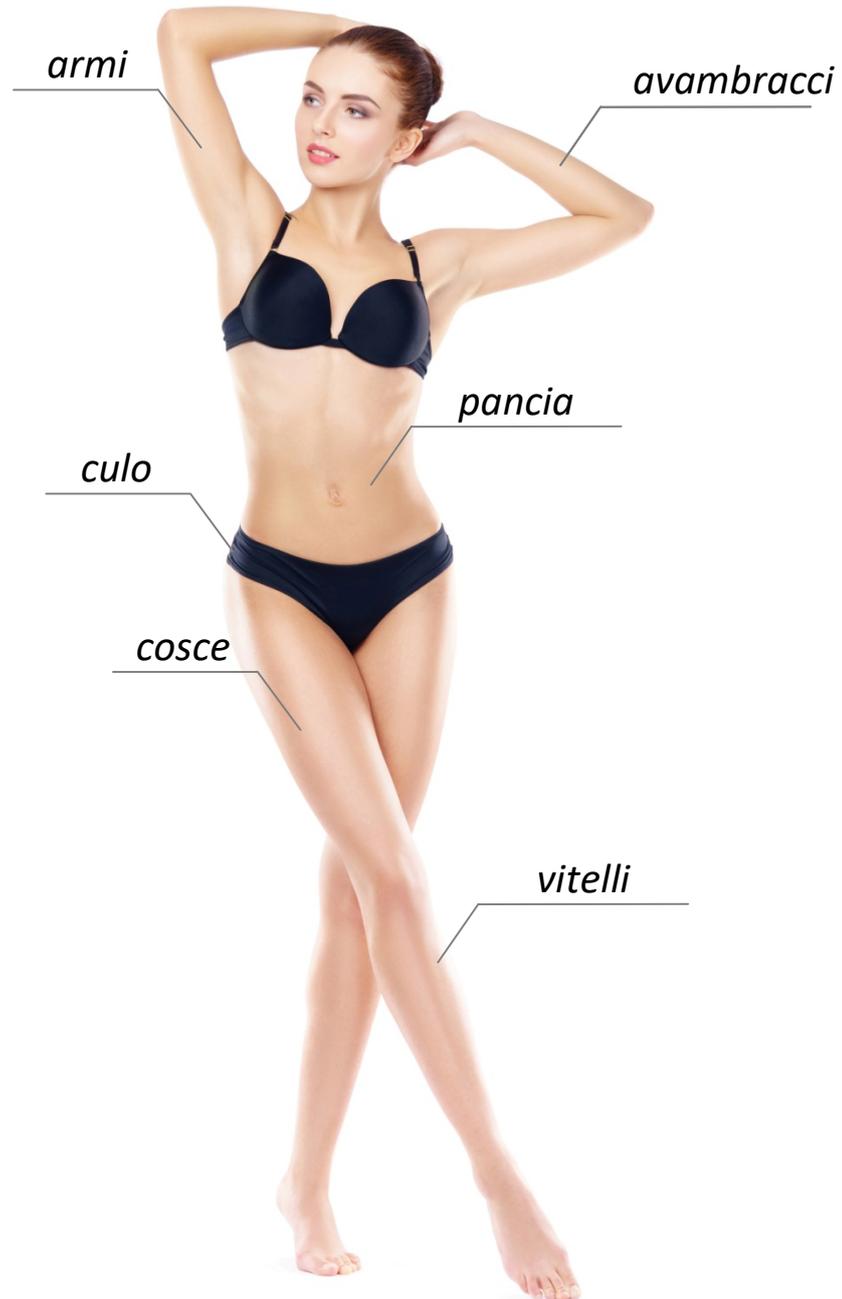

DURATA DEL TRATTAMENTO

Si consiglia un trattamento massimo di 15-20 minuti per ogni parte. È possibile combinare il trattamento delle parti come si desidera. Si consiglia di distribuire il massaggio del corpo nell'arco della settimana. Una parte è considerata come (un braccio, una coscia, un polpaccio, ecc.).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire accuratamente l'interno dell'applicatore dopo ogni utilizzo. Non utilizzare detergenti aggressivi. Si consiglia l'uso di speciali spray disinfettanti, comunemente utilizzati, ad esempio, nei centri sanitari o nei saloni di bellezza per la pulizia degli strumenti. Utilizzare questo prodotto solo per la pulizia dei flaconi sostituibili. L'umidità non deve MAI penetrare nello strumento. Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di sporco all'interno dell'applicatore. Potrebbero essere risucchiati dallo strumento durante l'uso.

COLORAZIONE DELLA BANDIERA

Il massaggio sottovuoto può causare macchie rosse o addirittura lividi sulla pelle (se si utilizza un massaggio sottovuoto molto forte). Si tratta di un fenomeno del tutto naturale. Nel corso di alcune ore (a seconda della potenza del massaggio a vuoto) la decolorazione scomparirà gradualmente. Ai livelli più alti di massaggio a vuoto, le macchie rosse possono trasformarsi in lividi. In questo caso, il ritorno al colore naturale della pelle richiede più tempo.



PAD FILTRO

Un cuscinetto di schiuma viene posizionato nella parte inferiore del dispositivo, all'interno dell'applicatore, vicino alla fonte di vuoto. Si tratta di un elemento importante per evitare la formazione di impurità all'interno del dispositivo. Controllare regolarmente le condizioni del cuscinetto di schiuma. Non deve essere deformato o influenzato dall'aumento dell'umidità. In questo caso, è necessario sostituirlo con uno nuovo.



Procedura di sostituzione del filtro a tampone:

1. Rimuovere il coperchio di gomma sul fondo del dispositivo all'interno dell'applicatore.
2. Rimuovere il filtro usato.
3. Inserire un nuovo filtro a tampone. La forma del tampone è stata appositamente adattata. Non è quindi possibile inserirlo in modo errato.
4. Riposizionare il coperchio di gomma. Fare molta attenzione a reinserire completamente il coperchio di gomma.

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI

Come si può eseguire correttamente il trattamento in ambiente domestico?

Prima di iniziare il trattamento, leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale. Prestare particolare attenzione alle controindicazioni. In caso di dubbi, consultare il proprio medico di base. Studiate anche l'elenco delle aree definite con precisione per il massaggio a vuoto. Durante il trattamento, adottare una posizione sdraiata o seduta. Mettetevi comodi. Indossate qualcosa di più leggero e comodo.

Quali sono le precauzioni da prendere prima e dopo il trattamento?

Non mangiare cibi pesanti o grassi per almeno 4 ore prima del trattamento. Si consigliano pasti leggeri (ad es. insalata di verdure, yogurt). Il giorno prima del trattamento, il giorno del trattamento e per alcuni giorni dopo il trattamento, aumentare il consumo di 2-2,5 litri di acqua pura al giorno. Evitare le acque gassate e zuccherate. Per una settimana dopo il trattamento a ultrasuoni, è necessario evitare alcol, caffeina, nicotina, cibi pesanti e grassi.

Il trattamento con l'apparecchio per il massaggio fa male?

Il trattamento è completamente indolore e sicuro se si seguono le istruzioni del manuale. Quando si regola la forza di aspirazione, iniziare sempre dall'impostazione più bassa.

Posso usare il massaggiatore senza un precedente trattamento della pelle?

Prima di utilizzare il massaggiatore, è essenziale applicare un qualsiasi tipo di lozione o olio sulla pelle. È sufficiente creare uno strato di contatto tra l'applicatore e la pelle. Il movimento dell'applicatore sarà molto più semplice. Inoltre, i principi attivi delle creme e degli oli saranno massaggiati efficacemente nel tessuto sottocutaneo.

Cosa posso aspettarmi dall'uso del massaggiatore?

L'uso regolare rende la pelle più soda e liscia, soprattutto nelle zone colpite dagli effetti negativi della cellulite. Nella cellulite, il volume delle cellule adipose sottocutanee aumenta e queste vengono spinte contro la superficie della pelle, formando antiestetiche fossette che ricordano la consistenza della buccia d'arancia. Il massaggio con il dispositivo migliora il flusso della linfa per rimuovere le impurità dal sangue. Con questa tecnica delicata è possibile alleviare il gonfiore del corpo e risolvere problemi di salute che sarebbero danneggiati da un massaggio sportivo e ricreativo tradizionale.

È sicuro usare il massaggiatore?

Il massaggiatore non ha bordi taglienti. Non deve ferirvi in alcun modo. Tuttavia, prestare particolare attenzione all'impostazione della forza di aspirazione del vuoto. Iniziare con un'impostazione bassa e aumentare gradualmente in base alla propria percezione. L'aumento dell'intensità dell'aspirazione può provocare un lieve gonfiore o un'ecchimosi, che dovrebbe attenuarsi nel giro di ore o giorni. La pelle può diventare rossa al termine del trattamento. Tuttavia, anche questo effetto scomparirà da solo.

Qual è il motivo della pulizia/disinfezione della testina di applicazione?

L'applicatore deve essere pulito accuratamente dopo l'uso. La pulizia impedisce la penetrazione nel dispositivo e garantisce la massima igiene di funzionamento.

Quanto tempo deve durare un trattamento cutaneo individuale?

La durata del trattamento consigliata per una parte dovrebbe essere compresa tra 10 e 15 minuti. Per lotto si intende (un braccio, una coscia, un polpaccio, ecc.).

In quali casi non si deve utilizzare il dispositivo?

Nel presente manuale di istruzioni, il passaggio "controindicazioni" elenca le limitazioni sanitarie in cui il dispositivo non può essere utilizzato. Prestare particolare attenzione ad eventuali difetti della pelle. Prestare attenzione al completamento del trattamento. In seguito, non è un problema utilizzare nuovamente il dispositivo.

Il dispositivo è un dispositivo medico?

No, non lo è. Appartiene alla categoria dei dispositivi per il massaggio.

Cosa devo fare se la batteria perde capacità dopo un lungo periodo di tempo?

Se la capacità della batteria diminuisce in modo significativo con il passare del tempo, non esitate a contattarci all'indirizzo: mh@santadria.cz Vi invieremo informazioni su come sostituire la batteria.

Il dispositivo dispone di una certificazione?

Strumento per la certificazione europea standard. Soddisfa tutti gli standard previsti per gli strumenti di questo tipo. In caso di necessità, contattateci all'indirizzo: mh@santadria.cz Vi invieremo la dichiarazione di conformità in formato elettronico.

Dove viene prodotto il dispositivo?

Lo strumento viene fabbricato in Cina secondo i nostri requisiti e le nostre specifiche. Garantiamo la garanzia standard e l'assistenza post-garanzia.

Il dispositivo può essere utilizzato da più di una persona?

In primo luogo non lo raccomandiamo. Tuttavia, se si tratta di un familiare e si segue il processo di pulizia e disinfezione delle fiaschette dopo ogni trattamento, l'altra persona può utilizzare il dispositivo.

Il dispositivo è impermeabile?

Non lo è.

SMALTIMENTO DI MATERIALE ELETTRICO USATO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Questo simbolo sui prodotti o nei documenti di accompagnamento indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere aggiunti ai normali rifiuti urbani. Per un corretto smaltimento, ricondizionamento e riciclaggio, portare questi prodotti nei punti di raccolta designati. In alternativa, in alcuni Paesi dell'Unione Europea o in altri Paesi europei, è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale acquistando un prodotto nuovo equivalente. Smaltendo correttamente questo prodotto, si contribuisce a preservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio dei rifiuti. Per ulteriori dettagli, contattare l'autorità locale o il punto di raccolta più vicino. Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di ottenere le informazioni necessarie sul metodo di smaltimento corretto dalle autorità locali o dal rivenditore.

CERTIFICAZIONE



Il prodotto è approvato per l'uso nei Paesi dell'Unione Europea e reca il marchio CE. La dichiarazione di conformità e tutta la documentazione sono disponibili presso l'importatore.

SPEDIZIONE

SANTADRIA s.r.o. , Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci:

Email: mh@santadria.cz

Con riserva di errori di stampa, caratteristiche e modifiche dei parametri tecnici.