



GuSha5

KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ NA ZPEVNĚNÍ
POKOŽKY KRKU A OBLIČEJE

Před použitím si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku

ČESKY

► **Obsah**



| | |
|-------------------------------|-----|
| Obsah | 1 |
| Technická specifikace | 2 |
| Popis dílů | 2/3 |
| Funkce | 3 |
| Indikace | 4/5 |
| Jak používat | 5/6 |
| Bezpečnostní upozornění | 6/7 |
| FAQ | 8 |
| Schéma obvodu | 9 |

► **Technická specifikace**

| Č. | Položka | Jednotka | Specifikace |
|----|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | Provozní napětí | V | 3,7V |
| 2 | Jmenovitý výkon | W | 5W |
| 3 | Provozní doba pro každý režim | min | 6 minut |
| 4 | Typ baterie | / | 500 mAh Lithiová baterie 3,7V |
| 5 | Voděodolnost | / | IPX5 |
| 6 | Doba nabíjení | H | <4H |

► **Popis dílů**

- ① Magnetický kryt ② 4 Masážní kuličky ③ Zakřivená masážní hlava
- ④ LED kontrolka ⑤ Kontrolka režimu ANTI-AGING
- ⑥ Světelný indikátor režimu BRIGHTEN ⑦ Indikátor napájení
- ⑧ Tlačítko On/Off/Mode ⑨ Port DC nabíjení
- ⑩ Silikonový kryt
- ⑪ Čisticí hadřík
- ⑫ DC USB kabel
- ⑬ Pouzdro
- ⑭ Jehla

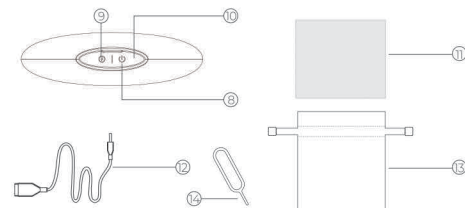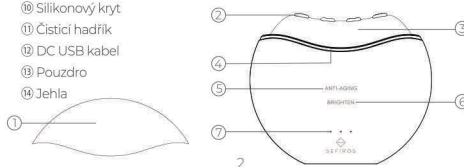

POZNÁMKA: Zařízení má vestavěnou lithiovou baterii napájenou stejnosměrným proudem
Nabíjejte pouze nabíjecím kabelem (součástí balení).

► **Funkce**

GuSha5 RF zařízení pro zpevnění pleti kombinuje RF (Radio Frequency), EMS, červené světlo LED a multifrekvenční vibrační technologie, se 4 masážními kuličkami a speciální zakřivenou masážní hlavici.

Unikátní Hallův magnetický spinač. Produkt působí na obličej a krk a zlepšuje mikrocirkulaci pokožky tím, že hloubkově posiluje kolagen, k dosažení efektu stažení světlých linek, liftingu obrysů a rozjasnění pleti.

*Jemný/silný režim ANTI-AGING

RF a vysokofrekvenční vibrace pomáhají aktivovat kolagen, zlepšují krevní oběh a zjemňují vrásky.

*BRIGHTEN Jemný/silný režim

RF, EMS a červené LED světlo s vysokofrekvenčními vibracemi pomáhají zvednout kontury obličeje a krku a zároveň regenerují kolagen.

► **Indikace**

| Č. | položka | Indikace |
|----|---------------|--|
| 1 | ON | 1. Jemný režim ANTI-AGING: Sejměte magnetický kryt nebo stiskněte tlačítko ON/OFF na 1s. S pípnutím začne jemný režim ANTI-AGING pracovat s nízkofrekvenčními vibracemi a RF a rozsvítí se bílá kontrolka. 2. ANTI-AGING Silný režim: Stiskněte tlačítko ON/OFF pro přepnutí režimu. ANTI-AGING Strong Mode začne pracovat s vysokofrekvenčními vibracemi a RF a rozsvítí se oranžová kontrolka. 3. BRIGHTEN Jemný režim: Stiskněte tlačítko ON/OFF pro přepnutí režimu. BRIGHTEN Gentle Mode začne pracovat s nízkofrekvenčními vibracemi a červeným LED světlem, EMS na 2 masážních bodech a RF na 2 masážních bodech a rozsvícením bílého indikátoru. 4. BRIGHTEN Silný režim: Stiskněte tlačítko ON/OFF pro přepnutí režimu. BRIGHTEN Strong Mode začne fungovat s vysokofrekvenčními vibracemi a červeným LED světlem, EMS na 2 masážních bodech a RF na 2 masážních bodech a rozsvícením oranžového indikátoru. |
| 2 | OFF | Nasadte magnetický kryt nebo stiskněte tlačítko On/Off na 1s ve všech režimech zařízení se s pípnutím vypne. |
| 3 | Slabá baterie | 1. Když zařízení funguje a napájení je dostatečné, svítí 3 kontrolky. 2. Když je baterie nižší než 10 %, kontrolky budou nepřetržitě blikat zleva doprava. 3. Když je baterie vybitá, 3 kontrolky 2x zablikají a potom se vypnou. |

| | | |
|---|------------|--|
| 4 | Nabíjení | 3 kontrolky nepřetržitě blikají zleva doprava. |
| 5 | Plně nabit | 3 kontrolky napájení svítí. |

► Jak používat

Následuje ukázkový postup (obrázek a text níže), můžete si vybrat jakýkoli režim, který chcete použít, podle "Functions"



1. Naneste správné množství gelu na obličej a krk.



2. Zapněte zařízení a vyberte režim ANTI-AGING nebo BRIGHTEN



3. Nasadte masážní kuličky na pokožku obličeje a krku, pomalu se pohybujte vzhůru konstantní rychlostí.



4. Každou 1 minutu se ozve pípnutí, které připomíná změnu oblasti. A zařízení se vypne za 6 minut.



5. Očistěte masážní kuličky a poté nasadte kryt pro uložení.


Tipy:

1. Pomocí funkce paměti zařízení obnoví režim, který jste použili naposledy.
2. Tovární nastavení je ANTI-AGING Gentle Mode

► Upozornění

Kontraindikace

1. Děti mají zakázáno zařízení používat.
2. Lidé s elektronickými lidskými orgány mají zakázáno zařízení používat.
3. Lidé s otoky kůže, po operaci, spálení sluncem nebo jinými kožními příznaky mají zakázáno zařízení používat.
4. Lidé kteří mají záněty kůže, jako jsou opruzeniny, lupénka, ekzémy, vyrážka, recidivující herpes simplex, zjizvení, poškození a elektromagnetická citlivost, těhotné ženy, kojící ženy, hemofilie hemoragická onemocnění, kožní charakteristiky dermatitida je zakázáno používat.
5. Nepoužívejte po dlouhou dobu na stejném místě.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud jste do jednoho měsíce podstoupili operaci kůže nebo jste se vážně spálili.
7. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem, pokud jste podstoupil plastickou operaci.
8. Nedoporučuje se používat pokud máte kovovou zubní náhradu.
9. Nepoužívejte masážní kuličku, LED světlo přímo na oční bulvu.
10. Hodinky, brýle, umělé řasy nebo jiné kovové předměty musí být před provozem odstraněny.

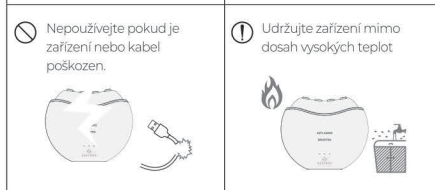

Čištění

Po použití masážní perličku otřete měkkým hadříkem. Neponořujte zařízení do vody.

Skladování

Uchovávejte jej na suchém a bezprašném místě. Chraňte jej před korozivní kapalinou. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

► FAQ

| Q | A | Řešení |
|---|---|--|
| Nepodařilo se zapnout nebo nesvítil kontrolka. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zařízení je vybité 2. Světla jsou rozbitá nebo je poškozen program. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabíjete zařízení po dobu 4 hodin a zkuste to znovu. 2. Pokud to stále nefunguje, obraťte se na tým poprodejních služeb s žádostí o pomoc. |
| Po nabití zařízení nefunguje | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabel/adaptér USB není správně připojen. 2. Zařízení není dostatečně nabit. 3. Baterie dosáhla konce své životnosti. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte kontakt mezi zařízením a nabíječkou (kontrolka během nabíjení bliká). 2. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte tým poprodejních služeb. |
| Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno (≥ 6 měsíců), nejprve zařízení plně nabijte. | | |

► Schéma obvodu

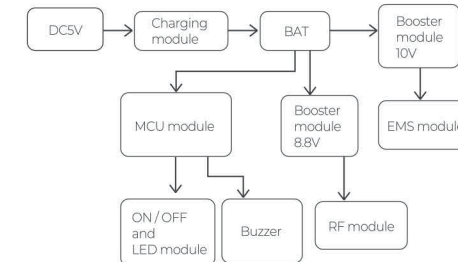


Schéma zapojení je POUZE pro informaci.

Prohlášení: Obsah tohoto dokumentu byl ověřen. Technologie produktu nebo upgrady softwaru budou zkompileovány do nové verze manuálu. Pokud se vzhled, barva a výkon změní, podívejte se na aktuální verzi.