
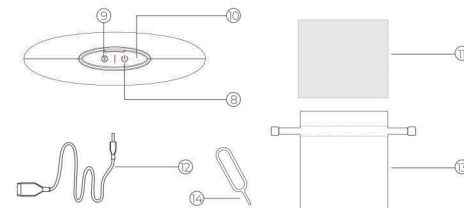


Tartalom	1
Műszaki adatok	2
Az alkatrészek leírása	2/3
Funkciók	3
Ajánlás	4/5
Hogyan kell használni	5/6
Biztonsági figyelmeztetés	6/7
FAQ	8
Áramköri rajz	9

Sz.	Tétel	Mértékegység	Műszaki adatok
1	Üzemi feszültség	V	3,7V
2	Névleges teljesítmény	W	5W
3	Működési idő minden üzemmódhoz	min	6 perc
4	Elemtípus	/	500 mAh lítium akkumulátor 3,7V
5	Vízállóság	/	IPX5
6	Töltés ideje:	H	<4 óra

- ① Mágneses burkolat ② 4 masszázsgolyó ③ Hajlított masszázsfej
 ④ LED lámpa ⑤ ANTI-AGING üzemmód lámpa
 ⑥ A BRIGHTEN mód jelzőfénye ⑦ Tápellátás jelzőfénye
 ⑧ On/Off/Mode gomb ⑨ DC töltőport

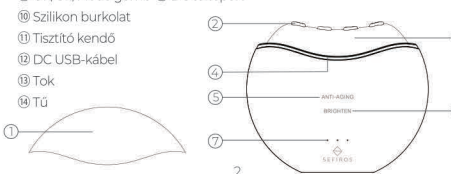

MEGJEGYZÉS: A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, amely egyenárammal működik.
 Csak a töltőkábellel töltsé (a csomag része).

Az GuSha5 RF bőrfeszítő készülék egyesíti az RF-et (Radio Frekvencia), EMS, piros LED fény és többfrekvenciás vibrációs technológia, 4 masszázsgolyóval és speciális ívelt masszázsféjjel.

Egyedi Hall mágneses kapcsoló. A termék az arcon és a nyakon fejti ki hatását, és javítja a bőr mikrokeringését a kollagén mélyen erősítésével, a világos vonalakat csökkentő, a kontúrokat emelő és a bőr ragyogását jelentő hatás elérése érdekében.

***Kíméletes/erős ANTI-AGING mód**

Az RF és a magas frekvenciájú rezgések elősegítik a kollagén aktiválását, javítják a vérkeringést és kisimítják a ráncokat.

***BRIGHTEN Lágy/erős mód**

Az RF, az EMS és a piros LED-fény magas frekvenciájú rezgéssel segíti az arc és a nyak kontúrjának kiemelését, miközben regenerálja a kollagént.

C.	Tétel	Ajánlás
1	ON	① Kíméletes ANTI-AGING mód: Távolítsa el a mágneses fedelet, vagy nyomja meg az ON/OFF gombot 1 másodpercig. Hangjelzéssel a gyengéd ANTI-AGING üzemmód alacsony frekvenciájú rezgéssel és rádiófrekvenciával kezd működni, és kigyullad a fehér fény. ② ANTI-AGING erős mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. I-AGING Strong Mode üzemmód magas frekvenciájú rezgéssel és rádiófrekvenciával kezd működni, és a narancssárga fény világít. ③ BRIGHTEN - Gyengéd mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. A BRIGHTEN Gentle Mode alacsony frekvenciájú rezgéssel és piros LED fénnel, EMS-sel 2 masszázsponton és RF-vel 2 masszázsponton és fehér jelzőfénnel kezd működni. ④ BRIGHTEN Erős mód: Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmód váltásához. A BRIGHTEN Strong mód magas frekvenciájú rezgéssel és piros LED fénnel kezd működni, 2 masszázsponton EMS, 2 masszázsponton RF és narancssárga jelzőfény világít.
2	OFF	Helyezze fel a mágneses fedelet, vagy tartsa lenyomva az On/OFF gombot 1 mp-ig minden üzemmódban, a készülék szipolással kikapcsol.
3	Alacsony akkumulátor	1. Ha a készülék működik és a tápellátás elegendő, 3 lámpa világít. 2. Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 10%, a jelzőfények folyamatosan villognak balról jobbra. 3. Ha az akkumulátor lemerült, a 3 jelzőfény 2-szer felviláglik, majd kialszik.

SEFIROS
your pure beauty.



GuSha5

KOZMETIKAI ESZKÖZ A NYAK ÉS AZ ARC
BŐRÉNEK FESZESÍTÉSÉRE

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

SEFIROS
your pure beauty.

Név: Kozmetikai eszköz a nyak és az arc bőrének feszesítésére

Model: GuSha5

Méret: 90.4 x 86.35 x 26.4mm (L x W x H)

Importer: VIVANTIS a.s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim,
Czech Republic

4	Töltés	3 lámpa folyamatosan villog balról jobbra.t
5	Teljesen feltöltve	3 tápfeszültség jelzőfény világít.

Hogyan kell használni

A következő minta eljárás (kép és szöveg lent), a „Funkciók” részben kiválaszthatja a használni kívánt módot.



1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű gélt az arcra és a nyakra.



3. Helyezze a masszázsgolyókat az arc és a nyak bőrére, lassan, állandó sebességgel felfelé haladva.



2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza az ANTI-AGING vagy a BRIGHTEN módot



4. 1 percenként sípoló hang hallatszik, hogy emlékeztesse a területváltásra. És a készülék 6 percen belül kikapcsol.



5. Törölje le a masszázsgolyókat, majd helyezze rá a huzatot tároláshoz.

Tippek:

1. A készülék memória funkciójával visszaállítja az utoljára használt módot.
- 2 A gyári beállítás ANTI-AGING Gentle Mode-ban van

Értesítés

Ellenjavallat:

1. Gyermekeknek tilos a készülék használata.
- 2 Elektronikus emberi szervvel rendelkező személyeknek tilos a készülék használata.
3. Tilos a készülék használata azoknak, akik bőrduzzanattal, műtét után, napégéssel vagy egyéb bőrtünetekkel rendelkeznek.
4. Bőrgyulladásban szenvedők, pl. duzzanat, pikkelysömör, ekcéma, kiütés, visszatérő herpes simplex, hegeseedés, sérülés és elektromágneses érzékenység, terhes nők, szoptató nők, vérzéses hemofília betegség, bőr jellemzői dermatitis használata tilos.
5. Ne használja hosszú ideig ugyanazon a helyen.
6. Ne használja a készüléket, ha egy hónapon belül bőrműtéten esett át vagy súlyos égési sérülést szenvedett.
7. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával, ha plasztikai műtéten esett át.
- 8 Használata nem javasolt, ha fém fogsora van.
9. Ne használja a masszázsgolyót, a LED-lámpát közvetlenül a szemgolyón.
- 10 Az órákat, szemüvegeket, műszempillákat vagy egyéb fémtárgyakat használat előtt el kell távolítani.

❌ Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.	❌ Kérjük, ne használja a készüléket töltés közben.
⚠️ Ne szerelje szét ezt a készüléket saját maga.	❌ Ha a készülék sérült vagy leesett, használat előtt ellenőrizze.
❌ Ne használja, ha a készülék vagy az USB-kábel megsérült.	⚠️ Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.

Tisztítás

Használat után törölje le a masszázsgyöngyöt puha ruhával. Ne merítse vízbe a készüléket.


Tárolás

Tárolja száraz és pormentes helyen. Óvja a korrózív folyadéktól. Tartsa távol a gyermekektől.

FAQ

Q	A	Megoldás
Nem sikerült bekapcsolni, vagy a lámpa nem világít.	① Das Gerät ist entladen ② Die Lichter sind defekt oder das Programm ist beschädigt	① Töltse a készüléket 4 órán keresztül, majd próbálja újra. ② Ha továbbra sem működik, kérjük, forduljon a vevőszolgálati csapathoz segítségért.
A készülék töltés után nem működik	① Az USB-kábel/adapter nincs megfelelően csatlakoztatva. ② A készülék nincs eléggé feltöltve. ③ Az akkumulátor elérte élettartama végét.	① Ellenőrizze az érintkezést a készülék és a töltő között (töltés közben a jelzőfény villog). ② Ha továbbra sem működik, forduljon a vevőszolgálati csapathoz.
Ha a készüléket hosszabb ideig (≥ 6 hónapig) nem használta, először töltsen fel teljesen.		

Áramköri rajz

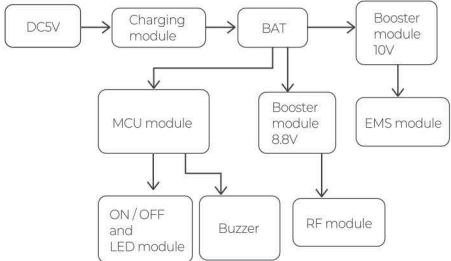

A bekapcsolási rajz CSAK tájékoztató jellegű.

Nyilatkozat: A dokumentum tartalmát ellenőriztük. A terméktechnológiákat vagy a szoftverfrissítéseket a kézikönyv egy új verziójába állítják össze. Ha a megjelenés, a szín és a teljesítmény megváltozik, ellenőrizze az aktuális verziót.