

GuSha5

DISPOSITIVO COSMETICO PER IL RASSODAMENTO DELLA PELLE DEL COLLO E VISO

Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima dell'uso

ITALIANO

► **Contenuto**


Contenuto	1
Specifiche tecniche	2
Descrizione delle parti	2/3
Funzione	3
Indicazione	4/5
Modo d'uso	5/6
Avviso di sicurezza	6/7
FAQ	8
Schema elettrico	9

► **Specifiche tecniche**

N.	Item	Unità	Specifiche
1	Tensione di esercizio	V	3.7V
2	Potenza nominale	W	5W
3	Tempo di funzionamento per ciascuna modalità	min	6 minuti
4	Tipo di batteria	/	Batteria al Litio da 500 mAh 3,7V
5	Resistenza all'acqua	/	IPX5
6	Tempo di carica	H	<4H

► **Descrizione delle parti**

- ① Copertura magnetica
- ② 4 sfere massaggianti
- ③ Testina massaggiante curva
- ④ Spia LED
- ⑤ Spia modalità ANTI-AGING
- ⑥ Indicatore luminoso della modalità BRIGHTEN
- ⑦ Indicatore di alimentazione
- ⑧ Pulsante On/Off/Modalità
- ⑨ Porta di ricarica CC
- ⑩ Copertura in silicone
- ⑪ Panno per la pulizia
- ⑫ Cavo USB DC
- ⑬ Caso
- ⑭ Ago

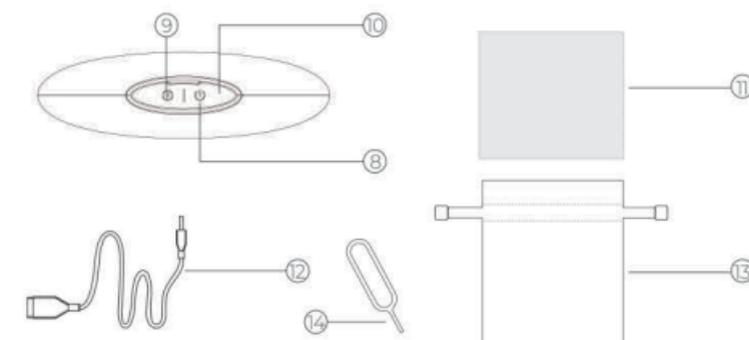

NOTA: Il dispositivo ha una batteria al litio integrata alimentata a corrente continua. Ricarica solo con il cavo di ricarica (incluso nella confezione).

► **Funzione**

Il dispositivo per stringere la pelle **GuSha5** combina RF (Radio Frequenza), EMS, luce LED rossa e tecnologia di vibrazione multifrequenza, con 4 sfere massaggianti e una speciale testina massaggiante curva. Interruttore magnetico Hall unico. Il prodotto agisce su viso e collo e migliora la microcircolazione cutanea rafforzando in profondità il collagene, per ottenere l'effetto di ridurre le rughe, sollevare i contorni e illuminare la pelle.
*Modalità ANTI-ETA' fine/forte
RF e vibrazioni ad alta frequenza aiutano ad attivare il collagene, migliorare la circolazione sanguigna e levigare le rughe.
*LUMINOSO Modalità morbida/forte
RF, EMS e luce LED rossa con vibrazioni ad alta frequenza aiutano a sollevare i contorni del viso e del collo rigenerando il collagene.

► **Indicazione**

N.	Item	Indicazione
1	ON	<p>① Modalità ANTI-ETA' fine: Rimuovere il coperchio magnetico o premere il pulsante ON/OFF per 1 s. Con un segnale acustico, la modalità ANTI-AGING delicata inizia a funzionare con vibrazioni a bassa frequenza e RF e la luce bianca si accende.</p> <p>② Modalità ANTI-ETA' forte: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. ANTI-INVECCHIAMENTO La modalità forte inizierà a funzionare con vibrazioni ad alta frequenza e RF e la luce arancione si accenderà.</p> <p>③ BRIGHTEN Modalità fine: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. BRIGHTEN La modalità delicata inizierà a funzionare con vibrazione a bassa frequenza e luce LED rossa, EMS su 2 punti di massaggio e RF su 2 punti di massaggio e la spia bianca.</p> <p>④ BRIGHTEN Modalità forte: Premere il pulsante ON/OFF per cambiare modalità. BRIGHTEN La modalità forte inizierà a funzionare con vibrazione ad alta frequenza e luce LED rossa, EMS su 2 punti di massaggio e RF su 2 punti di massaggio e l'indicatore arancione si accende.</p>
2	OFF	Indossare la cover magnetica o premere il pulsante On/OFF per 1s in tutte le modalità, il dispositivo si spegnerà emettendo un segnale acustico.
3	Batteria scarica	<p>1. Quando il dispositivo è in funzione e l'alimentazione è sufficiente, si accendono 3 spie.</p> <p>2. Quando la batteria è inferiore al 10%, le luci lampeggiano continuamente da sinistra a destra.</p> <p>3. Quando la batteria è scarica, le 3 spie lampeggeranno 2 volte e poi si spegneranno.</p>

4	Ricarica	3 luci lampeggiano continuamente da sinistra a destra.
5	Completamente carico	3 spie di alimentazione sono accese.

► Modo d'usot

Di seguito è riportata la procedura di esempio (immagine e testo sotto), puoi scegliere qualsiasi modalità che desideri utilizzare in base alle "Funzioni"



1. Applicare la giusta quantità di gel sul viso e collo.




2. Accendi il dispositivo e seleziona la modalità ANTI-ETA' o LUMINOSITA'



3. Posizionare le palline massaggianti sulla pelle del viso e del collo, muovendole lentamente verso l'alto a velocità costante.

5

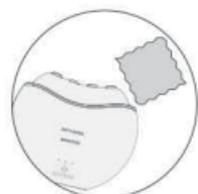

5. Pulisci le palline da massaggio e poi rimetti il coperchio per riporle.

► Avviso

Controindicazione

1. Ai bambini è vietato utilizzare il dispositivo.
2. Le persone con organi umani elettronici non possono utilizzare il dispositivo.
3. Le persone con gonfiore della pelle, dopo un intervento chirurgico, scottature solari o altri sintomi della pelle non possono utilizzare il dispositivo.
4. Persone che hanno infiammazioni cutanee come lividi, psoriasi, eczema, eruzioni cutanee, herpes simplex ricorrente, cicatrici, danni e sensibilità elettromagnetica, donne in gravidanza, donne che allattano, emofilia emorragica malattia, caratteristiche della pelle dermatite è vietato l'uso.
5. Non utilizzare a lungo nello stesso posto.
6. Non utilizzare il dispositivo se hai subito un intervento chirurgico alla pelle o una grave ustione entro un mese.
7. Consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo se si è stati sottoposti a interventi di chirurgia plastica.
8. Se ne sconsiglia l'uso se si dispone di protesi in metallo.
9. Non utilizzare la palla da massaggio, la luce a LED direttamente sul bulbo oculare.
10. Orologi, occhiali, ciglia finte o altri oggetti metallici devono essere rimossi prima dell'uso.

6

Consigli:

1. Utilizzando la funzione di memoria del dispositivo, ripristina l'ultima modalità utilizzata.
2. L'impostazione di fabbrica è Modalità delicata ANTI-ETA'

⊘ Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.

⊘ Si prega di non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

⊘ Non smontare questo dispositivo da soli.

⊘ Se il dispositivo è danneggiato o cade, ispezionarlo prima dell'uso.

⊘ Non utilizzarlo se il dispositivo o il cavo USB sono rotti.

⚠ Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate.

7

Pulizia

Dopo l'uso, pulire il tallone da massaggio con un panno morbido. Non immergere il dispositivo in acqua.

Magazzinaggio


Conservarlo in un luogo asciutto e privo di polvere. Proteggerlo da liquidi corrosivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

► FAQ

Q	A	Soluzione
Impossibile accendere o la luce è spenta.	① Il dispositivo è scarico ② Le luci sono rotte o il programma è danneggiato.	① Caricare il dispositivo per 4 ore e riprovare. ② Se ancora non funziona, contattare il team del servizio post-vendita per assistenza.
Il dispositivo non funziona dopo la ricarica	① Il cavo/adattatore USB non è collegato correttamente. ② Il dispositivo non è sufficientemente carico. ③ La batteria ha raggiunto la fine della sua durata.	① Verificare il contatto tra il dispositivo e il caricabatteria (la spia lampeggia durante la carica). ② Se continua a non funzionare, contattare il team di assistenza post-vendita.
Se il dispositivo non è stato utilizzato per molto tempo (≥ 6 mesi), caricare prima completamente il dispositivo.		

8

► Schema elettrico

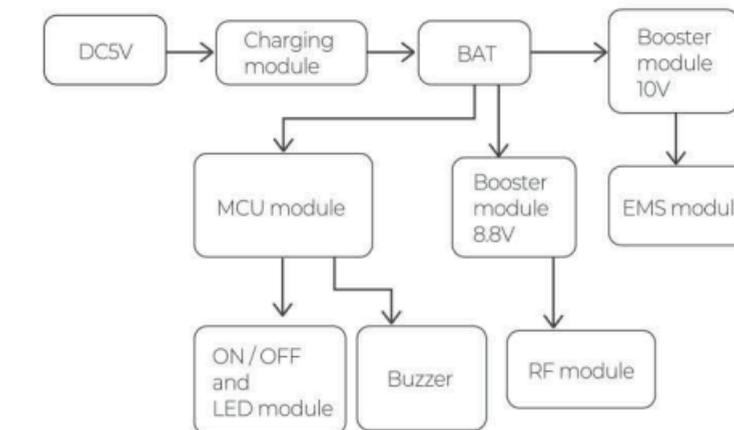

Lo schema elettrico è SOLO per riferimento.

Dichiarazione: Il contenuto di questo documento è stato verificato. La tecnologia del prodotto o gli aggiornamenti software verranno inseriti in una nuova versione del manuale. Se l'aspetto, il colore e le prestazioni cambiano, controlla la versione corrente.

9